

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

Dante #36 - Int 1101, Col. Anzures, Alcaldía- Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11590.
Oficina: 55 72 58 40 93

PARA LEVANTAR UN REPORTE: e.diaz@steelcogroup.com

RFC: CSS140915C58

Móvil: 55 71 19 05 02



CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

FOLIO: **Nº 1627**

REPORTE DE SERVICIO

OLICITUD No.	050GYROAN09125-003-00	UNIDAD MÉDICA:	HGR No. 1
NOMBRE DEL ENCARGADO:		DIRECCIÓN:	CANADA 16001, RIO TIJUANA 3a
CARGO:			TIJUANA B. C.
TEL. DE CONTACTO:			
CORREO:			

EQUIPO / TIPO DE MAQUINA	DESCRIPCIÓN
ESTERILIZADORA PEROXIDO DE HIDROGENO.	☒ Mantenimiento Preventivo ☐ Mantenimiento Correctivo ☐ Modificación ☐ Otro
GARANTÍA:	☒ Cubierto ☐ Fuera ☐ Instalación ☐ Arranque ☐ Capacitación ☐ Otro

CÓDIGO DE LA MAQUINA / MODELO	NÚMERO DE SERIE:	19A0310L5025
PL130/1	NÚMERO DE CICLOS:	

FALLA REPORTADA / No. DE ALARMA:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

FALLA ENCONTRADA:

N/A

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

REVISION DE FILTROS.

REVISION DE ACEITE.

REVISION DE SENSOR DE HUMEDAD.

REVISION DE OUBIAS.

SE REALIZA LIMPIEZA.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO 04 JUL 2025

CONSERVACION HGR No. 1

Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1

CONCLUSIÓN:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO 100%. PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO.

PIEZA DE SUSTITUTO		SELLO DE LA INSTITUCION
CANTIDAD / No. PIEZAS	DESCRIPCIÓN	
1	KIT DE MANTENIMIENTO. PM70001303	

OBSERVACIONES

SE ENTREGA BITACORA.


INGENIERO DE SERVICIO STEELCO	LUGAR	CLIENTE
Ing. Oscar Arzoo	CETE	Carlos Oswaldo Ramirez González
		Subjefe de Conservación
		H.G.R. No. 1
		000724980
DISTRIBUIDOR (EN CASO DE QUE APLIQUE) / OTRO	FECHA	ÁREA USUARIA
	4/Julio/25	Lic. Laura Talde Zavala
		SJE
		Mar 0072300

Ing. Oscar Aguilar

"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE
REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1°, 2° Y
3ER. NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA".

**Rutina de mantenimiento preventivo de conformidad con lo planteado por el fabricante, para
esterilizadores de baja temperatura por peróxido de hidrogeno:**

1. Verificar estado de filtro aire HEPA (código 045566), en caso de ser necesario, sustituir
2. Verificar y limpiar el filtro de escape (código PL001070), en caso de ser necesario, sustituir
3. Verificar el sensor y filtro de humedad (código 013831), en caso de ser necesario, sustituir
4. Verificar y/o Limpiar empaque del vaporizador (código 021304), en caso de más de 300 ciclos, sustituir
5. Limpiar el adaptador del vaporizador (código PL001073)
6. Verificar la guarnición de descarga de aceite de la bomba de vacío (PL001099) en caso de más de 300 ciclos sustituir
7. Verificar el filtro de aceite de la bomba de vacío (código PL130 → PL001104) en caso de más de 300 ciclos sustituir
8. Verificar la guarnición de la puerta (código PL70 → PL002035, PL130 → PL001075) en caso de más de 500 ciclos o dos años, sustituir
9. Revisión y limpieza de los vasos de inspección del generador plasma (code 500180) en caso de más de 500 ciclos o dos años, sustituir
10. Revisión y limpieza de los O-rings del generador plasma (código 400064) en caso de más de 300 ciclos o dos años, sustituir
11. Revisión de estado los electrodos del generador (código PL001921) en caso de más de 500 ciclos o dos años, sustituir
12. Revisión de estado de la batería PLC battery (código 010262), en caso de tener carga baja, sustituir
13. Revisar la batería de la pantalla (código PL70 → 010427, PL130 → 014508), en caso de tener carga baja, sustituir

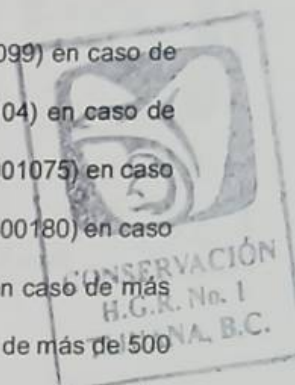

Asimismo, daremos cumplimiento a la rutina establecida en el Anexo E "Rutinas de mantenimiento" de conformidad con el procedimiento de contratación para Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica."

31. ESTERILIZADOR PEROXIDO DE HIDROGENO

1. Comentar acerca de la operación del equipo con el personal involucrado.
2. Inspeccionar los registros y/o graficas del equipo para ver señales de falla o problema.
3. Correr un ciclo de prueba para analizar su funcionamiento.
4. Instalar equipo de prueba.
5. Cuando sea necesario cortar los suministros del hospital y drenar todas las líneas
6. Inspeccionar que la puerta tenga una fácil operación.
7. Inspeccionar el estado del empaque remplazar cuando sea necesario.
8. Inspeccionar alineamiento de la puerta.
9. Lubricar bisagra y pernos de bisagra.
10. Inspeccionar faltante de tornillos y apriete.
11. Inspeccionar el seguro de puerta y la rondana axial.
12. Inspeccionar el diafragma de seguro de puerta-cambiar-
13. Engrasar baleros, pernos y mecanismos de puerta.
14. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
15. Hacer revisión interna de cada válvula, para su fácil operación y sello apropiado.
16. Inspeccionar fugas en válvulas.

Carlos Amador Ramirez Gonzalez
Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Convocatoria:

Contrato:

Proveedor: Casonato Steelco SPA, S.A. de C.V.

Ing. OSCAR ARANDA

17. Inspeccionar válvula check remplazar si así se requiere.
18. Inspeccionar regulador de vapor para una operación adecuada
19. Correr un ciclo manual para aprobar operación de válvula de distribución.
20. Remplazar un regulador de vapor si así se requiere.
21. Hacer una revisión y limpieza del sello.
22. Inspeccionar la bobina y cableado.
23. Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.
24. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
25. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
26. Inspeccionar el funcionamiento adecuado hermético de la válvula.
27. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
28. Remplazarla si tiene fuga por el sello o por el sello o por abrirse antes o después de su rango de seguridad.
29. Inspeccionar filtro libre de residuos, limpiar cuando sea necesario.
30. Inspeccionar colador libre de pelusa.
31. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
32. Inspeccionar trampa de vapor para una operación adecuada.
33. Remplazar trampa de vapor si así se requiere.
34. Inspeccionar cada rompedor de vacío para una adecuada operación.
35. Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.
36. Inspeccionar cada manómetro, su precisión acorde manómetro de prueba, que no este des calibrado o roto.
37. Inspeccionar fugas en uniones y blocks.
38. Remplazar manómetro si así se requiere.
39. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
40. Desconectar corriente al Generador.
41. Inspeccionar el cableado y conexiones, ver fallas y falsos contactos.
42. Limpiar resistencias y cámara del generador.
43. Limpiar niveles de agua (electro niveles y/b flotador).
44. Desincrustar cámara de generador.
45. Checar operación del manómetro de presión.
46. Verificar ajuste adecuado de los switches de presión (control y seguridad).
47. Verificar funcionamiento (control)
48. Calibrar temperatura y presión.
49. Checar adecuada operación timer (reloj) o Control digital
50. Checar focos indicadores.
51. Verificar cableado y falso contactos del control digital.
52. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
53. Remplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.
54. Verificar funcionamiento (control)
55. En caso de ser necesario utilizar un limpiador de precisión para la limpieza y mantenimiento de los circuitos básicos eléctricos y electrónicos, componentes y circuitos eléctricos y electrónico~ . . 100% dieléctrico y antiestático que no ataque plásticos sensibles que desintegra las grasas, polvo y residuos industriales, sin alterar los materiales.
56. Verificar la correcta conexión de conectores y conductores eléctricos.
57. Verificar la operación adecuada de la fuente de voltaje de 5 vcc, 12 vcc y las que correspondan de acuerdo con el diagrama eléctrico / electrónico.
58. Verificar la operación adecuada de las salidas de señales analógicas y digitales.
59. Verificar el accionamiento de las señales eléctricas hacia las válvulas de control de proceso.
60. Limpiar manchas y suciedad de todos los componentes
61. Inspeccionar cableado, terminales, conexiones dañadas o falsos contactos.
62. Trabajar la máquina en cada ciclo y verificar operación apropiada, checar todos los displays y reportes.



Cirio...
...
H.G.R. No. 1

Carlos Usando Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS
Mat. 9901980

Lic. Laura Taidé Zavala Montoya
S.Y.E
Mat. 9972347



Miele Group Member

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

Convocatoria:

Contrato:

Proveedor: Casonato Steelco SPA, S.A. de C.V.

H.G. Oscar Arzulo

63. Remover todo equipo de prueba instalado, para inspección.
64. Instalar cualquier panel o cubierta removida durante inspección.
65. Inspeccionar áreas para asegurar el retirar todos los materiales usados durante la inspección.
66. Verificar el correcto y seguro funcionamiento de cada ciclo de esterilización
67. Para modelos que aplique, efectuar prueba dart, para validar la eficiencia del vacío en cámara.
68. Efectuar validación del proceso de esterilización con indicadores biológicos.
69. Verificar adecuado funcionamiento de impresoras (cuando aplique).
70. Correr ciclo de prueba para verificar el correcto funcionamiento del equipo.
71. Al finalizar la rutina se realizarán pruebas finales de buen funcionamiento y se proporcionaran recomendaciones al personal para su buen cuidado y operación

[Signature]
Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjeto de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS MEX 19024980

Lic. Laura Talde
SJE
IMSS
12347



Clinica Prehospital
0205 02 14 2302
H.G.R. No. 1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECEBIDO
04 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1