

CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

Dante #36 - Int 1101, Col. Anzures, Alcaldía- Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11590

Oficina: 55 72 58 40 93

PARA LEVANTAR UN REPORTE: e.diaz@steelcogroup.com

RFC: CSS140915C58

Móvil: 55 71 19 05 02



CASONATO STEELCO SPA S.A. DE C.V.

FOLIO: N° 1629

REPORTE DE SERVICIO

SOLICITUD No.	050GYRO19N09125-003-00	UNIDAD MÉDICA:	H. G. R. No. 1
NOMBRE DEL ENCARGADO:		DIRECCIÓN:	CANA 916 801, RIOTIVANA 3a
CARGO:			TIJUANA B.C.
TEL. DE CONTACTO:			
CORREO:			

EQUIPO / TIPO DE MAQUINA	DESCRIPCIÓN
ESTERILIZADOR.	☐ Instalación ☐ Arranque ☐ Capacitación ☐ Otro
GARANTÍA:	☒ Cubierto ☐ Fuera

CÓDIGO DE LA MAQUINA / MODELO	NÚMERO DE SERIE:	13242
V53/2	NÚMERO DE CICLOS:	6702

FALLA REPORTADA / No. DE ALARMA:	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
----------------------------------	----------------------------------

FALLA ENCONTRADA:	N/A.
-------------------	------

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:	CONSERVACIÓN HGR No. 1
LIMPIEZA DE VÁLVULAS CHECK, FILTROS DE AGUA Y AIRE	
ADJUSTE DE CONEXIONES CLAMP, REVISIÓN DE EMPAQUES	
REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y FUSIBLES.	
REVISIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN Y TEMPERATURA.	
REVISIÓN DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS Y MANTENIMIENTO	

CONCLUSIÓN:	Clave Presupuestal 0205 0214 2902
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO 100% PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO.	H.G.R. No. 1

PIEZA DE SUSTITUTO	SELO DE LA INSTITUCIÓN														
<table><tr><th>CANTIDAD / No. PIEZAS</th><th>DESCRIPCIÓN</th></tr><tr><td>2</td><td>EMPAQUES DE PUERTA.</td></tr><tr><td>2</td><td>COLECTORES RAPIDOS 4mm</td></tr><tr><td>2</td><td>EMPAQUES CLAMP</td></tr><tr><td>1</td><td>EMPAQUE TEFLOON 1/2"</td></tr><tr><td>1</td><td>EMPAQUE TEFLOON 1"</td></tr><tr><td>2</td><td>SWITCH DE PUERTA.</td></tr></table>	CANTIDAD / No. PIEZAS	DESCRIPCIÓN	2	EMPAQUES DE PUERTA.	2	COLECTORES RAPIDOS 4mm	2	EMPAQUES CLAMP	1	EMPAQUE TEFLOON 1/2"	1	EMPAQUE TEFLOON 1"	2	SWITCH DE PUERTA.	
CANTIDAD / No. PIEZAS	DESCRIPCIÓN														
2	EMPAQUES DE PUERTA.														
2	COLECTORES RAPIDOS 4mm														
2	EMPAQUES CLAMP														
1	EMPAQUE TEFLOON 1/2"														
1	EMPAQUE TEFLOON 1"														
2	SWITCH DE PUERTA.														

OBSERVACIONES
SE ENTREGA BITÁCORAS.

INGENIERO DE SERVICIO STEELCO
H. Oscar Anzures

LUGAR: BANCO DE LECHE

CLIENTE	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
	Subjefe de Conservación
	H.G.R. No. 1
	Mat. 99024980

DISTRIBUIDOR (EN CASO DE QUE APLIQUE) / OTRO

FECHA: 7/Julio/25

ÁREA USUARIA	N25 Sandro Garcia Orozco
	Jeefe de Oficina
	Dietoterapeutica y Enfermeria
	Mat. 99023913

Convocatoria:

Contrato:


Proveedor: Casonato Steelco SPA, S.A. de C.V.

Lic. Oscar Anzures

"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REFACCIONES DE ALTA ESPECIALIDAD A EQUIPOS MÉDICOS, EN UNIDADES DE 1°, 2° Y 3ER. NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA".

Rutina de mantenimiento preventivo de conformidad con lo planteado por el fabricante, para esterilizadores de vapor (autogenerados / vapor directo):

1. Comprobar que no es posible poner en marcha un ciclo de esterilización con la puerta abierta. Para realizar este control, pulsar el botón "start" en el menú de mando; debe aparecer el mensaje "atención puertas no cerradas"
2. Comprobar además que, si se pulsa el botón "apertura puertas", no es posible abrir las puertas durante la ejecución de los ciclos de esterilización.
3. Durante esta operación no permanecer en la zona de seguridad
4. Sustituir las juntas: quitar la junta, limpiar muy bien la ranura con un paño scotch-brite o con un paño impregnado en alcohol desnaturalizado, volver a colocar la nueva junta en la ranura después de tratarla con polvo de talco o aceite lubricante adecuado.
5. Comprobar visualmente el control de nivel.
6. Comprobar que no hay restos de óxido, si es así, eliminarlos;
7. Verificar las conexiones del tablero eléctrico: apretar los terminales de conexión poniendo especial atención al cableado de potencia
8. Comprobar el estado de integridad del cableado de potencia, con particular atención al estado de desgaste del mismo
9. Comprobar el estado de los contactores (prestando particular atención a los contactores de las resistencias de calentamiento) y, en su caso, sustituirlos;
10. Comprobar los fusibles de las resistencias en las autoclaves dotadas de generador eléctrico y, en su caso, sustituirlos;
11. Comprobar la eficiencia de todas las válvulas antirretorno.
12. Verificar y si procede realizar la descalcificación del generador del vapor (si lo hubiera);
13. Limpiar con cuidado la cámara de esterilización después de quitar las posibles estructuras internas (operación que se debe realizar con la cámara fría);
14. Verificar, limpiar y lubricar los dispositivos de desplazamiento de las puertas, sustituyendo si fuera necesario las piezas desgastadas (cojinetes/guías de deslizamiento);
15. Verificar la estanqueidad de las juntas, y la tubería: en caso de desmontaje;
16. Verificar, y si es necesario limpiar o sustituir las sondas de nivel

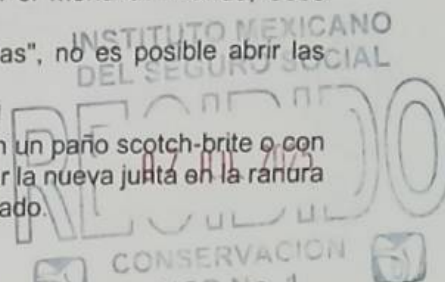

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Asimismo, daremos cumplimiento a la rutina establecida en el Anexo E "Rutinas de mantenimiento" de conformidad con el procedimiento de contratación para Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con Refacciones de Alta Especialidad a Equipos Médicos en Unidades de 1°, 2° y 3er. Nivel de Atención Médica."

30 ESTERILIZADOR

Preparación

1. Comentar acerca de la operación del equipo con el personal involucrado.
2. Inspeccionar los registros y/o graficas del equipo para ver señales de falla o problema.
3. Correr un ciclo de prueba para analizar su funcionamiento.
4. Instalar equipo de prueba.
5. Cuando sea necesario cortar los suministros del hospital y drenar todas las líneas
- Ensamble de Puerta (cada puerta en unidades con doble puerta)
1. Inspeccionar que la puerta tenga una fácil operación.
2. Inspeccionar el estado del empaque reemplazar cuando sea necesario.
3. Inspecciona (alineamiento de la puerta).
4. Lubricar bisagra y pernos de bisagra.
5. Inspeccionar faltante de tornillos y apriete.
6. Inspeccionar el seguro de puerta y la rondana axial.

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
ISS Mat. 99024980



Lic. Laura Talledo Zavala Montoya
SJE
Mat. 9912347

Convocatoria:

Contrato:

Proveedor: Casonato Steelco SPA, S.A. de C.V.

Ing. Oscar Arce

7. Inspeccionar el diafragma de seguro de puerta-cambiar-
8. Engrasar baleros, pernos y mecanismos de puerta.
9. Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Cada Válvula manual

1. Hacer revisión interna de cada válvula, para su fácil operación y sello apropiado.
2. Inspeccionar fugas en válvulas.
3. Inspeccionar válvula check reemplazar si así se requiere.
4. Inspeccionar regulador de vapor para una operación adecuada
5. Correr un ciclo manual para armar operación de válvula de distribución
6. Reemplazar un regulador de vapor si así se requiere.

Cada Válvula solenoide

1. Hacer una revisión y limpieza del sello.
2. Inspeccionar la bobina y cableado.
3. Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.
4. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
5. Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Válvula de seguridad

1. Inspeccionar el funcionamiento adecuado hermético de la válvula
2. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
3. Reemplazarla si tiene fugo por el sello o por el sello o por abrirse antes o después rango de seguridad.

Cada filtro aire, Chaqueta, Regulador

1. Inspeccionar filtro libre de residuos, limpiar cuando sea necesario.

Filtro de cámara

1. Inspeccionar colador libre de pelusa.
2. Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Cada Trampa de vapor.

1. Inspeccionar trampa de vapor para una operación adecuada.
2. Reemplazar trampa de vapor se así se requiere.

Cada Rompedor de Vacío

1. Inspeccionar cada rompedor de vacío para una adecuada operación.
2. Reconstruir o cambiar rompedor de vacío.

Cada Manómetro o manovacuometro


1. Inspeccionar cada manómetro, su precisión acorde manómetro de prueba, que no esté des calibrado o roto.
2. Inspeccionar fugas en uniones y blocks.
3. Reemplazar manómetro si así se requiere.
4. Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

Generador eléctrico de vapor


1. Desconectar corriente al Generador.
2. Inspeccionar el cableado y conexiones, ver fallas y falsos contactos:
3. Limpiar resistencias y cámara del generador.
4. Limpiar niveles de agua (electro niveles y/o flotador).
5. Desincrustar cámara de generador.
6. Checar operación del manómetro de presión.
7. Verificar ajuste adecuado de los switches de presión (control y seguridad).

Control Semi automático Ciclomático (cuando sea aplicable)

1. Verificar funcionamiento (control)
2. Calibrar temperatura y presión.
3. Checar adecuada operación timer (reloj) o Control digital
4. Checar focos indicadores.
5. Verificar cableado y falso contactos del control digital.
6. Correr un ciclo manual para aprobar su funcionamiento.
7. Reemplazar cualquier parte dañada, gastada o rota.

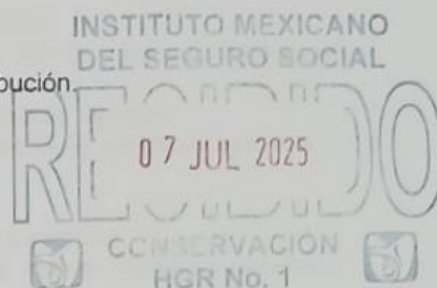

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

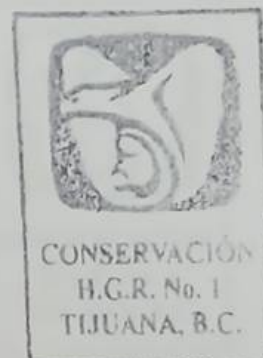

Lic. Laura Tzide Zavala Montoya
S/E
Mat-9913347

Convocatoria:

Contrato:

Proveedor: Casonato Steelco SPA, S.A. de C.V.

[Handwritten signature]


Control electrónico y Touch Screen (cuando sea aplicable)

1. Verificar funcionamiento (control)
2. En caso de ser necesario utilizar un limpiador de precisión para la limpieza y mantenimiento de los circuitos básicos eléctricos y electrónicos, componentes y circuitos eléctricos y electrónicos. 100% dieléctrico y antiestático que no ataque plásticos sensibles que desintegra las grasas, polvo y residuos industriales, sin alterar los materiales.
3. Verificar la correcta conexión de conectores y conductores eléctricos.
4. Verificar la operación adecuada de la fuente de voltaje de 5 vcc, 12 vcc y las que correspondan de acuerdo con el diagrama eléctrico/ electrónico.
5. Verificar la operación adecuada de las salidas de señales analógicas y digitales.
6. Verificar el accionamiento de las señales eléctricas hacia las válvulas de control de proceso.

Pruebas finales

1. Limpiar manchas y suciedad de todos los componentes
2. Inspeccionar cableado, terminales, conexiones dañadas o falsos contactos
3. Trabajar la máquina en cada ciclo y verificar operación apropiada, checar displays y reportes.
4. Remover todo equipo de prueba instalado, para inspección.
5. Instalar cualquier panel o cubierta removida durante inspección.
6. Inspeccionar áreas para asegurar el retirar todos los materiales usados durante la inspección.
7. Verificar el correcto y seguro funcionamiento de cada ciclo de esterilización
8. Para modelos que aplique, efectuar prueba dart, para validar la eficiencia del vacío en cámara.
9. Efectuar validación del proceso de esterilización con indicadores biológicos.
10. Verificar adecuado funcionamiento de impresoras (cuando aplique).
11. Correr ciclo de prueba para verificar el correcto funcionamiento del equipo.
12. Al finalizar la rutina se realizarán pruebas finales de buen funcionamiento y se proporcionarán recomendaciones al personal para su buen cuidado y operación

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

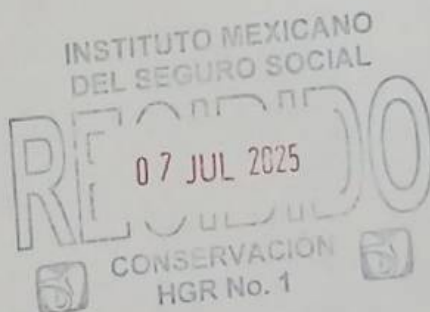

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Lic. Laura Tellez
SJE
MEX-9912347