



Tesa

TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOBERNADOR JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS No. 78, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850, CDMX, TEL.: 55 5241-1330 AL 39

PRO-30-A

REPORTE DE SERVICIO:

ULTRASONIDO TOSHIBA

ORDEN DE SERVICIO No.:

9,940

FECHA:

70199

17/02/2026

Cliente: Hospital General Regional No. 1
Dirección: Canadá No. 16801
Ciudad: Tijuana

Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: Mismo

Telefono: (664)660-9160

Recibido por: Leal Ronco Roberto

Solicitud de Visita: CORRECTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10

M4615114

Falla Reportada: Instalación de transductor

Contrato: 050GYR019N09125-023-00

Reparación Efectuada:

Se realiza la instalación de refacción de alta especialidad: transductor nuevo, modelo: PLU-704ST con número de serie: 99C2312763, en sustitución del transductor de mismas características con número de serie: 99C2312762, debido a que este último presenta: "burbuja de aire en la lente acústica" lo cual provoca artefactos en la imagen y limita su funcionalidad. Con esta acción se elimina la falla reportada.

Se recuerda al personal médico usuario los cuidados mínimos básicos para que el transductor conserve su funcionalidad:

- 1.- Sujetar firmemente el transductor al utilizarlo.
- 2.- Colocar el cable del transductor sobre sus hombros al utilizarlo.
- 3.- Evitar en todo momento que el cable del transductor este sobre el suelo.
- 4.- Evitar que el cable del transductor se tense de manera excesiva.
- 5.- Mantener la imagen "congelada" mientras no se esté realizando algún estudio.
- 6.- La limpieza del transductor debe realizarse al menos al termino de cada turno con ayuda de materiales blandos como paños o gasas suaves y húmedas (No cloro/No Solventes/No sanitas).

Recordando que en lo sucesivo si se detecta mal uso o que la limpieza no se este llevando como se refiere, solo se procederá a realizar el cambio de cualquier transductor con su cotización previamente aceptada.

Se realizan pruebas y el equipo se entrega operativamente apto para realizar el trabajo para el cual fue diseñado, al 100%.

Duración del Servicio:

Fecha	Inicio	Fin
17/02/2026	11:00:00	12:00:00

Total de Horas:

1 x 1 Ing's=1 Hrs. Totales

Refacciones Utilizadas:

1 PROBE PLU-704ST



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
17 FEB 2026

CONSERVACIÓN

Recibí de conformidad HGR No. 1

Costo refacciones:

Costo total servicio:

I.V.A.:

Costo total servicio:

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Entregado

Firma: Dra. Alejandra Lucero Martinez Rivera

Nombre: Jefe de Imagenología HGR1

Fecha: 17/02/2026

Firma:

Nombre:

Fecha:

Leal Ronco Roberto

17/02/2026

El ingeniero que efectuó el servicio esta autorizado a cobrar el importe arriba señalado.

CLIENTE

Clave Presupuestaria
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1




TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL.: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341



ORDEN DE SERVICIO No.: 70199	
REPORT DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA	9,940 FECHA: 17/02/2026
Cliente: Hospital General Regional No. 1	Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Dirección: Canadá No. 16801	Estado: Baja California
Ciudad: Tijuana	
Solicitado por: Mismo	Telefono: (664)660-9160
Recibido por: Leal Ronco Roberto	Solicitud de Visita: CORRECTIVO POR CONTRATO
Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10	M4615114
Falla Reportada: Instalación de transductor	Contrato: 050GYR019N09125-023-00

FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO:

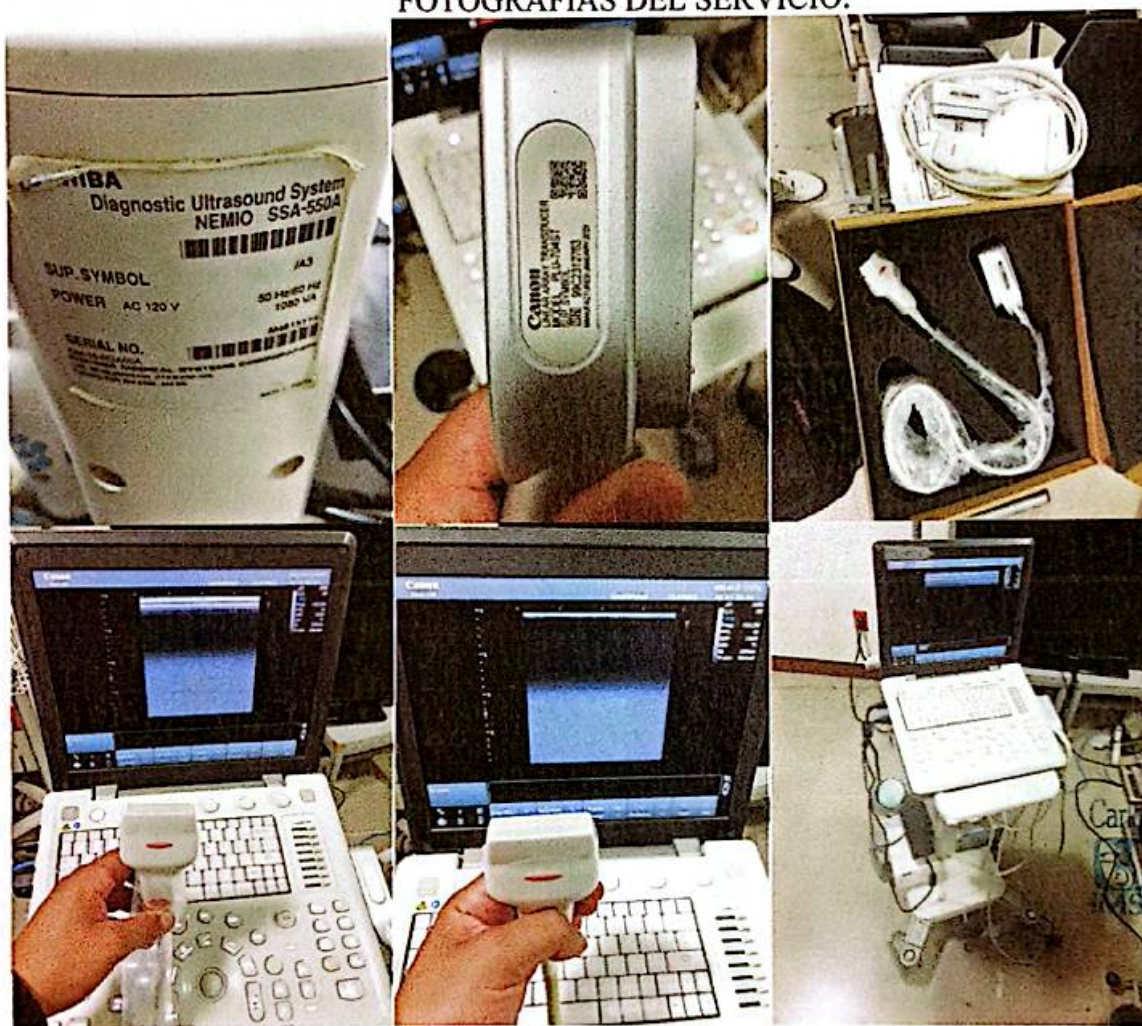

DEL SEGURO SOCIAL
REVISADO
17 FEB 2026
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Car. Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Recibí de Conformidad

Entregado

Firma:

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera

Nombre:

Jefatura de Imagenología HGR1

Fecha:

IMSS 17/02/2026

Firma:

Leal Ronco Roberto

Fecha:

17/02/2026

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

