

72003070

CONS:

FECHA: 04-06-2025		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 040T00923-262		COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA. C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES:		EN SITIO: ☒	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS:		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1506	
NO. INVENTARIO: 202380013903		SOFTWARE: 6.5-2		UBICACIÓN FÍSICA: UCIN			
HORAS DE USO EQUIPO: N/A		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal			
HORAS DE USO TURBINA: N/A							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE PRESIÓN FRONTAL, REVISIÓN DE CALENTADOR Y LUZ DE CUNA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA DE ELEVACIÓN DE CAMA (SI CUENTA CON EL), VERIFICACIÓN DE MONITOREO DE TEMPERATURA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE BALANZA (SI CUENTA CON ELLA), VERIFICACIÓN DE LÁMPARA MULTIFUNCIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, LÍMPIDIZ INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17,5410702							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.							
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☒ X FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRÍCULA: H.G.A. No. 1		NO. DE MATRÍCULA: H.G.A. No. 1		NO. DE MATRÍCULA: H.G.A. No. 1		NO. DE MATRÍCULA: H.G.A. No. 1	
FECHA: Mat. 99024980		FECHA: Mat. 99024980		FECHA: Mat. 99024980		FECHA: Mat. 99024980	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

**RUTINA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTRATO 040T00923-262**

EMS. NOV 2021 GSIM-ST-F01-ATMADV-00

		VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE PESAJE DE BÁSCULA*			✓
3.		REALIZAR LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO			✓
4.		REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA			✓
	✓/x		✓/x		✓/x
	CORRIENTE DE FUGAS	✓	0.1 μ A	VOLTAJE DE LINEA	✓
			121	V	RESISTENCIA A TIERRA
5.					✓
	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL				
					0.39 Ω

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCIÓN NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

Ing. Yukio Matsumiya
Matsumiya

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA



Dra. Claudia C. Chena
Médico Pediatra
Mat. IMSS 11042296
C.P. 4964301
Coordinación de Pediatría HGR

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)



Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)



**RUTINA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTRATO 040T00923-262**

EMS. NOV 2021 GSIM-ST-F01-ATMADV-00

FECHA: 04-06-2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003070

MODELO AtmosCare Adventum

NÚMERO DE SERIE: AP17-1506

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES	☒	
2.	REALIZAR PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN	☒	
2.1	VERIFICACIÓN MECÁNICA Y DE CONTROL	☒	
	VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN	☒	
	REVISAR ESTRUCTURA EXTERNA DEL EQUIPO PARA DESCARTAR DAÑO	☒	
	VERIFICAR SISTEMA MECÁNICO (TRASLADO, INCLINACIÓN DE MANIOBRAS CON PACIENTE)	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO/FUNCIONAMIENTO DE PUERTAS DE ACCESO	☒	
	VERIFICAR QUE LAS RUEDAS DEL EQUIPO HACEN ADECUADO CONTACTO CON EL PISO, REVISAR FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE FRENADO	☒	
	VERIFICAR Y PROBAR APERTURA Y CIERRE DE PANELES LATERALES	☒	
	VERIFICAR SOPORTE DE MONITOR DE SIGNOS VITALES	☒	
	VERIFICAR ESTADO DE PLACA DE RAYOS X	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE SENSORES DE TEMPERATURA	☒	
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO Y ESTADO FÍSICO DE CAJONES	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL COLCHÓN	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE LA BALANZA	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO Y MOVIMIENTOS DE LA BASE PARA EL SELECCIÓN	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DE CONECTORES PARA BALANZA, SENSORES DE TEMPERATURA Y SENSOR DE HUMEDAD/TEMPERATURA AMBIENTAL	☒	
	VERIFICAR ESTADO FÍSICO DEL PANEL DE MEMBRANA DE LA UNIDAD DE CONTROL, PERIL DE CONTROL Y DISPLAY DE DATOS	☒	
2.2	VERIFICACIÓN DE COMPONENTES INTERNOS	☒	
	TARJETAS ELECTRÓNICAS	☒	
	CONECTORES ELECTRÓNICOS	☒	
2.3	VERIFICACIÓN OPERACIONAL DEL EQUIPO	☒	
	FUNCIONAMIENTO DEL CALENTADOR	☒	
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE FOTOTERAPIA*	☒	OK
	VERIFICACIÓN DE LUZ DE LAMPARA MULTIFUNCIÓN*	☒	OK
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMA SONORA	☒	
	VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA	☒	
	VERIFICAR Y PROBAR QUE INDICADOR DE MODALIDAD MANUAL ESTE ACTIVADO	☒	
	AJUSTAR Y VERIFICAR QUE LA SELECCIÓN DE NIVEL DE POTENCIA SE ACTIVEN AL NIVEL DESEADO	☒	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1506

O.S.: 72003070

CONTRATO: 040T00923-262

FOTO NO. SERIE

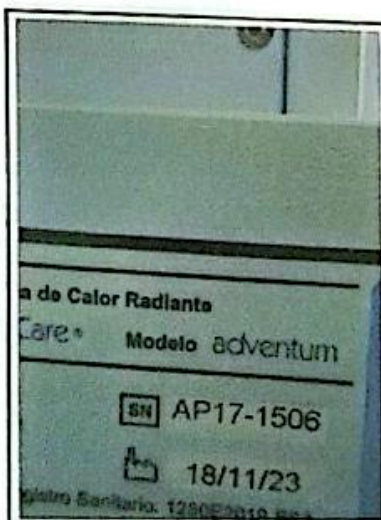

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBO
04 JUN 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FOTO DURANTE



SELLO UNIDAD MÉDICA:



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
Tehuana, B.C.

Carlos Osvaldo Ramírez González
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA
Subjefe de Conservación



H.G.R. No. 1

IMSS Mat. 99024980