

72003368

CONS: 3

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83904
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	
TEL: 9646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐	
		CAPACITACIÓN: ☒	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 15801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
EL EQUIPO FALLÓ CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		EN SITIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: ACUTRONIC	MODELO: FABIAN HFO	NO. SERIE: AH-02025
NO. INVENTARIO: 201980002540	SOFTWARE: 5.2.1.2	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: 14561	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, REVISIÓN Y CENTRADO DE PISTÓN (EN CASO DE SER NECESARIO). PRUEBAS DE OVP Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14 BB105028, PA-18, 5579063.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒ X.			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
	Lic. Enf. Valerie Pacheco Mat. 11073837	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
07-07-25	Enfermera Jefe de Piso	H.G.R. No. 1	
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA: 07/07/25	FECHA: 07-07-25	FECHA:	FECHA:
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003368

VENTILADOR PULMONAR

NÚMERO DE SERIE: 4H-02025

MODELO FABIAN HFO

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

REALIZÓ

v/x MEDICIÓN

1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:	
	ESTRUCTURA GENERAL DEL EQUIPO	/
	CARCASA SIN ROTURAS O DAÑOS	/
	CABLES SIN DAÑOS	/
	CHECAR TODOS LOS CONECTORES	/
	MEMBRANA Y VÁLVULA DE EXPIRACIÓN CORRECTAMENTE MONTADA	/
2.	ARRANQUE	
	PRENDER EL EQUIPO	/
	PANTALLA LCD (MENOS DE 3 PÍXELES SIN FUNCIONAR)	/
	PASA EL SELF TEST	/
	SUENA LA ALARMA (2 VECES AL INICAR)	/
	LED ROJO DE ALARMA PARPADEA 2 VECES AL INICIO	/
	DESCONECTAR CABLE DE ALIMENTACIÓN	/
	SONIDO DE ALARMA ACTIVADO (ALARMA DE POWER FAIL)	/
	LED NARANJA ENCENDIDO (MODO BATERÍA)	/
	CONECTAR CABLE DE ALIMENTACIÓN	/
	SONIDO DE ALARMA DESACTIVADO	/
	LED NARANJA APAGADO (DESACTIVADO MODO BATERÍA)	/
3.	FUNCIONALIDAD DE BLENDER / PURGA (AIRE AL ESTÁNDAR 20/ 1013)	
	PRENDER EL EQUIPO	/
	BLENDER NO FUGA, NO HAY FLUJO SALIENDO DEL PUERTO INSPIRATORIO	/
	CHECAR LA HERMETICIDAD DE LA VÁLVULA DE CALIBRACIÓN (NO HAY FUGA EN LA MANGUERA QUE VA A LA CELDA DE O2)	/
	PRENDER EL EQUIPO EN MODO IPPV CON PARÁMETROS ENCONTRADOS EN EL TEST INSTRUCTION SECCIÓN 4.3	
	FLUJO DE PURGA DEBE SER ENTRE 150 Y 350 ML/MIN	/ 210
4.	CALIBRACIÓN (UNA VEZ AL AÑO)	
	CONECTAR AIRE EN LA TOMA DE AIRE Y DE OXÍGENO	/
	COLOCAR HORA Y FECHA CORRECTAS	/
	PRENDER EL EQUIPO EN MODO O2 THERAPY O IPPV (3L/MIN) Y COLOCAR OXÍGENO AL 60%	
	VALOR DE PRESIÓN DE AIRE EN MONITOR PIC DEBE SER 2400 ±200	/ 2440
	VALOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO EN MONITOR PIC DEBE SER 2400 ±201	/ 2450
	REINICAR EL EQUIPO CONECTAR AIRE EN LA TOMA DE AIRE Y DE OXÍGENO PROGRAMAR LOS PRÁMETROS COMO LO INDICA EL TEST INSTRUCTION SECCIÓN 5.3	
	MEDIR VÁLVULA DE AIRE VALOR ESPERADO 9.5 ±0.1 L/min REPETR 3 VECES LA MEDICIÓN REINICIANDO EL EQUIPO ENTRE CADA MEDICIÓN, CALIBRAR SI ES NECESARIO	/ 9.6
	MEDIR VÁLVULA DE OXÍGENO VALOR ESPERADO 9.5 ±0.1 L/min REPETR 3 VECES LA MEDICIÓN REINICIANDO EL EQUIPO ENTRE CADA MEDICIÓN, CALIBRAR SI ES NECESARIO	/ 9.5

**CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.**

**Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1**

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

REINICIAR EL EQUIPO CONECTANDO AIRE Y OXÍGENO RESPECTIVAMENTE									
DESCONECTAR TUBO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DEL MANIFOLD, VALOR DE PRESIÓN INSPIRATORIA 1480±10 PARA HW 1-3 Y 1095±10 PARA HW 4, AJUSTAR SI ES NECESARIO								/	1485
APLICAR 60 mbar AL TUBO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DESCONECTADO DEL MANIFOLD, VALOR DE PRESIÓN INSPIRATORIA, DEBE SER 2940±10 PARA HW 1-3 Y 2255±10 PARA HW 4, AJUSTAR SI ES NECESARIO								/	2940
CALIBRAR 0mbar EN MENÚ DE CALIBRACIÓN								/	
APLICAR 60 mbar EN PUERTO PROXIMAL, CALIBRAR 60mbar en MENÚ DE CALIBRACIÓN								/	
CALIBRACIÓN DE TOUCHSCREEN								/	
CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN								/	
VÁLVULA DE SEGURIDAD DEBE ABRIR ENTRE 450 A 600 mbar, SI NO SUCEDE, CALIBRAR								/	
CALIBRACIÓN DE CELDA DE OXÍGENO (21% Y 100%)								/	
CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO								/	
PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD									
PROGRAMAR									
I-FLOW= 8 l/min		PEEP= 0mbar		Frecuencia= 30 bpm		Oxígeno= 21%			
E-FLOW= 5 l/min		PINSP= 10mbar		I-TIME= 1 seg					
PROGRAMADO		MEDIDO EN VENTILADOR			MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO			PASA /FALLA	
P INSP (mbar)	PEEP	PIP ±1	P MEAN	PEEP ±1	PIP ±1	P MEAN	PEEP ±1		
10	0	10	5.1	1	9.8	5	0.5	/	
60	0	60	23	1	59.4	22	0.3	/	
30	5	30	15	5.1	30.1	14.8	5	/	
CHEQUEO DE TRIGGER								/	
CHEQUEO BLENDER									
PROGRAMADO		MEDIDO EN VENTILADOR		MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO		TOLERANCIA		PASA /FALLA	
FIO2		FIO2		FIO2					
21%		21		21		± 3 %		/	
40%		40		40.1		± 3 %		/	
60%		60		60.5		± 3 %		/	
100%		100		100		± 3 %		/	
CHEQUEO DE VOLUMEN GARANTIZADO *									
PROGRAMADO		MEDIDO EN VENTILADOR		MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO		TOLERANCIA			
VG	FIO2	VTE		VTE					
5	21%	5		5		± 0.5 ml			
5	100%	5		5		± 0.5 ml			
10	21%	10		10		± 0.5 ml			
10	100%	10		10		± 0.5 ml			
HFO *									
PROGRAMADO			MEDIDO EN EL EQUIPO		MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO COMPARADO CON EL EQUIPO		PASA /FALLA		
AMPL (mbar)	P mean (mbar)	Frec (HZ)	P mean (mbar ±1)	Frec (HZ ±10%)	P mean (mbar ±1.5)	Frec (HZ ±10%)			
10	10	5	10	5	10	5	/		
40	20	10	20	10	20	10	/		
10	10	20	10	20	10	22	/		
80	40	20	40	20	40	20	/		

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

MODO CPAP								PASA/FALLA
PROGRAMADO		MEDIDO EN EL EQUIPO			MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO			
CPAP		P mean (mbar ±1)			P mean (mbar ±1)			
5		5			5.1			/
10		10.1			10			/
MODO DUOPAP *								PASA/FALLA
PROGRAMADO		MEDIDO EN EL EQUIPO			MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO			
CPAP	P-DUO	P Peak ±1	P Mean	PEEP ±1	P Peak ±2	P Mean ±1	PEEP ±1	
3	8	1	0.6	0.4	2.9	1.4	1	/
5	10	1.1	0.8	0.5	3.1	1.6	1.3	/
10	15	1	1.1	1	3.6	1.7	1.4	/
CHEQUEO DE HERRAMIENTA DE SPO2 *								/
CHEQUEO DE HERRAMIENTA DE #TCO2 *								/
ALARMAS DE PACIENTE								/
FUGA EN RAMAS Y APNEA								/
REVISIÓN DE TUBO ET								/
ALTA PRESIÓN								/
ALARMAS DEL SISTEMA								/
PRESIÓN DE SUMINISTRO DE OXÍGENO (PARPADEANDO EN ROJO)								/
PRESIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE (PARPADEANDO EN ROJO)								/
OCCLUSIÓN DEL TUBO								/
PACIENTE DESCONECTADO								/
INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO *								/
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA								/
CORRIENTE DE FUGAS		/	0.1	µA	VOLTAJE DE LINEA		/	121
						RESISTENCIA A TIERRA		/
								0.9
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.								/
CALIBRACIÓN DE BATERÍA								/

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCIÓN NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:



Lic. Enl. Valdez
Mat. 11675637

Enfermera Jefa de Piso
07/07/25

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Usualdo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AH-02025

ORDEN DE SERVICIO: 72003368

CONS:

3

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1




INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

7 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1

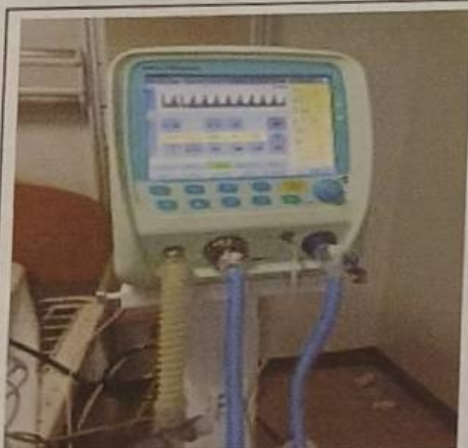

GRUPO SIM ETIQUETA DE GARANTIA
S N° 266203
 DATOS DE LA EMPRESA
 EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CALZADA DE TULPAN 479 COL. ALAMOS
 C.P. 63400 CIUDAD DE MEXICO
 TELÉFONOS: 55 4838 6125 / 55 8071 3270
 No. CONTRATO: 050GYR019N09125-019-00 No. DE SERIE: AH-02025
 E-MAIL: servicio@gruposim.com
 NOMBRE DEL INGENIERO: Ing. Dorian Monarrez
 MES DE PRÓXIMA VISITA DE MANTO: PREVENTIVO Oct-2025
 FECHA DE SERVICIO: 7/3/25 APODE SERVICIO: Mp