

72003375

CONS: 564

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83911
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		ASesoría: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		CAPACITACIÓN: ☒	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		SUMINISTROS DE: REFACCIONES:	
REPORTO FALLA: N/A		ACCESORIOS:	
FALLA REPORTADA: N/A		LUGAR DE SERVICIO:	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		EN SITIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5631	NO. SERIE: 3076
INSTITUTO MEXICANO			
NO. INVENTARIO: 202000005228	SOFTWARE: 05-16	UBICACIÓN FÍSICA: Medicina Interna	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: ADULTO	
HORAS DE USO TURBINA: NA	EQUIPO COMPLEMENTARIO		
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063; PA-19, 00140. Número de Serie Real del Equipo: 03076.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
07-07-25	Firma Bayas Reth Yadrin		
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
Firma Bayas Reth Yadrin	Firma Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		
PUESTO: PSIP Jefe de PSIC	PUESTO: Jefe de Conservación	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRÍCULA: 79050438	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA: 07/07/25	FECHA:	FECHA:	FECHA:
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003375

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3076

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
1.	APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO			
	El desfibrilador no está sucio.		✓	
	El desfibrilador no está agrietado o dañado.		✓	
	No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)		✓	
	No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.		✓	
	Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.		✓	
2.	APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION			
	Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		✓	
	Las partes metálicas del conector no se deforman.		✓	
	No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		✓	
	Compruebe que la tierra de protección no está rota.		✓	
3.	PALAS EXTERNAS			
	Las palas externas no están rotos.		✓	
4.	APARIENCIA DE ACCESORIOS			
	Los conectores no están dañados o agrietados.		✓	
	Adaptador Pad no ha caducado.		✓	
5.	APARIENCIA DE LA BATERIA			
	No hay daños o grietas y sin etiquetas retiradas o desgarradas		✓	
	La batería no ha caducado.		✓	
6.	TEST DE BATERIA			
	Realizar el test de la batería.		✓	
7.	ENCENDIDO			
	El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		✓	
8.	SONIDO DE SINCRONIZACION			
	QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		✓	
9.	IMPRESORA			
	La impresora funciona correctamente.		✓	
	Fecha y hora de impresión son correcta.		✓	
	La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		✓	
	No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		✓	
	Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado: 22,5 a 27,5 mm		✓	24 mm
	La falta de papel se detecta correctamente.		✓	
10.	DESCONEXION DE CONECTOR			
	Se detecta correctamente la desconexión de un conector		✓	
11.	TIEMPO DE CARGA			
	La carga ha finalizado dentro del periodo de tiempo especificado.		✓	seg
12.	FORMA DE ONDA			
	La desfibrilación se realiza correctamente.		✓	
	La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		✓	
13.	ENERGIA DESCARGADA			
	Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	2 J	✓	2 J
		3 J	✓	3 J
		5 J	✓	5 J
		7 J	✓	7 J

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECEBIDO
7 JUL 2025

CONSERVACION
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE CV

1 de 4

Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

07-07-25



CONSERVACION
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003375

DEFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3076

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	10 J		✓	10 J
	15 J		✓	15 J
	20 J		✓	20 J
	30 J		✓	30 J
	50 J		✓	50 J
	70 J		✓	70 J
	100 J		✓	100 J
	150 J		✓	150 J
	200 J		✓	200 J
	270 J		✓	270 J
Funcionamiento con la batería 270 J			✓	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES				
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			✓	270 J
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS				
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		✓	2 J
	3 J		✓	3 J
	5 J		✓	5 J
	7 J		✓	7 J
	10 J		✓	10 J
	15 J		✓	15 J
	20 J		✓	20 J
	30 J		✓	30 J
	50 J		✓	50 J
16. CAMBIO DE LA ENERGIA				
La energía cargada se puede cambiar			✓	
17. DESCARGA INTERNA				
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			✓	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS				
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			✓	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG				
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			✓	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA				
La FV se detecta correctamente.			✓	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			✓	
La desfibrilación se realiza correctamente.			✓	
21. PANTALLA AED				
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			✓	
22. VOZ AED				
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			✓	
23. MARCAPASOS FIJO				
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.			✓	
24. MARCAPASOS A DEMANDA				
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente			✓	
25. SALIDA DE MARCAPASOS				
La salida de estimulación por marcapasos es correcta.			✓	100 mA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

2 de 4

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
9474980
07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FECHA: 07-07-25 FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003375
DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631 NUMERO DE SERIE: 3076

REALIZÓ

DESCRIPCION DEL SERVICIO	✓/x	MEDICIÓN
26. MONITORIZACION DE ECG		
La precisión de la frecuencia cardiaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente. HR: 60	/	60 bpm
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.	/	
Alarma de frecuencia cardiaca y la alarma de desconexión de cable de ECG	/	
27. MONITORIZACION DE CO2		
La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.	x	mmHg
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.	x	
Precisión en la medición del sensor de CO2.	x	
28. MONITORIZACION DE SpO2		
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.	/	97 %
	/	80 %
	/	70 %
	/	60 bpm
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.	/	
29. MONITORIZACION DE NIBP		
Adulto e Infante		
El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
La medición manual de NIBP se realiza correctamente	/	
Neonato		
El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
La medición manual de NIBP se realiza correctamente	/	
30. MONITORIZACION DE TEMPERATURA		
La precisión de visualización para la temperatura se confirma.	/	
La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.	/	
La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.	/	
31. MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG		
Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.	/	
La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.	/	
32. SEGURIDAD ELECTRICA		
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$ Condición 1ra falla $\leq 1mA$	500 μA 1 mA
Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)	Condición normal $\leq 10\mu A$ Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$	10 μA 50 μA
Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$ Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	100 μA 500 μA
Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo CF, DC)	Condición normal $\leq 10\mu A$ Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$	10 μA 50 μA
Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *	Condición normal Condición 1ra falla	0.1 μA 0.1 μA

33. CARGADOR DE BATERIA SB-831V		
El cargador de baterías no está sucio.	/	
Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.	/	
Sin etiquetas retiradas o rasgadas.	/	
El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE CV

3 de 4

Carlos Oswaldo Ramírez González
Súbdito de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

07-07-25



FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003375</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>3076</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.		✓	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.		✓	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.		✓	
La operación en el encendido es correcta.		✓	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.		✓	
34. SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Condición normal $\leq 100\mu A$ 100 μA
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$ 500 μA
6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS		✓	✓

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

07-07-25
REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA
USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)
99020438
07/07/25

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)
07-07-25

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
7 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	3076	ORDEN DE SERVICIO:	72003375
		CONS:	564

ANTES 2



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECORDO
 7 JUL 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1




DESPUÉS 1





 CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.

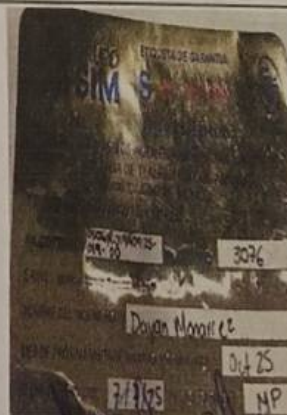

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

07-07-25