

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003376</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>3077</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
1.	APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO			
	El desfibrilador no está sucio.		/	
	El desfibrilador no está agrietado o dañado.		/	
	No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)		/	
	No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.		/	
	Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.		/	
2.	APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION			
	Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		/	
	Las partes metálicas del conector no se deforman.		/	
	No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		/	
	Compruebe que la tierra de protección no está rota.		/	
3.	PALAS EXTERNAS			
	Las palas externas no están rotos.		/	
4.	APARIENCIA DE ACCESORIOS			
	Los conectores no están dañados o agrietados.		/	
	Adaptador Pad no ha caducado.		/	
5.	APARIENCIA DE LA BATERIA			
	No hay daños o grietas y sin etiquetas retiradas o desgarradas		/	
	La batería no ha caducado.		/	
6.	TEST DE BATERIA			
	Realizar el test de la batería.		/	
7.	ENCENDIDO			
	El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		/	
8.	SONIDO DE SINCRONIZACION			
	QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		/	
9.	IMPRESORA			
	La impresora funciona correctamente.		/	
	Fecha y hora de impresión son correcta.		/	
	La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		/	
	No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		/	
	Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm		/	25 mm
	La falta de papel se detecta correctamente.		/	
10.	DESCONEXION DE CONECTOR			
	Se detecta correctamente la desconexión de un conector		/	
11.	TIEMPO DE CARGA			
	La carga ha finalizado dentro del periodo de tiempo especificado.		/	seg
12.	FORMA DE ONDA			
	La desfibrilación se realiza correctamente.		/	
	La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		/	
13.	ENERGIA DESCARGADA			
	Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	2J	/	2 J
		3J	/	3 J
		5J	/	5 J
		7J	/	7 J

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

07-07-25 J

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONSERVACION
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003376

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3077

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
	70 J		/	70 J
	100 J		/	100 J
	150 J		/	150 J
	200 J		/	200 J
	270 J		/	270 J
Funcionamiento con la batería 270 J			/	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES				
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			/	270 J
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS				
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		/	2 J
	3 J		/	3 J
	5 J		/	5 J
	7 J		/	7 J
	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
16. CAMBIO DE LA ENERGIA				
La energía cargada se puede cambiar			/	
17. DESCARGA INTERNA				
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			/	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS				
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			/	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG				
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			/	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA				
La FV se detecta correctamente.			/	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			/	
La desfibrilación se realiza correctamente.			/	
21. PANTALLA AED				
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			/	
22. VOZ AED				
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			/	
23. MARCAPASOS FIJO				
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.			/	
24. MARCAPASOS A DEMANDA				
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente			/	
25. SALIDA DE MARCAPASOS				
La salida de estimulación por marcapasos es correcta.			/	100 mA

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

07-07-25

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

FECHA: <u>03-07-2025</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003376</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>3077</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	MEDICIÓN
26. MONITORIZACION DE ECG		✓/x	
La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente.		✓	60 bpm
HR: 60		✓	
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.		✓	
Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG		✓	
27. MONITORIZACION DE CO2			
La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.		x	mmHg
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.		x	
Precisión en la medición del sensor de CO2.		x	
28. MONITORIZACION DE SpO2			
97% SpO2: 95-98% SpO2		✓	97 %
80% SpO2: 78-92% SpO2		✓	80 %
70% SpO2: 66-74% SpO2		✓	70 %
60 bpm SpO2: 55-65% bpm		✓	60 bpm
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.		✓	
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.		✓	
29. MONITORIZACION DE NIBP			
Adulto e Infante	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	✓	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	✓	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente.	✓	
Neonato	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	✓	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	✓	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente.	✓	
30. MONITORIZACION DE TEMPERATURA			
La precisión de visualización para la temperatura se confirma.		✓	
La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.		✓	
La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.		✓	
31. MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG			
Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.		✓	
La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.		✓	
32. SEGURIDAD ELECTRICA			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	
Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo CF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA	
Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *	Condición normal	0.1 μA	
	Condición 1ra falla	0.1 μA	
33. CARGADOR DE BATERIA SB-831V			
El cargador de baterías no está sucio.		✓	
Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.		✓	
Sin etiquetas retiradas o rasgadas.		✓	
El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.		✓	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TLUANA, B.C.

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003376

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3077

						REALIZÓ	
DESCRIPCION DEL SERVICIO						✓/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.						✓	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.						✓	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.						✓	
La operación en el encendido es correcta.						✓	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.						✓	
34. SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR							
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA		
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA		Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA		
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS						✓	✓

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

Parra Urias Ramón Alberto
Subjefe de Enfermería
Mat. 99025047
IMSS
07/07/25

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
07-07-25


REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

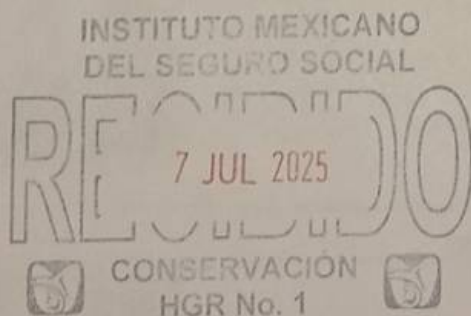


Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	3077	ORDEN DE SERVICIO: 72003376	CONS: 565


ANTES 2

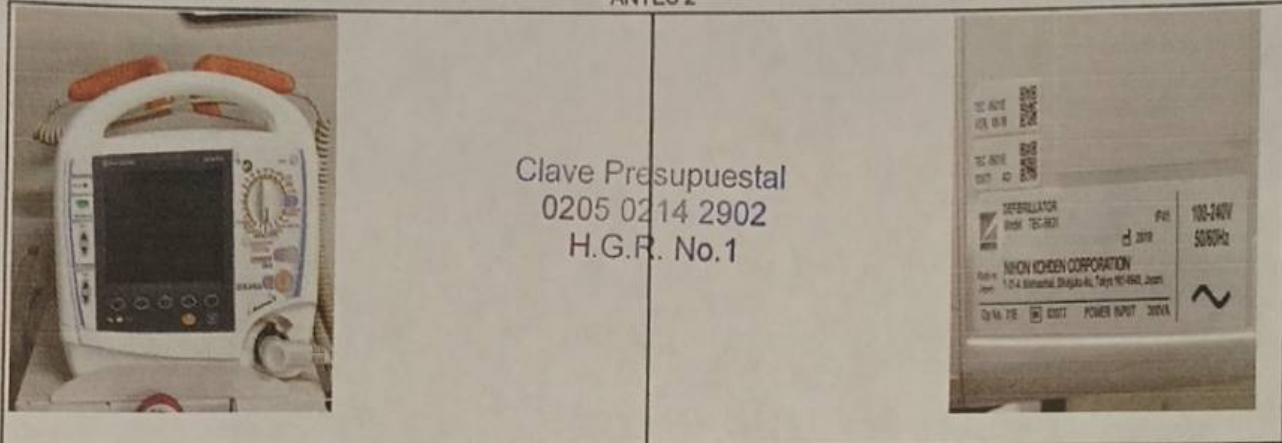

DURANTE 1

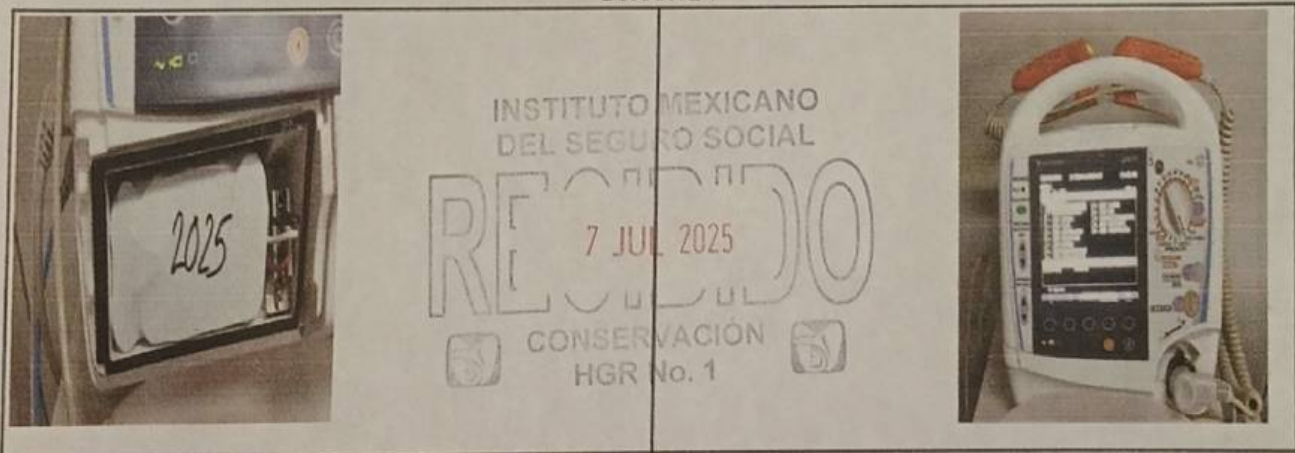

DESPUÉS 1

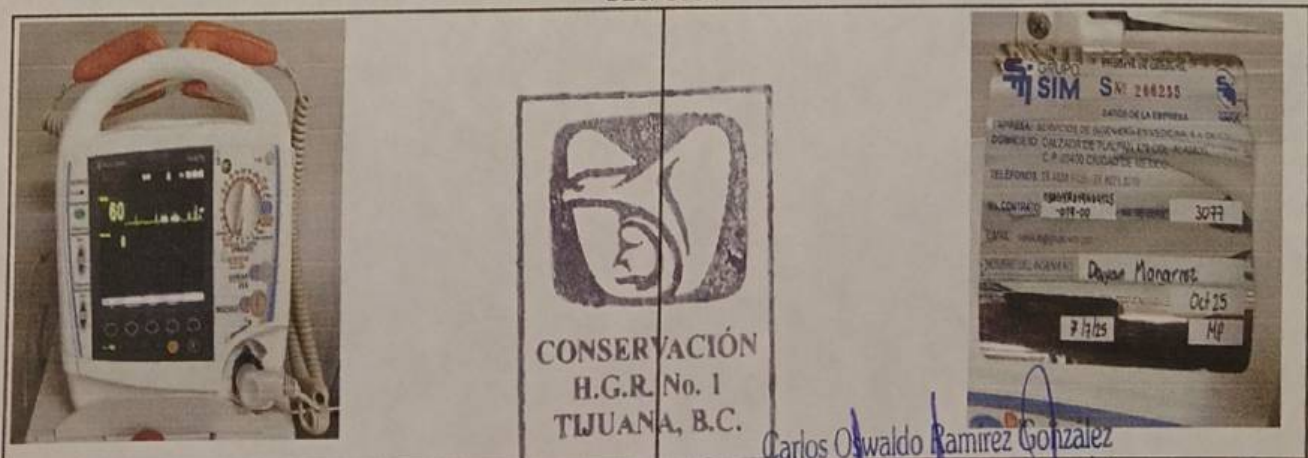

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA

07-07-25