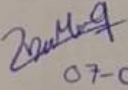
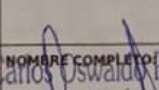


72003381

CONS: 770

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83916
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
		CAPACITACIÓN: ☒	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	
REPORTO FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EN SITIO: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5531E MEXICANO	NO. SERIE: 693
NO. INVENTARIO: 200780001656	SOFTWARE: 01-11	UBICACIÓN FÍSICA: Hospitalización general	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
		CONSERVACIÓN	
		HGR No. 1	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063 ; PA-19, 00140. Número de Serie Real del Equipo: 00693.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No 1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA: 		FIRMA: 	
NOMBRE COMPLETO: Rosalva Vergara Villalman		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Enfermera General		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRICULA: 94023790		NO. DE MATRICULA: 99071980	
FECHA: 7-7-25		FECHA: 07-07-25	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003381

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5531E

NUMERO DE SERIE: 693

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
1.	APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO		✓	
	El desfibrilador no está sucio.		✓	
	El desfibrilador no está agrietado o dañado.		✓	
	No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)		✓	
	No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.		✓	
	Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.		✓	
2.	APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION		✓	
	Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		✓	
	Las partes metálicas del conector no se deforman.		✓	
	No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		✓	
	El uso de un probador, compruebe que la tierra de protección.		✓	
3.	PALAS EXTERNAS		✓	
	Las palas externas no están rotos.		✓	
4.	APARIENCIA DE ACCESORIOS		✓	
	Los conectores no están dañados o agrietados.		✓	
	Adaptador Pad no ha caducado.		✓	
5.	APARIENCIA DE LA BATERIA		✓	
	No hay daños o grietas y sin etiquetas se retiran o se desgarran.		✓	
	La batería no ha caducado.		✓	
6.	TEST DE BATERIA		✓	
	Realizar el test de la batería.		✓	
7.	ENCENDIDO		✓	
	El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		✓	
8.	SONIDO DE SINCRONIZACION		✓	
	QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		✓	
9.	IMPRESORA		✓	
	La impresora funciona correctamente.		✓	
	Fecha y hora de impresión son correcta.		✓	
	La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		✓	
	No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		✓	
	Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm		✓	24,5 mm
	La falta de papel se detecta correctamente.		✓	
10.	DESCONEXION DE CONECTOR		✓	
	Se detecta correctamente la desconexión de un conector		✓	
11.	TIEMPO DE CARGA		✓	5 seg
	El tiempo de carga es de 5 segundos.		✓	
12.	FORMA DE ONDA		✓	
	La desfibrilación se realiza correctamente.		✓	
	La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		✓	
13.	ENERGIA DESCARGADA		✓	2 J
	Energía descargada cuando se utilizan las palas externas	3 J	✓	3 J
	es correcta operación AC	5 J	✓	5 J
		7 J	✓	7 J
		10 J	✓	10 J



NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO


72003381

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5531E

NUMERO DE SERIE: 693

			REALIZÓ	
DESCRIPCION DEL SERVICIO			✓/x	MEDICIÓN
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
	70 J		/	70 J
	100 J		/	100 J
	150 J		/	150 J
	200 J		/	200 J
	270 J		/	270 J
Funcionamiento con la batería 270 J			/	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES			/	270 J
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			/	
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS			/	2 J
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		/	3 J
	3 J		/	5 J
	5 J		/	7 J
	7 J		/	10 J
	10 J		/	15 J
	15 J		/	20 J
	20 J		/	30 J
	30 J		/	50 J
	50 J		/	2 J
Ajuste HV DC*	2 J ±0.5 J		/	3 J
	3 J ±1 J		/	5 J
	5 J ±2 J		/	7 J
	7 J ±2 J		/	10 J
	10 J ±2 J		/	20 J
	20 J ±10%		/	
16. CAMBIO DE LA ENERGIA			/	
La energía cargada se puede cambiar			/	
17. DESCARGA INTERNA			/	100 %
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			/	
Capacitor de alta tension (100%-80%)*			/	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS			/	
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			/	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG			/	
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			/	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA			/	
La FV se detecta correctamente.			/	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			/	
La desfibrilación se realiza correctamente.			/	
21. PANTALLA AED			/	
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			/	
22. VOZ AED			/	
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			/	
23. MARCAPASOS FIJO			/	

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBO
7 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

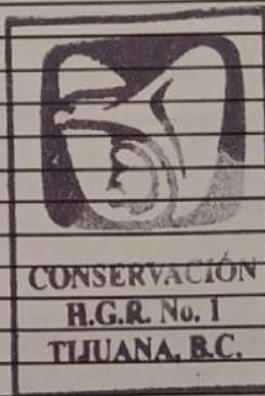

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO: <u>72003381</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5531E	NUMERO DE SERIE: <u>693</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	MEDICIÓN
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.		✓	
24. MARCAPASOS A DEMANDA			
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente		✓	
25. SALIDA DE MARCAPASOS			
La salida de estimulación por marcapasos es correcta. 100 mA ±10%		✓	100 mA
26. MONITORIZACION DE ECG			
La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente. HR: 60		✓	60 bpm
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.		✓	
Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG		✓	
27. MONITORIZACION DE CO2			
Precisión de visualización para el valor de la tasa de respiración y el CO2 se confirma. 35 a 45 mmHg		X	mmHg
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.		X	
Precisión en la medición del sensor de CO2.		X	
28. MONITORIZACION DE SpO2			
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.	97% SpO2: 95-99% SpO2	✓	97 %
	80% SpO2: 78-92% SpO2	✓	80 %
	70% SpO2: 66-74% SpO2	✓	70 %
	60 bpm SpO2: 55-65% bpm	✓	60 bpm
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.		✓	
29. SEGURIDAD ELECTRICA			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal ≤ 500µA	500 µA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)
	Condición 1ra falla ≤ 1mA	1 mA	
Corriente de fuga a chasis	Condición normal ≤ 100µA	100 µA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo CF, DC)
	Condición 1ra falla ≤ 500µA	500 µA	
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS			

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

<u>07-07-25</u> <u>Dayron Monasterio Valencia</u> REALIZÓ EL SERVICIO NOMBRE Y FIRMA	<u>Rosa Elvira Vengas Villanueva</u> USUARIO DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA <u>99023790</u> <u>7-7-25</u>
<u>Carlos Osvaldo Ramirez González</u> SUBJEFE DE CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 <u>IMSS Mat 99024980</u> JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA NOMBRE Y FIRMA	<u>07-07-25</u> NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: 693 ORDEN DE SERVICIO: 72003381 CONS: 770

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1




DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECORDADO
 7 JUL 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1

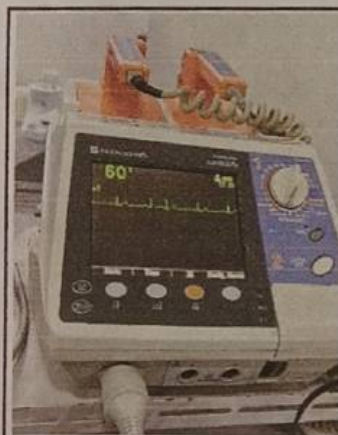


 CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TLJUANA, B.C.



Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

07-07-25