

CONS: 1197

Calzada de Ixtaplan No. 479 Col. Álamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México, Tel: (55) 4196-5500

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003387

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-6631

NUMERO DE SERIE: 08920

REALIZÓ

DESCRIPCION DEL SERVICIO

✓/x

MEDICIÓN

1. APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO

El desfibrilador no está sucio.
El desfibrilador no está agrietado o dañado.
No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)
No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.
Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.

2. APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION

Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.
Las partes metálicas del conector no se deforman.
No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.
Compruebe que la tierra de protección no está rota.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

3. PALAS EXTERNAS

Las palas externas no están rotos.

4. APARIENCIA DE ACCESORIOS

Los conectores no están dañados o agrietados.
Adaptador Pad no ha caducado.

5. APARIENCIA DE LA BATERIA

No hay daños o grietas y sin etiquetas retiradas o desgarradas.
La batería no ha caducado.

6. TEST DE BATERIA

Realizar el test de la batería.

7. ENCENDIDO

El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.

8. SONIDO DE SINCRONIZACION

QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.

9. IMPRESORA

La impresora funciona correctamente.
Fecha y hora de impresión son correcta.
La impresión de eventos se puede realizar correctamente.
No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.
Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm
La falta de papel se detecta correctamente.

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

10. DESCONEXION DE CONECTOR

Se detecta correctamente la desconexión de un conector

11. TIEMPO DE CARGA

La carga ha finalizado dentro del período de tiempo especificado.

12. FORMA DE ONDA

La desfibrilación se realiza correctamente.
La forma de onda de la energía descargada es bifásica.

13. ENERGIA DESCARGADA

Energía descargada cuando
se utilizan las palas externas
es correcta operación AC

2 J

3 J

5 J

7 J

5 seg

2.1 J

3.4 J

5.1 J

7.0 J


NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003387</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>08920</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	10 J		/	9.9 J
	15 J		/	14.3 J
	20 J		/	19.8 J
	30 J		/	29.9 J
	50 J		/	49.7 J
	70 J		/	70.3 J
	100 J		/	99.4 J
	150 J		/	149.0 J
	200 J		/	200.3 J
270 J		/	270.7 J	
Funcionamiento con la batería 270 J			/	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES				
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			/	269.4 J
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS				
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		/	2.1 J
	3 J		/	3.4 J
	5 J		/	5.7 J
	7 J		/	7.1 J
	10 J		/	10.2 J
	15 J		/	14.9 J
	20 J		/	19.8 J
	30 J		/	30.1 J
	50 J		/	49.6 J
16. CAMBIO DE LA ENERGIA				
La energía cargada se puede cambiar			/	
17. DESCARGA INTERNA				
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			/	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS				
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			/	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG				
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			/	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA				
La FV se detecta correctamente.			/	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			/	
La desfibrilación se realiza correctamente.			/	
21. PANTALLA AED				
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			/	
22. VOZ AED				
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			/	
23. MARCAPASOS FIJO				
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.			/	
24. MARCAPASOS A DEMANDA				
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente			/	
25. SALIDA DE MARCAPASOS				
La salida de estimulación por marcapasos es correcta.			/	100 mA

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

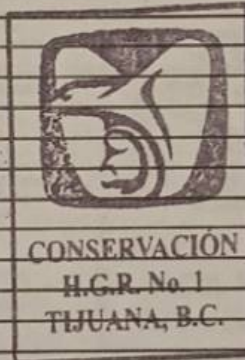

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

7 JUL 2025

CONSERVACION
HGR No. 1

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO: <u>72003387</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>08920</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
26. MONITORIZACION DE ECG			
La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente. HR: 60		/	60 bpm
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.		/	
Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG		/	
27. MONITORIZACION DE CO2			
La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.	Clave Presupuestal 0205 0214 2902	x	mmHg
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.	H.G.R. No. 1	x	
Precisión en la medición del sensor de CO2.		x	
28. MONITORIZACION DE SpO2			
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.	97% SpO2: 95-99% SpO2	/	97 %
	80% SpO2: 78-92% SpO2	/	80 %
	70% SpO2: 66-74% SpO2	/	70 %
	60 bpm SpO2: 55-65% bpm	/	60 bpm
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.		/	
29. MONITORIZACION DE NIBP			
Adulto e Infante	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente.	/	
Neonato	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente.	/	
30. MONITORIZACION DE TEMPERATURA			
La precisión de visualización para la temperatura se confirma.		/	
La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.		/	
La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.		/	
31. MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG			
Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.		/	
La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.		/	
32. SEGURIDAD ELECTRICA			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	Condición normal $\leq 10\mu A$
Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	99 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo CF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	499 μA	Condición normal $\leq 10\mu A$
Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *	Condición normal	0.1 μA	Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$
	Condición 1ra falla	0.1 μA	

33. CARGADOR DE BATERIA SB-831V

El cargador de baterías no está sucio.
Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.
Sin etiquetas retiradas o rasgadas.
El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
07-07-25

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003387</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>08920</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.		✓	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.		✓	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.		✓	
La operación en el encendido es correcta.		✓	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.		✓	
34. SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Corriente de fuga a chasis
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	
		Condición normal $\leq 100\mu A$	99 μA
		Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	499 μA
6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS		✓	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:


Rafael Sanchez Cordova
07-07-25
REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

Claudia Bautista Ramos
USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA
Optimera Jefe de Piso
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)
90201538 -
07/07/25

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjete de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA) 07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

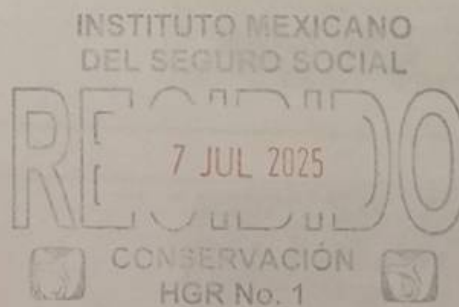

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	08920	ORDEN DE SERVICIO: 72003387	CONS: 1197

ANTES 2




Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
 7 JUL 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1

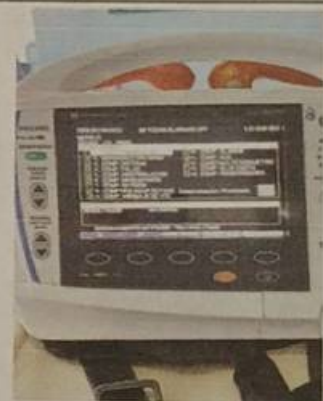

DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.



Carlos Oswaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980

07-07-25