

72003390

CONS: 1201

FECHA: 07-07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA: 83976	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUNISTROS DE: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES: ☐			
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐			
REPORTO FALLA: N/A				LUGAR DE SERVICIO: ☒			
FALLA REPORTADA: N/A				EN SITIO: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				EMPRESA: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 3466	
NO. INVENTARIO: 202180008887		SOFTWARE: 05-17		UBICACIÓN FÍSICA: Endoscopia			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063; PA-19,100140. Número de Serie Real del Equipo: 03466							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
							
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
07-07-25		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		Subjefe de Conservación		CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO: Dayan Monarrez Valencia		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: Jefe de Enfermería		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA: 055		NO. DE MATRÍCULA: 055		NO. DE MATRÍCULA: 055		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 07-07-25		FECHA: 07-07-25		FECHA: 07-07-25		FECHA:	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003390

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3466

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
1. APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO			
El desfibrilador no está sucio.		/	
El desfibrilador no está agrietado o dañado.		/	
No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)		/	
No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.		/	
Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.		/	
2. APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION			
Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		/	
Las partes metálicas del conector no se deforman.		/	
No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		/	
Compruebe que la tierra de protección no está rota.		/	
3. PALAS EXTERNAS			
Las palas externas no están rotos.		/	
4. APARIENCIA DE ACCESORIOS			
Los conectores no están dañados o agrietados.		/	
Adaptador Pad no ha caducado.		/	
5. APARIENCIA DE LA BATERIA			
No hay daños o grietas y sin etiquetas retiradas o desgarradas		/	
La batería no ha caducado.		/	
6. TEST DE BATERIA			
Realizar el test de la batería.		/	
7. ENCENDIDO			
El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		/	
8. SONIDO DE SINCRONIZACION			
QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		/	
9. IMPRESORA			
La impresora funciona correctamente.		/	
Fecha y hora de impresión son correcta.		/	
La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		/	
No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		/	
Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm		/	25 mm
La falta de papel se detecta correctamente.		/	
10. DESCONEXION DE CONECTOR			
Se detecta correctamente la desconexión de un conector		/	
11. TIEMPO DE CARGA			
La carga ha finalizado dentro del período de tiempo especificado.		/	5 seg
12. FORMA DE ONDA			
La desfibrilación se realiza correctamente.		/	
La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		/	
13. ENERGIA DESCARGADA			
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	2 J	/	2.1 J
	3 J	/	3.0 J
	5 J	/	5.2 J
	7 J	/	7.1 J

Clave Presupuestal
0205 0211 2902
H.G.R. No.1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
7 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MCC M2+ 99024980
07-07-25

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003390

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3466

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	10 J		/	10.1 J
	15 J		/	15.2 J
	20 J		/	20.0 J
	30 J		/	29.3 J
	50 J		/	49.7 J
	70 J		/	70.1 J
	100 J		/	100.3 J
	150 J		/	149.8 J
	200 J		/	200.3 J
270 J		/	270.1 J	
Funcionamiento con la batería 270 J			/	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES				
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			/	269.9 J
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS				
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		/	2.1 J
	3 J		/	3.1 J
	5 J		/	5.0 J
	7 J		/	7.0 J
	10 J		/	10.1 J
	15 J		/	14.9 J
	20 J		/	20.1 J
	30 J		/	30.4 J
	50 J		/	50.2 J
16. CAMBIO DE LA ENERGIA				
La energía cargada se puede cambiar			/	
17. DESCARGA INTERNA				
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			/	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS				
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			/	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG				
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			/	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA				
La FV se detecta correctamente.			/	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			/	
La desfibrilación se realiza correctamente.			/	
21. PANTALLA AED				
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			/	
22. VOZ AED				
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			/	
23. MARCAPASOS FIJO				
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.			/	
24. MARCAPASOS A DEMANDA				
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente			/	
25. SALIDA DE MARCAPASOS				
La salida de estimulación por marcapasos es correcta.			/	100 mA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mar 09024980
07-07-25

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003390

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3466

REALIZÓ

DESCRIPCION DEL SERVICIO		✓/x	MEDICIÓN
26.	MONITORIZACION DE ECG		
	La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente. HR: 60	/	60 bpm
	La sensibilidad de la onda ECG es correcta.	/	
	Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG	/	
27.	MONITORIZACION DE CO2		
	La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.	x	mmHg
	La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.	x	
	Precisión en la medición del sensor de CO2.	x	
28.	MONITORIZACION DE SpO2		
	Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.		
	97% SpO2: 95-99% SpO2	/	97 %
	80% SpO2: 78-92% SpO2	/	80 %
	70% SpO2: 66-74% SpO2	/	69 %
	60 bpm SpO2: 55-65% bpm	/	60 bpm
	Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.	/	
29.	MONITORIZACION DE NIBP		
	Adulto e Infante		
	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente.	/	
	Neonato		
	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente.	/	
30.	MONITORIZACION DE TEMPERATURA		
	La precisión de visualización para la temperatura se confirma.	/	
	La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.	/	
	La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.	/	
31.	MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG		
	Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.	/	
	La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.	/	
32.	SEGURIDAD ELECTRICA		
	Corriente de fuga a tierra		
	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	Condición normal $\leq 10\mu A$
			Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$
	Corriente de fuga a chasis		
	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo CF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	499 μA	Condición normal $\leq 10\mu A$
			Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$
	Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *		
	Condición normal	0.1 μA	
	Condición 1ra falla	0.1 μA	

Clave Presupuestal
0205-02-17-2902
H.G.R. No.1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

33. CARGADOR DE BATERIA SB-831V

El cargador de baterías no está sucio.
Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.
Sin etiquetas retiradas o rasgadas.
El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

07-07-25

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003390</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>3466</u>

					REALIZÓ	
DESCRIPCION DEL SERVICIO					✓/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.					✓	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.					✓	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.					✓	
La operación en el encendido es correcta.					✓	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.					✓	
34.	SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR					
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	99 μA	
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA		Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	499 μA	
6	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS				✓	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

[Firma]
REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA

[Firma]
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


[Firma]
Subjefe de Enfermería

[Firma]
Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99174980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

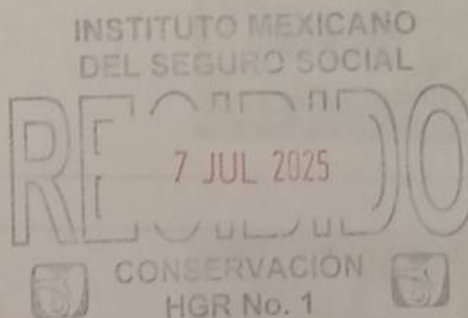


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	3466	ORDEN DE SERVICIO:	72003390
		CONS:	1201

ANTES 2



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1

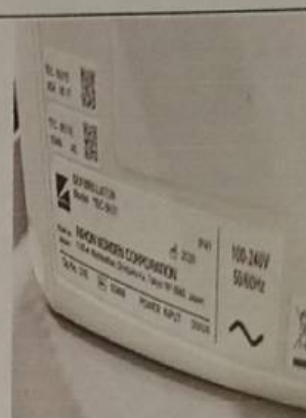

DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
 7 JUL 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1




 CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.



Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 99024980

07-07-25