

72003398

09/07/25

FECHA: 09-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83954
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1		CORRECTIVO	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐ REPARACIÓN ☐ SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		CAPACITACIÓN: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ		SUMINISTROS DE: ☐	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		EN SITIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB203764
NO. INVENTARIO: 202000006407	SOFTWARE: 6.0.2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia	
HORAS DE USO EQUIPO: 11545	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUE SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: 8444			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERIORS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BB105028.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Luis Carlos A. S.	Ing. Carlos A. S.	Carlos Oswaldo Ramírez González	CONSERVACIÓN
09-07-25	09-07-25	Subjefe de Conservación	H.G.R. No. 1
ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR	ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR	H.G.R. No. 1	TIJUANA, B.C.
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA: 09/07/25	FECHA: 09-07-25	FECHA: 09-07-25	FECHA: 09-07-25
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 09-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72 0033 98

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE:

MB203 764

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	/	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
2.	CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
3.	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	5622 mAh
	TEST USB	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

	SELFTEST		
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS		
	SENSOR DE CO2		
	SENSOR DE SPO2		
	ALERTA ACÚSTICA		
5.	TEST DE VENTILACIÓN		
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO		
	TEST DE CIRCUITO		
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)		5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm		15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)		21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)		70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)		100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO	Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
	TEST DE CIRCUITO		
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)		500 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)		500 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)		20 rpm
7.	TEST DE ALARMAS		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE		
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO		
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE		
8.	REVISION DE BATERIA		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		
	ALARMA VISUAL LEDs	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
	ALARMA ACÚSTICA		
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE		
	ALARMA ACÚSTICA		
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO		
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	Carlos Osvaldo Ramírez González	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	MISS Mt. 99024980	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)		2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	09-07-25	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)		2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)		10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		50 L/min

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO					9 JUL 2025	X
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	√/x		√/x		√/x		
	✓	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	✓	120 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓ 0.64 Ω
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 mA	CORRIENTE RESIDUAL				
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN						X
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						X

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

Luis Carlos A.S.
09-07-25

Carlos Ospaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

IMSS Mat. 99024980

ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR

Grz. Huante Abraham Israel
Fisioterapeuta
99022978

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203764	ORDEN DE SERVICIO:	72003398
		CONS:	2056


ANTES 2

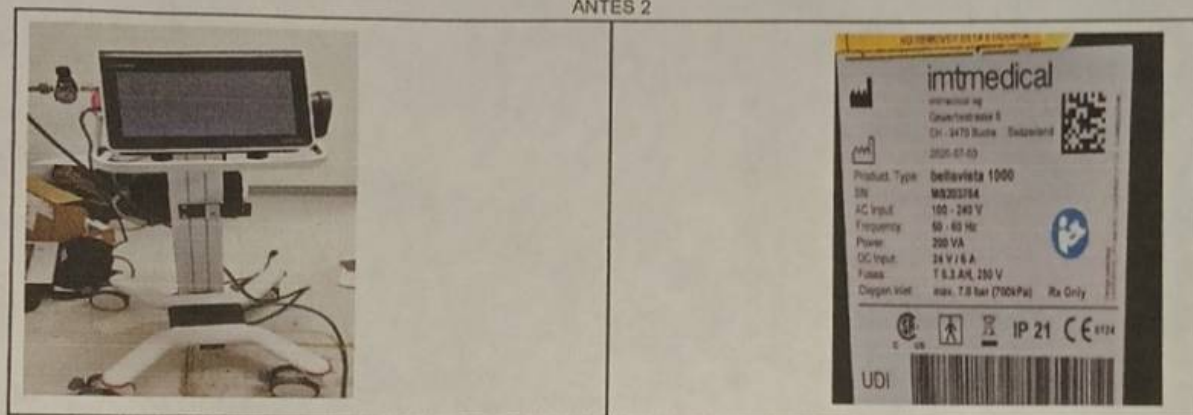

DURANTE 1

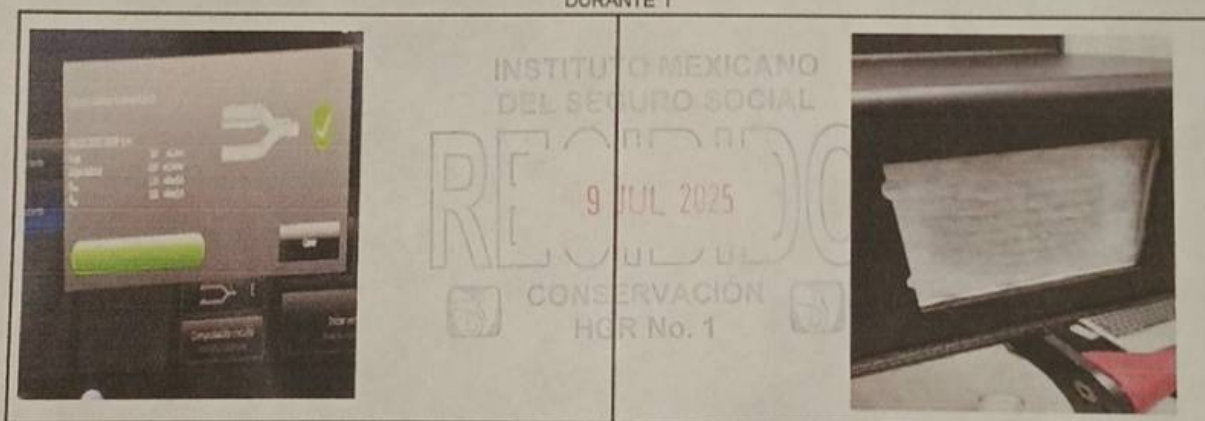

DESPUÉS 1

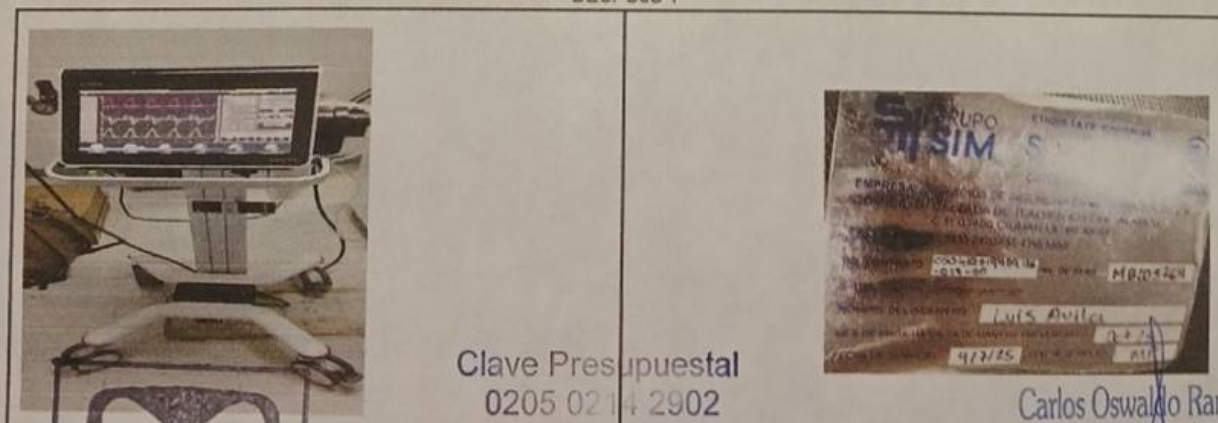

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

09-07-25