

72003402

CONS: 2051

FECHA: 10-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83958
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		CAPACITACIÓN: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ		SUMINISTROS DE: ☐	
CARGO: SUJEJO DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	
REPORTÓ FALLA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		EN SITIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIRE MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB203797
NO. INVENTARIO: 202000006416	SOFTWARE: 6.0.2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: UCI	
HORAS DE USO EQUIPO: 9076	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: 4237			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: 10 JUL 2025		Clave Presupuestal 0205 0214 2902	
FUNCIONANDO AL 100% ☒		H.G.R. No.1	
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA: Luis Carlos A. S.		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramírez González	
10-07-25		Subjefe de Conservación	
NOMBRE COMPLETO: NOMBRE COMPLETO: JEJ Condebelo Ordaz Vega		NOMBRE COMPLETO: NOMBRE COMPLETO: H.G.R. No.1	
PUESTO: Enfermero Jefe de Piso		PUESTO: PUESTO: IMSS Mat. 99024980	
NO. DE MATRÍCULA: NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA: NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 10/07/25		FECHA: 10-07-25	
FECHA: 10/07/25		FECHA: 10-07-25	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE CONSERVACIÓN	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 10-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003402

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE:

MB203797

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

REALIZÓ

v/x

MEDICIÓN

1.

REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:

ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA

CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES

TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)

FILTRO DE BACTERIAS

SET DE FILTROS DE REPUESTO

*PULSIOXÍMETRO

*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA

*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA

*BRAZO

ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO

*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA

BASE RODABLE

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

2.

CALIBRACIONES:

ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN

CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN

CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO

CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS

CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS

ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO

CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE

COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA

COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO

COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO

CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO

CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO

CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR



CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

3.

VERIFICACIÓN DE:

TEST DE VÁLVULAS

TEST DE ALARMAS

FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO

TEST DE SALIDA A USUARIO

REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL

REVISIÓN DE BATERÍAS

TEST USB

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

5315 mAh

10-07-25

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

	SELFTEST			
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS			
	SENSOR DE CO2			
	SENSOR DE SPO2			
	ALERTA ACÚSTICA			
5.	TEST DE VENTILACIÓN			
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO			
	TEST DE CIRCUITO			
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)		25	mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)		5	mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm		15	rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)		21	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)		70	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)		100	%
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO			
	TEST DE CIRCUITO	Clave Presupuesta		
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	0205 0214 2902	500	mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	H.G.R. No.1	500	mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)		20	rpm
7.	TEST DE ALARMAS			
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE			
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO			
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE			
8.	REVISION DE BATERIA			
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA			
	ALARMA VISUAL LEDs			
	ALARMA ACÚSTICA			
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE			
	ALARMA ACÚSTICA			
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO			
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN			
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)		60	mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)		60	mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)		60	mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)		60	mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO			
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)		2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)		10	L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		50	L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO			
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)			L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)			L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)			L/min



NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						X
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						/
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	✓/x		✓/x		✓/x		
	✓	0.1 Mohm	✓	115 V	✓	0.34 Ω	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 mA					
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						X
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CÁMARA DEL HUMIDIFICADOR						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						X

Clave Presupuestal
0205 02 4 2902
H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*** EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)**

OBSERVACIONES

Lucas A. S.

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR

EJP Consuelo Ordóñez Vega
Mat. 99020055

10-07-25

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA


NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203797	ORDEN DE SERVICIO:	72003402
		CONS:	2051


ANTES 2

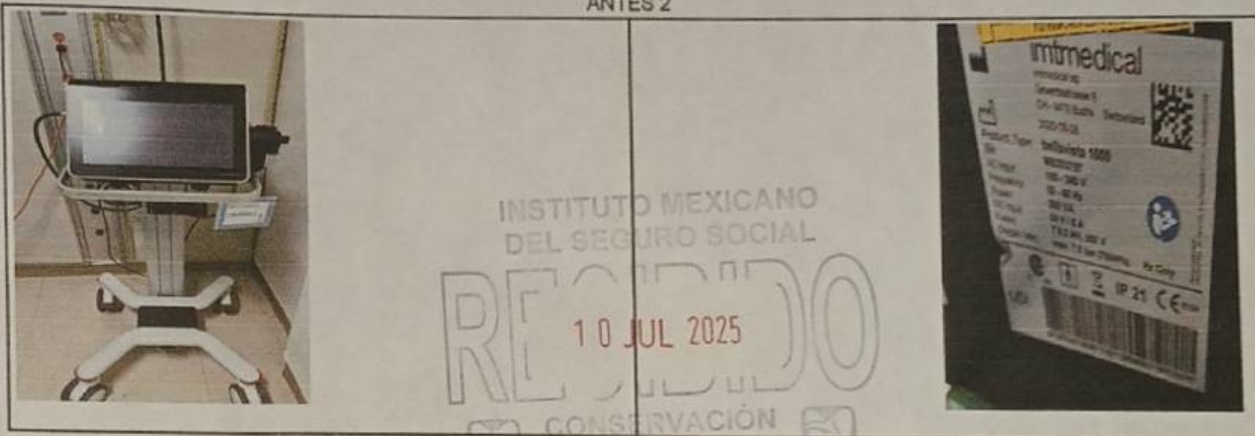

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECORDO
10 JUL 2025
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

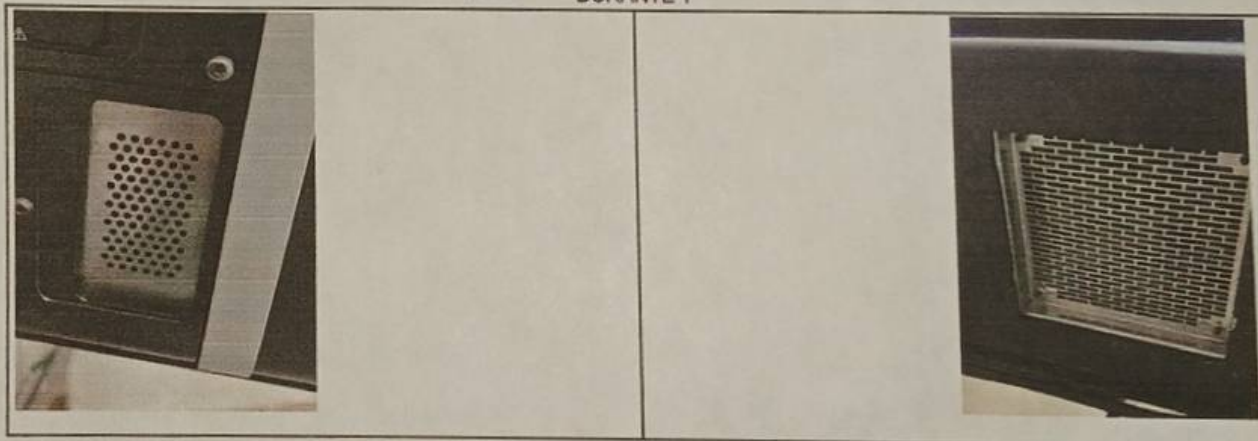

DESPUÉS 1

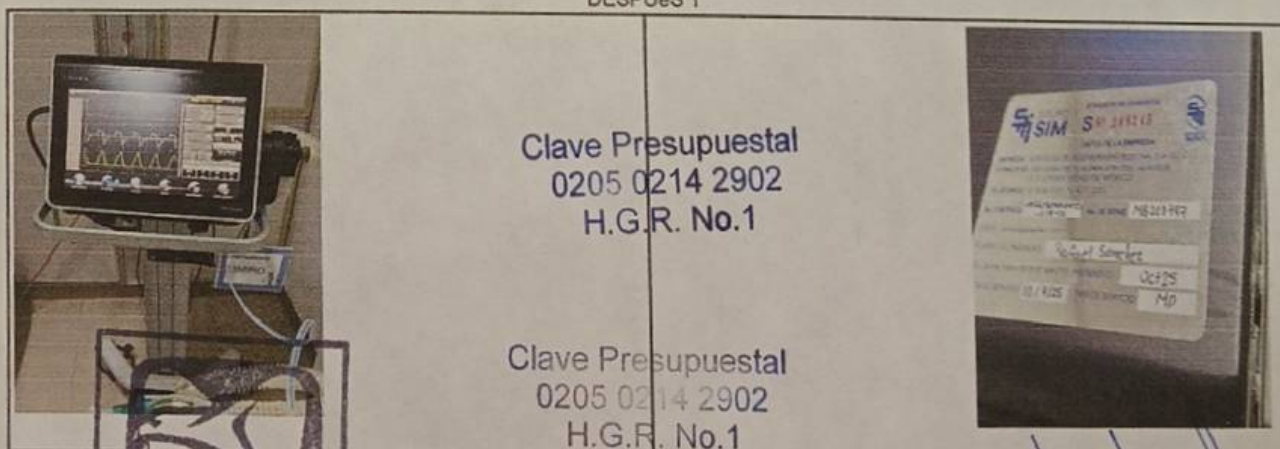

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

SELLO UNIDAD MÉDICA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

10-07-25