

CONS-2050

FECHA 09-07-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA 83949	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019: COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐ EN SITIO: ☐			
REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A				ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203804	
NO. INVENTARIO: 202000006411		SOFTWARE: 6.0.2109-0911 2025		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: 8832		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: 4904							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS. PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO. VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BB105028							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
FIRMA:				FIRMA:		FIRMA:	
Ing. Luis Carlos A. S. 09-07-25				Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980		CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Luis Carlos Avila Salazar				NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González		NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO:				PUESTO:		PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 09/07/25				FECHA: 09-07-25		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

FECHA: 09-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003403


VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: MB203804

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	/	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
2.	CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
3.	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	
	TEST USB	/	

Clave Presupuestal
0205 01 2902
H.G.R. No.1

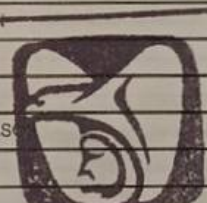

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
5323 mAh

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

	SELFTEST		
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS		
	SENSOR DE CO2		
	SENSOR DE SPO2		
	ALERTA ACÚSTICA		
5.	TEST DE VENTILACIÓN		
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO		
	TEST DE CIRCUITO		
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)		25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)		5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm		15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)		21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)		70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)		100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO		
	TEST DE CIRCUITO		
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	Clave Presupuestal	500 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	0205 011 2902	500 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	H.G.R. No.1	20 rpm
7.	TEST DE ALARMAS		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE		
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO		
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE		
8.	REVISIÓN DE BATERÍA		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA		
	ALARMA VISUAL LEDs		
	ALARMA ACÚSTICA		
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE		
	ALARMA ACÚSTICA		
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO		
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)		2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)		10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)		2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)		10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						X		
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X		
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA								
	✓/x		✓/x		✓/x				
	AISLAMIENTO	✓	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	✓	120 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓	0.52 Ω
	CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA
	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA
	CORRIENTE RESIDUAL	✓	0.1 mA						
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)								
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X		
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN						X		
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CÁMARA DEL HUMIDIFICADOR						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X		
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X		
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X		
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X		
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS						X		

Clave Presupuestal
0205-01-002
H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES

Luis Carlos A.S.
09-07-25

ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

Dr. Huante Abraham Israel

Terapeuta

NO. 99022978

09/07/25

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Mat. 99024980

09-07-25

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA


NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203804	ORDEN DE SERVICIO:	72003403
		CONS:	2050


ANTES 2

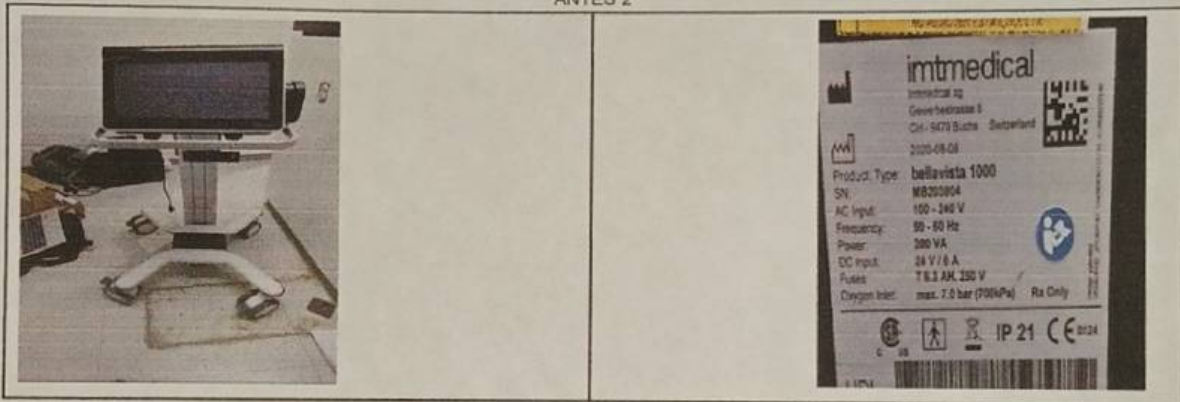

DURANTE 1

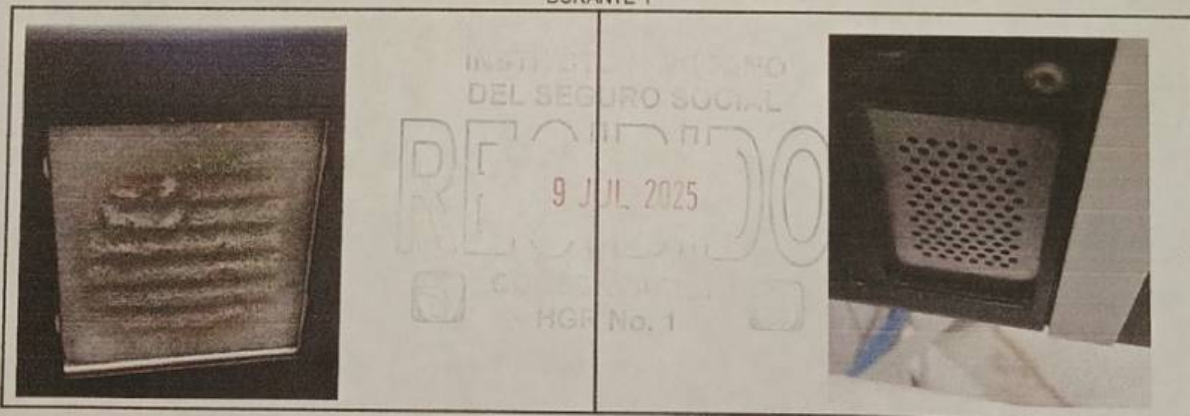

DESPUÉS 1

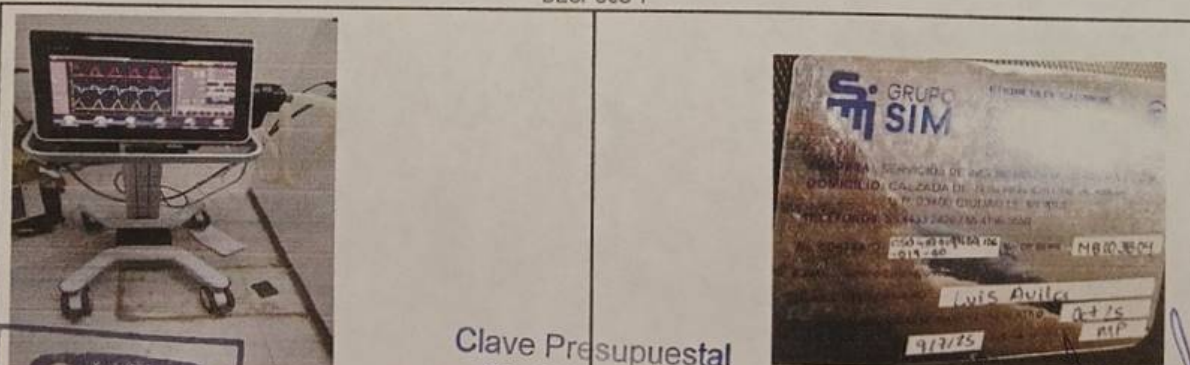

Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat.99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

09-07-25



SELLO UNIDAD MÉDICA:

CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.