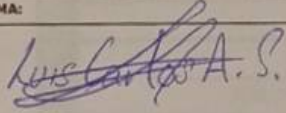
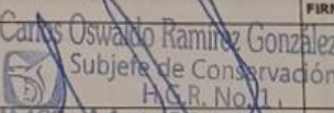
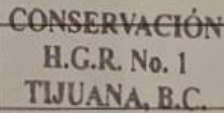


72003406

CONS: 2046

FECHA: 10-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83957
INFORMACIÓN DEL CLIENTE HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1 DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: TEL: 6646270963		INFORMACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1 GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐ GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐ ASesoría: ☐ DIAGNÓSTICO ☐ CAPACITACIÓN: ☒	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJANA, BAJA CALIFORNIA. ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN REPORTO FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A		SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐ LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☒ ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒ ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB203847
NO. INVENTARIO: 302000006415	SOFTWARE: 6.0.2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: UCI	
HORAS DE USO EQUIPO: 10248	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: 5781			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DA VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18,5529063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: FUNCIONANDO AL 100% ☒ X FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA: 	
HGR No. 1			
REPARACIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
			
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
10-07-25	Enfermera Jefa de Piso	Mat. 99024980	
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
10/07/25	10-07-25		
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 10-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003406

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE:

MB203847

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	/	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
2.	CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
3.	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	5423 mAh
	TEST USB	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V."

	SELFTEST	/	
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS	/	
	SENSOR DE CO2	/	
	SENSOR DE SPO2	/	
	ALERTA ACÚSTICA	/	
5.	TEST DE VENTILACIÓN	/	
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	20 rpm
7.	TEST DE ALARMAS	/	
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/	
	AL RECONECTAR EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/	
8.	REVISIÓN DE BATERIA	/	
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	/	
	ALARMA VISUAL LEDs	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/	
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN	/	
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Clave Presupuesta
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 95024980
10-07-23

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						X
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	✓/x		✓/x		✓/x		
	AISLAMIENTO	✓ 0.4 Mohm	VOLTAGE DE LINEA	✓ 125 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓ 0.56 Ω	
	CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA	
	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA	
	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA	
	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA	
	CORRIENTE RESIDUAL	✓ 0.1 mA					
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						X
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CÁMARA DEL HUMIDIFICADOR						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No.1
TIJUANA, B.C.

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

[Firma]

ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR

ENP Consuelo Orduño Vega
Mat. 98020055

[Firma]
En la cme. de jefe de piso

Carlos Osvaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

Mat. 99024980

[Firma]

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

10-07-25

10-07-25

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203847	ORDEN DE SERVICIO:	72003406
		CONS:	2046

ANTES 2



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
 10 JUL 2025



DURANTE 1
 H.G.R. No. 1



DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA
CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA
 10-07-25