

72003883

CONS: 2066

FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				CAPACITACIÓN: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				SUMINISTROS DE: ☐			
CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐			
REPORTO FALLA: N/A				ACCESORIOS: ☐			
FALLA REPORTADA: N/A				LUGAR DE SERVICIO: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: ☐				EN SITIO: ☐			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A				EMPRESA: ☐			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB204024	
NO. INVENTARIO: 202000006758		SOFTWARE: 6-0-2100-0		UBICACIÓN FÍSICA: Inhaloterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA:							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MECANISMO DE CONTROL PRESURIZANTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Pres. puestal 0205 0214 2902 H.G.R No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1		Kit de mantenimiento preventivo	NA				
FIRMA:				FIRMA:			
M. Alfonso Martínez Fernández				Carlos Oswaldo Ramírez González			
Inhaloterapeuta				Jefe de Conservación			
NOMBRE COMPLETO: Mat. 00279671				NOMBRE COMPLETO: H.G. No. 1			
IMSS				IMSS Mat. 9024980			
PUESTO:				PUESTO:			
NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya				NOMBRE COMPLETO:			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:			
FECHA				FECHA			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			

FECHA: 01/10/2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003883

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: MB204024

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
	v/x	MEDICIÓN
1. REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA		
CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES		
TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)		E
FILTRO DE BACTERIAS		
SET DE FILTROS DE REPUESTO		
*PULSIOXÍMETRO		
*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA		
*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA		
*BRAZO		
ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO		
*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA		
BASE RODABLE		
2. CALIBRACIONES:		
ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN		
CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN		
CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO		
CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS		
CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS		
ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO		
CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE		
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA		
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO		
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO		
CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO		
CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO		
CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR		
3. VERIFICACIÓN DE:		
TEST DE VÁLVULAS		
TEST DE ALARMAS		
FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO		
TEST DE SALIDA A USUARIO		
REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL		
REVISIÓN DE BATERÍAS		
TEST USB		

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

4.	SELFTEST	/	
	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS		
	SENSOR DE CO2	/	
	SENSOR DE SPO2	/	
5.	ALERTA ACÚSTICA	/	
	TEST DE VENTILACIÓN	/	
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO		
	TEST DE CIRCUITO	/	
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	1.7 rpm
7.	TEST DE ALARMAS		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/	
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/	
8.	REVISION DE BATERIA		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	/	
	ALARMA VISUAL LEDs	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/	
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.


12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						/		
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						/		
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						/		
	√/x		√/x		√/x				
	AISLAMIENTO	/	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	/	121 V	RESISTENCIA A TIERRA	/	0.33 Ω
	CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/	0.1 μA
	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/	0.1 μA
	CORRIENTE RESIDUAL	/	0.1 mA						
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)								
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X		
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						X		
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO						X		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X		
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X		
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X		
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X		
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						/		

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*** EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)**

OBSERVACIONES:

01/10/2025 Ing. Yukio Matsomiya REALIZÓ EL SERVICIO NOMBRE Y FIRMA	M. Alfonso Martínez USUARIO DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)	Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 Mat 99024980 JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA NOMBRE Y FIRMA NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)
---	---	--

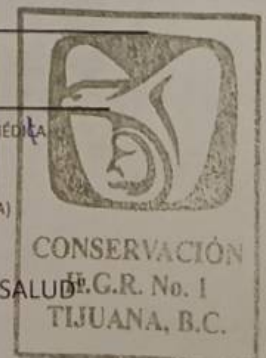

**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V."**

