

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

N° de Orden

AB0098-2968

Fecha

7-nov.-25

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger

Janeth Estefania Enriquez Perez

Localidad

TIJUANA

Tipo de Mantenimiento

2do Mantenimiento Preventivo

Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0011

Marca: DRÄGER

No. Prod: AB0098

Inventario: 200400069008

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Equipo: VENTILADOR VOLUMETRICO

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación y medida de parámetros respiratorios.
- Prueba de componentes neumáticos, electrónicos, alarmas y puntos de seguridad.
- Pruebas desde modo de servicio DrägerService.

Incidencias:

SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3247-22-2635

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	MX08207	Babylog 8000 Set (2 años)	No aplica	9				
2	1	8301856	Batería NiMH 9V 200mAh	No aplica	10				
3	1	8408204	Gasket	No aplica	11				
4	3	8408442	Lip Seal	No aplica	12				
5	1	8409184	Diafragma	No aplica	13				
6	2	8408208	Filtro	No aplica	14				
7	1	8403962	O-ring	No aplica	15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
3	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Ing Carlos D. Rodríguez Grave
Puesto Jefe de Conservación
Matrícula 50
Fecha IMSS Hospital General Regional No 1
Firma Matrícula 99024351 7-11-25

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Janeth Estefania Enriquez Perez
Fecha 7-nov.-25
Firma [Firma]

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre [Firma]
Puesto SJE
Matrícula Mat. 9912347
Fecha 7-11-25
Firma [Firma]

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre [Firma]
Fecha [Firma]
Firma [Firma]

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
Sello FecadorRECORDO
07 NOV 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo



Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0011


No. Orden: AB0098-2968

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento

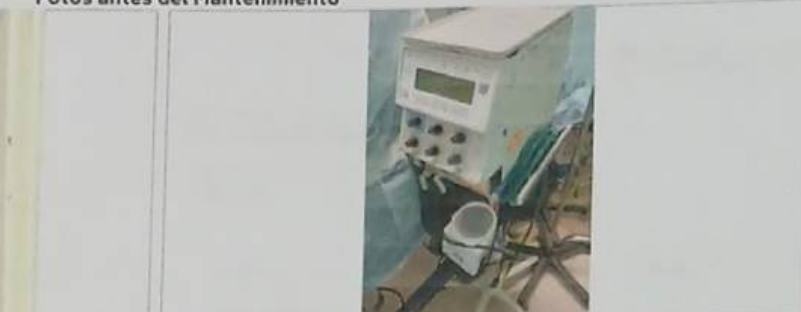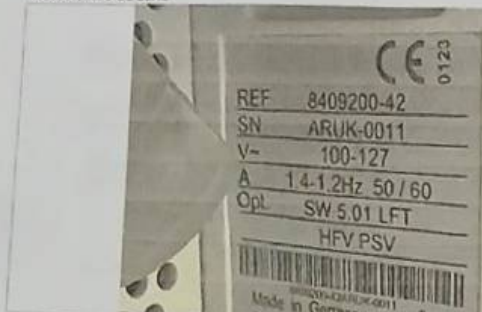

Fotos durante el Mantenimiento

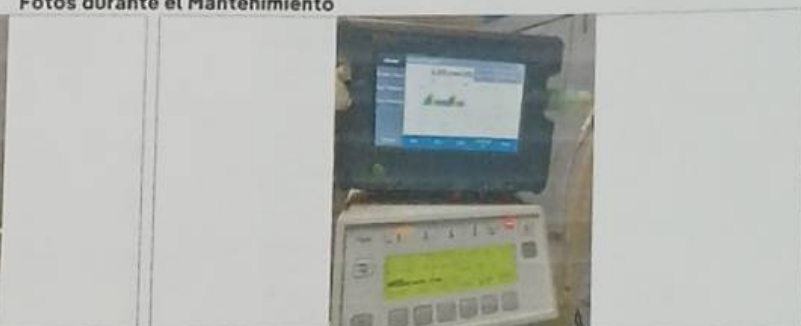

Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.


(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Dr. Carlos D. Rodríguez Ortiz
Puesto Director de Conservación
Matricula 0013 94024951
Fecha 7-11-25
Firma [Signature]

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Janeth Estefania Enriquez Perez
Fecha 7-nov.-25
Firma [Signature]

Sello de Unidad

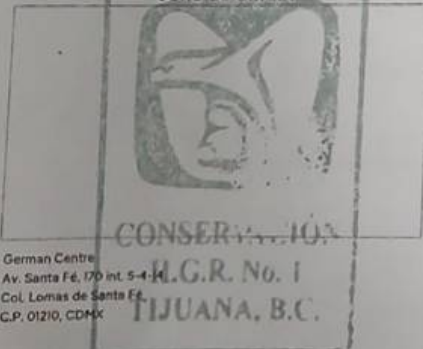

Sello de Clave Presupuestal



Sello Fechador



NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
HGR No. 1. Tijuana, Baja California.

Número de Orden de Servicio:
AB0098-2968

ID Actividad de Servicio:
296AA96F-1F99-4EA7-965E-322FE8B5D2A8

Babylog 8000

Funcional

Número de Inventario:
200400069008

Número de Serie:
ARUK-0011

Servicio Realizado por:
Enriquez, Janeth Estefania

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2025-11-07

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		3.3.2 CPAP	
1.1 Números de serie		CPAP	Funcional
1.1.1 Válvula de espiración 1		3.3.3 "+ Limites de advertencia del volumen minuto (MV)	
Válvula de espiración n.º 1	ARUJ-0030	+ Limites de advertencia del volumen minuto (VM)	Funcional
1.2 Número de la versión de software		3.3.4 "+ Advertencia "¿Tubo bloqueado?"	
Números de versión de software	5.01	+ Advertencia ¿Tubo bloqueado?	Funcional
1.3 Horas de funcionamiento		3.3.5 Advertencia de presión de las vías aéreas baja	
Horas de funcionamiento	58943 h	Advertencia de presión de las vías aéreas baja	Funcional
1.4 (Opción) Comunicación (disponible: Sí/No)		3.3.6 Advertencia de presión de las vías aéreas alta	
Comunicación (disponible: si/no)	No	Advertencia de presión de las vías aéreas alta	Funcional
1.5 (Opción) HFV (disponible: Sí/No)		3.3.7 Advertencia de fallo de O2 y AIR	
HFV (disponible: si/no)	Si	Las advertencias de fallo de O2 y AIR funcionan.	Funcional
1.6 (Opción) PSV / VG (disponible: Si/No)		3.3.8 Prueba de hermeticidad	
PSV / VG (disponible: si/no)	Si	Prueba de hermeticidad	Funcional
2 Piezas de mantenimiento		3.3.9 Advertencia de fallo de la tensión de red / salvaguardia de datos	
2.2 Piezas de mantenimiento según la indicación de los intervalos		Advertencia de fallo de la tensión de red/salvaguardia de datos	Funcional
2.2.3 Babylog 8000 Set 2a		3.3.10 Introducción de los parámetros específicos del usuario	
Kit 2J Babylog 8000, MX08207	2027-11-30	Introducción de los parámetros específicos del usuario	Funcional
3 Prueba de funcionamiento y de estado		4 Seguridad eléctrica	
3.1 Pruebas de estado		4.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)	
3.1.1 Documentos adjuntos		4.1.1 Examen visual	
Estado comprobado.	Funcional	Estado comprobado	Funcional
3.1.2 Aparato		4.1.2 Resistencia de tierra de protección	
El aparato y sus piezas no están dañados.	Funcional	Máximo valor medido.	0.244 Ohm
3.1.3 Carro		4.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
El carro y las ruedas orientables no están dañados. La conexiones atornilladas están bien apretadas.	Funcional	Los puntos de medición se han explorado.	Funcional
3.1.4 Tubos de conexión del sistema de suministro central (O2 y AIR)		4.1.4 Corriente de fuga del equipo	
Tubos de conexión del sistema de suministro central (O2 y AIR)	Funcional	Valor de referencia	256 µA
3.2 Pruebas de funcionamiento		Comprobación de repetición	255 µA
3.2.1 Válvula de respiración de emergencia D3.1		4.3 Medidas finales	
Válvula de respiración de emergencia D3.1	Funcional	4.3.1 Entrega del aparato	
3.2.2 Válvula de seguridad inspiratoria Y3.3		Entrega del dispositivo	Funcional
Prueba 1 (comportamiento de prueba del Babylog)	Funcional	5 Medios de comprobación	
3.2.3 "+ Calibración del sensor de flujo		5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria y sin calibración obligatoria	
+ Calibración del sensor de flujo	Funcional	5.1.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
3.2.4 Calibración de O2 y concentración de O2		Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional
Calibración de O2	Funcional		
Concentración de O2	Funcional		
3.3 Funciones en el modo de funcionamiento			
3.3.1 IPPV			
IPPV	Funcional		