



Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

N° de Orden
AB0098-C861

Fecha
23-jul.-25

OOAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Ingeniero Dräger
Pedro Garcia Chacon

Localidad
TIJUANA

Tipo de Mantenimiento
C. Mantenimiento Correctivo

Modelo:	BABYLOG 8000	No. Serie:	ARUK-0011	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB0098	Inventario:	200400069008	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	VENTILADOR VOLUMETRICO	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se reporta código de fallo 810, se instala tarjeta madre, cable de conexión de batería, batería de 9v y cables de conexión. Se realizan pruebas en modo servicio y con parámetros ventilatorios.

Incidencias:
Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-2961

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	8301856	BATERIA O CONTROL NUMERICO 9V	N/A	9				
2	1	8305489	CABLE DE CONEXION DE BATERIA	N/A	10				
3	1	8306771	T.C.J. MOTHERBOARD	ASHM-0064	11				
4	1	M33278	PIEZA EN Y LUER-LOCK	N/A	12				
5	1	7911413	HAZ DE CABLES	N/A	13				
6	1	7901888	CABLE DE PRUEBA DE 9 PINS	N/A	14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
3	M	Mano de Obra
2	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Puesto Subjefe de Conservación
Matricula H.G.R. No. 1
Fecha IMSS
Firma Mat. 99024980

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Pedro Garcia Chacon
Fecha 23-jul.-25
Firma Pedro Garcia

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Lic. Omar Amaro Mercado Camacho
Puesto Subjefatura de Enfermería
Matricula Mat. 99024518
Fecha IMSS
Firma IMSS de Unidad

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre
Fecha
Firma

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
23 JUL 2025

NO imprimir esta hoja por ambos lados.
CONSERVACION
HGR No. 1

Desman Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-404
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 02280, CDJMX



Oficina Guadalupe
José Guad. Col. Americana
Col. Amerl. C.P. 44140 Guadalupe, Jal.
C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0011

No. Orden: AB0098-C861

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Carlos Oswaldo Ramírez González

Puesto

Subjefe de Conservación

Matrícula

H.G.R. No. 1

Fecha

IMSS Mat. 99024980

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

23-jul.-25

Firma

Pedro Chacon


Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Sello Fechador



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

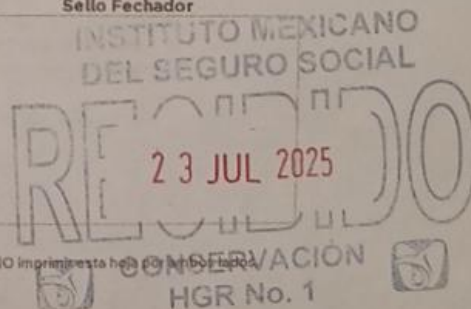

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0098-C861

ID Actividad de Servicio:
E5D6D6B-9C18-41B4-9070-44922B654F2F

Babylog 8000

Funcional

Número de Inventario:
200400069008

Número de Serie:
ARUK-0011

Servicio Realizado por:
Pedro Garcia Chacon

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
23-07-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		+ Umbres de advertencia del volumen minuto (VM)	Funcional
1.2 Número de la versión de software	5.01	3.3.4 "+ Advertencia "¿Tubo bloqueado?"	Funcional
Números de versión de software		+ Advertencia ¿Tubo bloqueado?	Funcional
1.3 Horas de funcionamiento	53792 h	3.3.5 Advertencia de presión de las vías aéreas baja	Funcional
Horas de funcionamiento		Advertencia de presión de las vías aéreas baja	Funcional
1.4 (Opción) Comunicación (disponible: Si/No)	No	3.3.6 Advertencia de presión de las vías aéreas alta	Funcional
Comunicación (disponible: si/no)		Advertencia de presión de las vías aéreas alta	Funcional
1.5 (Opción) HFV (disponible: Si/No)	Si	3.3.7 Advertencia de fallo de O2 y AIR	Funcional
HFV (disponible: si/no)		Las advertencias de fallo de O2 y AIR funcionan.	Funcional
1.6 (Opción) PSV / VG (disponible: Si/No)	Si	3.3.8 Prueba de hermeticidad	Funcional
PSV / VG (disponible: si/no)		Prueba de hermeticidad	Funcional
3 Prueba de funcionamiento y de estado		3.3.9 Advertencia de fallo de la tensión de red / salvaguardia de datos	Funcional
3.1 Pruebas de estado		Advertencia de fallo de la tensión de red/salvaguardia de datos	Funcional
3.1.1 Documentos adjuntos	Funcional	3.3.10 Introducción de los parámetros específicos del usuario	Funcional
Estado comprobado.		Introducción de los parámetros específicos del usuario	Funcional
3.1.2 Aparato	Funcional	4 Seguridad eléctrica	
El aparato y sus piezas no están dañados.		4.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)	
3.1.3 Carro	Funcional	4.1.1 Examen visual	Funcional
El carro y las ruedas orientables no están dañados. La conexiones atornilladas están bien apretadas.		Estado comprobado	Funcional
3.1.4 Tubos de conexión del sistema de suministro central (O2 y AIR)	Funcional	4.1.2 Resistencia de tierra de protección	0.281 Ohm
Tubos de conexión del sistema de suministro central (O2 y AIR)		Máximo valor medido.	
3.2 Pruebas de funcionamiento		4.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	Funcional
3.2.1 Válvula de respiración de emergencia D3.1	Funcional	Los puntos de medición se han explorado.	
Válvula de respiración de emergencia D3.1		4.1.4 Corriente de fuga del equipo	5.2 µA
3.2.2 Válvula de seguridad inspiratoria Y3.3	Funcional	Valor de referencia	
Prueba 1 (comportamiento de prueba del Babylog)		Comprobación de repetición	5.2 µA
3.2.3 "+ Calibración del sensor de flujo	Funcional	4.3 Medidas finales	
+ Calibración del sensor de flujo		4.3.1 Entrega del aparato	Funcional
3.2.4 Calibración de O2 y concentración de O2	Funcional	Entrega del dispositivo.	
Concentración de O2		5 Medios de comprobación	
Calibración de O2		5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria y sin calibración obligatoria	
3.3 Funciones en el modo de funcionamiento		5.1.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	Funcional
3.3.1 IPPV	Funcional	Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	
IPPV			
3.3.2 CPAP	Funcional		
CPAP			
3.3.3 "+ Límites de advertencia del volumen minuto (MV)	Funcional		

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026