

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Médica
HGR No. 1

OOAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Localidad
TIJUANA

N° de Orden
AB0099-2968

Fecha
7-nov.-25

Ingeniero Dräger
Janeth Estefania Enriquez Perez

Tipo de Mantenimiento
2do Mantenimiento Preventivo

Modelo:	BABYLOG 8000	No. Serie:	ARUK-0012	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB0099	Inventario:	200400069006	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	VENTILADOR VOLUMETRICO	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación y medida de parámetros respiratorios.
- Prueba de componentes neumáticos, electrónicos, alarmas y puntos de seguridad.
- Pruebas desde modo de servicio DrägerService.

Incidencias:

SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3247-22-2634

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

La asesoría técnica no fue requerida.

El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	MX08207	Babylog 8000 Set (2 años)	No aplica	9				
2	1	8301856	Batería NiMH 9V 200mAh	No aplica	10				
3	1	8408204	Gasket	No aplica	11				
4	3	8408442	Lip Seal	No aplica	12				
5	1	8409184	Diaphragma	No aplica	13				
6	2	8408208	Filtro	No aplica	14				
7	1	8403962	O-ring	No aplica	15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
3	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Jef. de Conservación
Puesto Jef. de Conservación
Matrícula IMSS
Fecha 7-nov.-25
Firma Matrícula: 99024951

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Janeth Estefania Enriquez Perez
Fecha 7-nov.-25
Firma [Firma]

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre [Firma]
Puesto [Firma]
Matrícula [Firma]
Fecha [Firma]
Firma [Firma]

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre [Firma]
Fecha [Firma]
Firma [Firma]

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

07 NOV 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYLOG 8000

No. Serie: ARUK-0012

No. Orden: AB0099-2968

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento




Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo

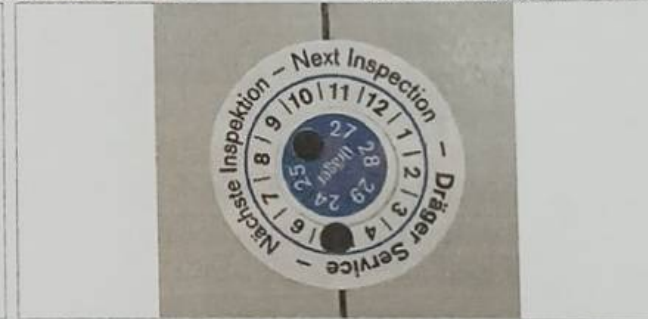

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Ing Carlos D. Rodríguez Graña
Jefe Departamento de Conservación
Hospital General Regional No 1
Matrícula 99024951

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Fecha

Firma

Janeth Estefania Enriquez Perez

7-nov.-25

Sello de Unidad



CONSERVACIÓN

German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. B-1-A
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0610, CDMX

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

Sello Fechador

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
07 NOV 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
HGR No. 1. Tijuana, Baja California.

Número de Orden de Servicio:
AB0099-2968

ID Actividad de Servicio:
66E6B19E-60F5-48F7-98CB-080611930E51

Babylog 8000

Funcional

Número de Inventario:
200400069006

Número de Serie:
ARUK-0012

Servicio Realizado por:
Enriquez, Janeth Estefania

Localización:
UCIN

Servicio Realizado el día:
2025-11-07

Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo	
1.1 Números de serie	
1.1.1 Válvula de espiración 1	
Válvula de espiración n.º 1	ARUK-0084
1.2 Número de la versión de software	
Números de versión de software	5.01
1.3 Horas de funcionamiento	
Horas de funcionamiento	61025 h
1.4 (Opción) Comunicación (disponible: Sí/No)	
Comunicación (disponible: sí/no)	No
1.5 (Opción) HFV (disponible: Sí/No)	
HFV (disponible: sí/no)	Sí
1.6 (Opción) PSV / VG (disponible: Sí/No)	
PSV / VG (disponible: sí/no)	Sí
2 Piezas de mantenimiento	
2.2 Piezas de mantenimiento según la indicación de los intervalos	
2.2.3 Babylog 8000 Set 2a	
Kit 2J Babylog 8000, MX08207	2027-11-30
3 Prueba de funcionamiento y de estado	
3.1 Pruebas de estado	
3.1.1 Documentos adjuntos	
Estado comprobado.	Funcional
3.1.2 Aparato	
El aparato y sus piezas no están dañados.	Funcional
3.1.3 Carro	
El carro y las ruedas orientables no están dañados. La conexiones atornilladas están bien apretadas.	Funcional
3.2 Pruebas de funcionamiento	
3.2.1 Válvula de respiración de emergencia D3.1	
Válvula de respiración de emergencia D3.1	Funcional
3.2.2 Válvula de seguridad inspiratoria Y3.3	
Prueba 1 (comportamiento de prueba del Babylog)	Funcional
3.2.3 "+" Calibración del sensor de flujo	
+ Calibración del sensor de flujo	Funcional
3.3 Funciones en el modo de funcionamiento	
3.3.1 IPPV	
IPPV	Funcional
3.3.2 CPAP	
CPAP	Funcional
3.3.3 "+" Límites de advertencia del volumen minuto (MV)	

Prueba	Resultado
+ Límites de advertencia del volumen minuto (VM)	Funcional
3.3.4 "+" Advertencia "¿Tubo bloqueado?"	
+ Advertencia ¿Tubo bloqueado?	Funcional
3.3.5 Advertencia de presión de las vías aéreas baja	
Advertencia de presión de las vías aéreas baja	Funcional
3.3.6 Advertencia de presión de las vías aéreas alta	
Advertencia de presión de las vías aéreas alta	Funcional
3.3.7 Advertencia de fallo de O2 y AIR	
Las advertencias de fallo de O2 y AIR funcionan.	Funcional
3.3.8 Prueba de hermeticidad	
Prueba de hermeticidad	Funcional
3.3.9 Advertencia de fallo de la tensión de red / salvaguardia de datos	
Advertencia de fallo de la tensión de red/salvaguardia de datos	Funcional
3.3.10 Introducción de los parámetros específicos del usuario	
Introducción de los parámetros específicos del usuario	Funcional
4 Seguridad eléctrica	
4.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)	
4.1.1 Examen visual	
Estado comprobado	Funcional
4.1.2 Resistencia de tierra de protección	
Máximo valor medido.	0.231 Ohm
4.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional
4.1.4 Corriente de fuga del equipo	
Valor de referencia	188 µA
Comprobación de repetición	187 µA
4.3 Medidas finales	
4.3.1 Entrega del aparato	
Entrega del dispositivos	Funcional
5 Medios de comprobación	
5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria y sin calibración obligatoria	
5.1.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional

Observaciones

Herramienta utilizada: