

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

OOAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Localidad
TIJUANA

N° de Orden

AB0183-C933

Fecha

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Ingeniero Dräger

Pedro Garcia Chacon

Tipo de Mantenimiento

C. Mantenimiento Correctivo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0049

No. Prod: AB0183 Inventario: 2002905890

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Equipo: CUNA DE CALOR RADIANTE

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Marca: DRÄGER

CONSERVACIÓN

HGR No. 1

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza reparacion por mejora, se cambia teclado y filtros de focos de fototerapia.

Incidencias:

Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-3547

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	2M30010	TECLADO D. MEMBRANE 8010, CPL	N/A	9				
2	2	2M30302	FILTRO, CPL	N/A	10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2.5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Puesto Subjefe de Conservación

Matricula H.G.R. No. 1

Fecha IMSS Mat 99024980

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

3-oct.-25

Firma

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Fecha

Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Dra. Claudia C. Osuna Saucedo

Puesto Médico Pediatra

Matricula Mat. IMSS 11043296

Fecha CP 4964301

Firma IMSS Coordinación de Pediatría

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

03 OCT 2025

CONSERVACIÓN
NO imprimir este folio por ambos lados.
HGR No. 1

German Center
Av. Santa Fe, D.O. 5-4-14
Cul. Loma de
C.P. 00100

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Oficina Guadalupe
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri. C.P. 44140 Guadalupe, Jal.
C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0049

No. Orden: AB0183-C933

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento




Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo

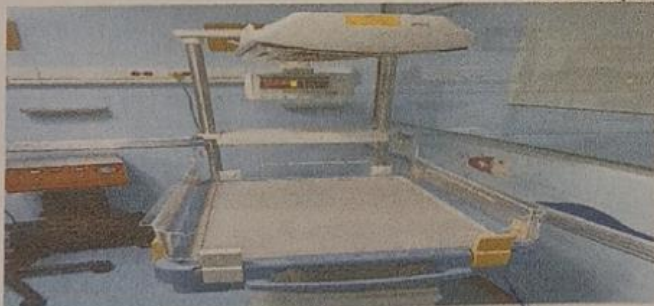

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello, poner datos completos de sello. Poner los datos completos de donde se tomó la foto)

Nombre

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Puesto

Subjefe de Conservación

Matricula

H.G.R. No. 1

Fecha

IMSS Mat. 99024980

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha


3-oct.-25

Firma

Pedro Garcia Chacon

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

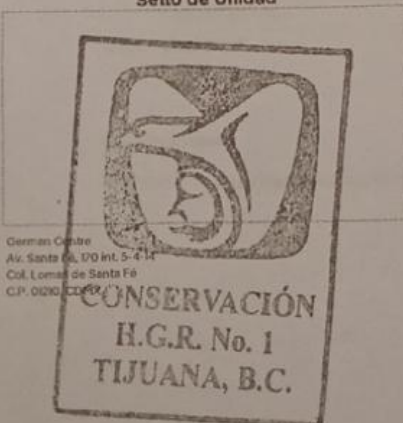

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0183-C931

ID Actividad de Servicio:
0A5C6846-9E10-409E-AE01-0A2C85D9B65A

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905890

Número de Serie:
ARRM-0049

Servicio Realizado por:
Pedro Garcia Chacon

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
03-10-2025

Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo	
1.2 Versión del software	
Versión de software (Babytherm)	1.01
1.3 (Opción) Fototerapia	
Fototerapia (horas de funcionamiento)	0
3 Seguridad eléctrica	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)	
3.1.1 Examen visual	
Estado comprobado.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica.	0.207 Ohm
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo	
Valor de referencia de 100 V a 127 V	180.1 µA
4 Prueba de funcionamiento y de estado	
4.1 Pruebas de estado	
4.1.1 Documentos adjuntos	
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional
4.1.2 Letreros de Babytherm	
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional
4.1.4 Unidad de control y de regulación	
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional
4.1.7 Paneles	
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional
4.1.9 Radiador	

Prueba	Resultado
Radiador	Funcional
4.1.10 Varillas de calefacción	
Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional
4.1.11 Placa base	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional
4.2 Pruebas de funcionamiento	
4.2.1 Superficie de reposo	
El enclavamiento en distintas posiciones es posible. La superficie de reposo encaja con seguridad y sin juego.	Funcional
4.2.3 Prueba de encendido	
Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
4.2.6 Radiador	
El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
Potencia de calefacción ajustable manualmente	Funcional
Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional
Regulación de la temperatura cutánea	Funcional
4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional
4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna	Funcional
4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	
La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional
4.2.12 (Opción) Fototerapia	
Prueba de funcionamiento	Funcional
4.2.15 Medidas finales	
4.2.15. Entrega del aparato	
1 Entrega del dispositivo	Funcional
5 Medios de comprobación	
5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026