

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

N° de Orden

AB0184-2968

Fecha

7-nov.-25

Ingeniero Dräger

Janeth Estefania Enriquez Perez

Tipo de Mantenimiento

2do Mantenimiento Preventivo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Prod: AB0184

Inventario: 2002905891

Equipo: CUNA DE CALOR RADIANTE

No. Serie: ARRM-0067

Marca: DRÄGER

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación de resistencias cerámicas, calefacción del colchón y lámparas de fototerapia.
- Comprobación del módulo electrónico junto a sistemas de seguridad y control.

Incidencias:

SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3247-22-2638

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	2M30715	SET IR HEATER ELEMENT 120V	No aplica	9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Janeth Estefania Enriquez Perez

Fecha

7-nov.-25

Firma

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Fecha

Firma

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Daumen Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0067

No. Orden: AB0184-2968

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Carlos D. Rodríguez Graña

Puesto Jefe Departamento de Conservación

Matricula Hospital General Regional No 1

Fecha Matricula 95024951

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Janeth Estefania Enriquez Perez

Fecha


7-nov.-25

Firma

Sello de Unidad



Sello de Clave Presupuestal

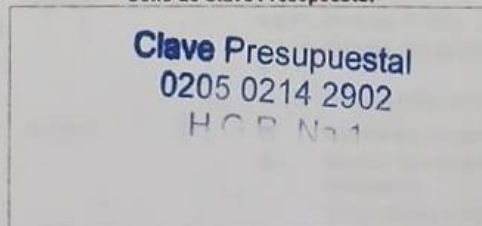

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
HGR No. 1. Tijuana, Baja California.

ID Actividad de Servicio:
32EA802D-E80E-427C-9B5F-5430789041CB

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905891

Número de Serie:
ARRM-0067

Servicio Realizado por:
Enriquez, Janeth Estefania

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
2025-11-07

Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo	
1.1 Códigos de serie	
1.1.1 Babytherm 8004 / 8010	
Sistema electrónico central (2M30000)	2M30190-12
1.2 Versión del software	
Versión de software (Babytherm)	1.01
1.3 (Opcion) Fototerapia	
Fototerapia (horas de funcionamiento)	348
2 Piezas de mantenimiento	
2.2 Piezas de mantenimiento según la indicación de los intervalos	
2.2.2 Varillas de calefacción	
Elemento de calefacción (1 20 V)	2026-11-30
3 Seguridad eléctrica	
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)	
3.1.1 Examen visual	
Estado comprobado.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0,147 Ohm
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo	
Valor de referencia de 100 V a 127 V	244 µA
4 Prueba de funcionamiento y de estado	
4.1 Pruebas de estado	
4.1.1 Documentos adjuntos	
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional
4.1.2 Letreros de Babytherm	
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional
4.1.4 Unidad de control y de regulación	
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional

Prueba	Resultado
4.1.7 Paneles	
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles	Funcional
4.1.9 Radiador	
Radiador	Funcional
4.1.10 Varillas de calefacción	
Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional
4.1.11 Placa base	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional
4.2 Pruebas de funcionamiento	
4.2.1 Superficie de reposo	
El enclavamiento en distintas posiciones es posible. La superficie de reposo encaja con seguridad y sin juego.	Funcional
4.2.3 Prueba de encendido	
Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
4.2.6 Radiador	
El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
Potencia de caldeo ajustable manualmente	Funcional
Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional
Regulación de la temperatura cutánea	Funcional
4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional
4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna	Funcional
4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	
La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional
4.2.12 (Opcion) Fototerapia	
Prueba de funcionamiento	Funcional
4.2.15 Medidas finales	
4.2.15. Entrega del aparato	
1	
Entrega del dispositivo	Funcional
5 Medios de comprobación	
5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional

Observaciones

Herramienta utilizada:

- Analizador de Seguridad Eléctrica ESA612 N/S: 6896043. Próxima Calibración: 16/05/2026.

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó **funcional**. Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.