

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Médica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Nº de Orden

AB0184-C933

Fecha

3-oct.-25

Ingeniero Dräger

Pedro Garcia Chacon

Tipo de Mantenimiento

C. Mantenimiento Correctivo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Prod: AB0184

Inventario: 2002905891

Equipo: CUNA DE CALOR RADIANTE

No. Serie: ARRM-0067

Marca: DRÄGER

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza reparación por mejora, se cambia teclado y filtros de focos de fototerapia.

Incidencias:

Sin incidencias

Etiqueta de seguridad: 3122-02-3546

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	2M30010	TECLADO D.MEMBRANE 8010, CPL	N/A	9				
2	2	2M30302	FILTRO, CPL	N/A	10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2,5	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Puesto Subjefe de Conservación

Matrícula H.G.R. No. 1

Fecha IMSS Mat 99024980

Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Médico Pediatra

Puesto Mat. IMSS 11043296

Matrícula C.P. 4964301

Fecha IMSS Coordinación de Pediatría H.G.R. No. 1

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

3-oct.-25

Firma

Datos Biomédico


(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre


Fecha

Firma


Sello de Unidad

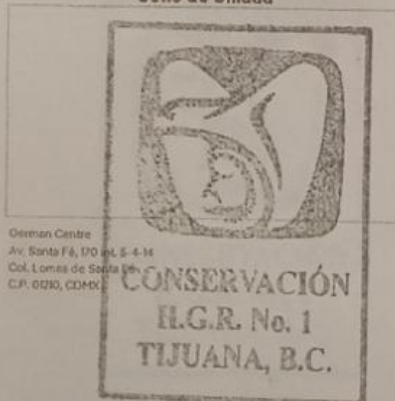

Sello de Clave Presupuestal

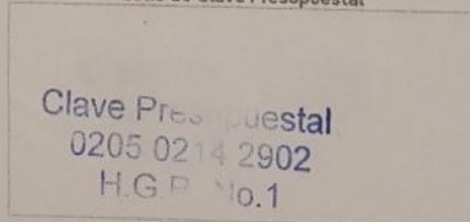

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

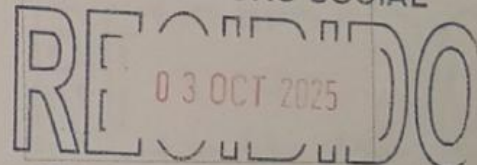

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

COAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0067

No. Orden: AB0184-C933

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez

Puesto Subjefe de Conservación

Matricula H.G.R. No. 1

Fecha IMSS Mat 99024980

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Pedro Garcia Chacon

Fecha

3-oct.-25

Firma

[Firma]

Sello de Unidad



Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDADO
03 OCT 2025

German Centre
Av. Santa Fe, 1700 Int. Santa Fe
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 00210, CDMX

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
IMSS HGR NO. 1

Número de Orden de Servicio:
AB0184-C933

ID Actividad de Servicio:
6D17CCE9-C27D-47BC-A8C5-D8BD6C54B6B3

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905891

Número de Serie:
ARRM-0067

Servicio Realizado por:
Pedro Garcia Chacon

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
03-10-2025

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo			
1.2 Versión del software		Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional
Versión de software (Babytherm)	1.01	4.1.11 Placa base	
1.3 (Opcion) Fototerapia		Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional
Fototerapia (horas de funcionamiento)	0	4.1.15 Aparatos de supervisión adicionales	
3 Seguridad eléctrica		Se han comprobado los aparatos de supervisión adicionales de acuerdo con las instrucciones de prueba específicas.	Funcional
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)		4.2 Pruebas de funcionamiento	
3.1.1 Examen visual		4.2.1 Superficie de reposo	
Estado comprobado.	Funcional	El enclavamiento en distintas posiciones es posible. La superficie de reposo encaja con seguridad y sin juego.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.2.3 Prueba de encendido	
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.293 Ohm	Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.2.6 Radiador	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional	El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		Potencia de caldeo ajustable manualmente	Funcional
Valor de referencia de 100 V a 127 V	139.1 µA	Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional
Comprobación de repetición de 100 V a 127 V	139.5 µA	Regulación de la temperatura cutánea	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
4.1 Pruebas de estado		Advertencia de fallo de la tensión de red	Funcional
4.1.1 Documentos adjuntos		4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional	Iluminación Luz de trabajo/luz nocturna	Funcional
4.1.2 Letreros de Babytherm		4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional	La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional
4.1.4 Unidad de control y de regulación		4.2.12 (Opcion) Fototerapia	
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional	Prueba de funcionamiento	Funcional
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna		4.2.15 Medidas finales	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional	4.2.15. Entrega del aparato	
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta		1	
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta	Funcional	Entrega del dispositivo	Funcional
4.1.7 Paneles		5 Medios de comprobación	
Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
4.1.9 Radiador		Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional
Radiador	Funcional		
4.1.10 Varillas de calefacción			

Observaciones

Analizador de seguridad eléctrica, Fluke/ESA612, NS: 6896041, Next cal: 19/05/2026