

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica
HGR No. 1

OOAD / UMAE
BAJA CALIFORNIA

Localidad
TIJUANA

N° de Orden
AB0185-2968

Fecha
7-nov.-25

Ingeniero Dräger
Janeth Estefania Enriquez Perez

Tipo de Mantenimiento
2do Mantenimiento Preventivo

Modelo:	BABYTHERM 8010	No. Serie:	ARRM-0069	Marca:	DRÄGER
No. Prod:	AB0185	Inventario:	2002905893	No. de Contrato:	050GYR019N09125-006-00
Equipo:	CUNA DE CALOR RADIANTE	Estatus:	COMPLETAMENTE FUNCIONAL		

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación de resistencias cerámicas, calefacción del colchón y lámparas de fototerapia.
- Comprobación del módulo electrónico junto a sistemas de seguridad y control.

Incidencias:
SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3247-22-26341

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	2M30715	SET IR HEATER ELEMENT 120V	No aplica	9				
2					10				
3					11				
4					12				
5					13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2	M	Mano de Obra
0	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre José De la Cruz
Puesto Director de Conservación
Matrícula IMSS 99024951
Fecha 7-11-25
Firma [Firma]

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Janeth Estefania Enriquez Perez
Fecha 7-nov.-25
Firma [Firma]

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre [Firma]
Puesto [Firma]
Matrícula [Firma]
Fecha [Firma]
Firma [Firma]

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre [Firma]
Fecha [Firma]
Firma [Firma]

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORD
07 NOV 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 01210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Orden de Servicio IMSS

Dräger

Unidad Medica

HGR No. 1

OAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: BABYTHERM 8010

No. Serie: ARRM-0069

No. Orden: AB0185-2968

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento



Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.


(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre [Firma]
Puesto [Firma]
Matricula [Firma]
Fecha 7-11-25
Firma [Firma]

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre Janeth Estefania Enriquez Perez
Fecha 7-nov.-25
Firma [Firma]

Sello de Unidad

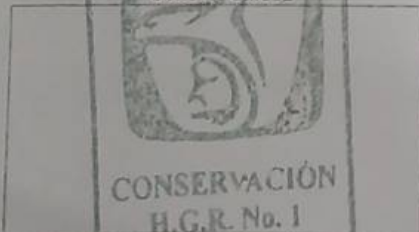

Sello de Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Sello Pechador
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



German Centre
Av. Santa Fe, 170 int. 5444
Col. Lomas de Santa Fe
C.P. 0210, CDMX

Oficina Guadalajara
José Guad. Col. Americana
Col. Ameri C.P. 44140 Guadalajara, Jal.
C.P. 44140 Guadalajara, Jal.

No imprimir esta hoja por ambos lados.

- Analizador de Seguridad Eléctrica ESA612 N/S: 6896043. Próxima Calibración: 16/05/2026.

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó **funcional**. Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
HGR No. 1. Tijuana, Baja California.

ID Actividad de Servicio:
32EA802D-E80E-427C-9B5F-5430789041CB

Babytherm 8010

Funcional

Número de Inventario:
2002905893

Número de Serie:
ARRM-0069

Servicio Realizado por:
Enriquez, Janeth Estefania

Localización:
Cuneros

Servicio Realizado el día:
2025-11-07

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		4.1.7 Paneles	
1.1 Códigos de serie		Se ha comprobado el estado y funcionamiento de todos los paneles.	Funcional
1.1.1 Babytherm 8004 / 8010		4.1.9 Radiador	
Sistema electrónico central (2M30000)	2M30190-12	Radiador	Funcional
1.2 Versión del software		4.1.10 Varillas de calefacción	
Versión de software (Babytherm)	1.01	Las varillas de calefacción no presentan huellas de sobrecarga térmica.	Funcional
1.3 (Opción) Fototerapia		4.1.11 Placa base	
Fototerapia (horas de funcionamiento)	348	Las piezas mencionadas no están dañadas. Los tornillos del soporte están apretados.	Funcional
2 Piezas de mantenimiento		4.2 Pruebas de funcionamiento	
2.2 Piezas de mantenimiento según la indicación de los intervalos		4.2.1 Superficie de reposo	
2.2.2 Varillas de calefacción		El endavamiento en distintas posiciones es posible. La superficie de reposo encaja con seguridad y sin juego.	Funcional
Elemento de calefacción (120 V)	2026-11-30	4.2.3 Prueba de encendido	
3 Seguridad eléctrica		Se produce el autochequeo. Los indicadores LED, los indicadores de 7 segmentos y la bocina están activos durante aprox. 2 segundos. El indicador LED rojo de alarma central del radiador se enciende brevemente.	Funcional
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma EN 62353 (IEC 62353)		4.2.6 Radiador	
3.1.1 Examen visual		El radiador se puede girar hacia la izquierda y la derecha. El radiador encaja en la posición media.	Funcional
Estado comprobado.	Funcional	Potencia de caldeo ajustable manualmente.	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		Calentar ambos elementos de calefacción.	Funcional
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica.	0.147 Ohm	Regulación de la temperatura cutánea.	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		4.2.7 Advertencia de fallo de la tensión de red	
Los puntos de medición se han explorado.	Funcional	Advertencia de fallo de la tensión de red.	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		4.2.8 Iluminación "Luz de trabajo/luz nocturna"	
Valor de referencia de 100 V a 127 V.	244 µA	Iluminación luz de trabajo/luz nocturna.	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.2.11 Carro regulable en altura (opcional)	
4.1 Pruebas de estado		La superficie de reposo asciende y desciende.	Funcional
4.1.1 Documentos adjuntos		4.2.12 (Opción) Fototerapia	
Todos los documentos adjuntos están disponibles según el operador o el usuario.	Funcional	Prueba de funcionamiento.	Funcional
4.1.2 Letreros de Babytherm		4.2.15 Medidas finales	
Los letreros están limpios y completos y son legibles.	Funcional	4.2.15. Entrega del aparato	
4.1.4 Unidad de control y de regulación		1	
Las piezas mencionadas no están dañadas.	Funcional	Entrega del dispositivo.	Funcional
4.1.5 (Opción) Carro regulable en altura, carro y columna		5 Medios de comprobación	
Las piezas mencionadas no están dañadas. Las ruedas orientables están firmemente unidas al carro.	Funcional	5.1 Medios de comprobación con calibración obligatoria	
4.1.6 Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta		Se han utilizado medios de comprobación con una calibración vigente.	Funcional
Cuna térmica, colchón y cubierta plegable/cubierta.	Funcional		

Observaciones

Herramienta utilizada: