

Orden de Servicio

IMSS

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

N° de Orden

ABI604-2968

Fecha

7-nov.-25

Ingeniero Dräger

Janeth Estefania Enriquez Perez

Tipo de Mantenimiento

2do Mantenimiento Preventivo

Modelo: SAVINA

No. Serie: ASAD-0261

Marca: DRÄGER

No. Prod: AB1604

Inventario: 200980004436

No. de Contrato: 050GYR019N09125-006-00

Equipo: VENTILADOR VOLUMETRICO

Estatus: COMPLETAMENTE FUNCIONAL

Rutina de Mantenimiento.

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fábrica con las siguientes acciones:

- Revisión, aspecto general.
- Prueba de seguridad eléctrica.
- Comprobación y medida de parámetros respiratorios.
- Prueba de componentes neumáticos, electrónicos, alarmas y puntos de seguridad.
- Pruebas desde modo de servicio DrägerService.

Incidencias:

SIN INCIDENCIAS

Etiqueta de seguridad: 3247-22-2643

* El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. 100% Funcional

* La asesoría técnica no fue requerida.

* El material de mantenimiento fue mostrado al responsable de Conservación y se le entregan los materiales retirados de los equipos.

Material Utilizado.

No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie	No.	Cant	No. Parte	Descripción	No. Serie
1	1	MX08860	KIT MANT SAVINA 2 AÑOS	No aplica	9				
2	1	6757545	MICROFILTRO	No aplica	10				
3	1	8417898	KIT FILTRO DE POLVO	No aplica	11				
4	2	8413661	MEMBRANA COMPLETA	No aplica	12				
5	1	8422632	JUEGO DE 2 BATERÍAS INTERNAS	No aplica	13				
6					14				
7					15				
8					16				

Horas de Trabajo.

Cantidad	No. Parte	Descripción
2	M	Mano de Obra
4	T	Traslado
0	E	Espera

Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre

Janeth Estefania Enriquez Perez

Fecha

7-nov.-25

Firma

Datos de Usuario.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Datos Biomédico

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Fecha

Firma

Sello de Unidad

Sello de Clave Presupuestal

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDADO
07 NOV 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



NO imprimir esta hoja por ambos lados.

German Caribé

Av. Santa Fe, 170 int. 5-4-14

Col. Lomas de Santa Fe

C.P. 02100, CDMX

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Oficina Guadalupe

José Quac Col. Americana

Col. Amen C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

C.P. 44140 Guadalupe, Jal.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Orden de Servicio IMSS

Unidad Medica

HGR No. 1

OOAD / UMAE

BAJA CALIFORNIA

Localidad

TIJUANA

Datos del Equipo

Modelo: SAVINA

No. Serie: ASAD-0261


No. Orden: ABI604-2968

Con número de serie

Fotos antes del Mantenimiento



Fotos durante el Mantenimiento

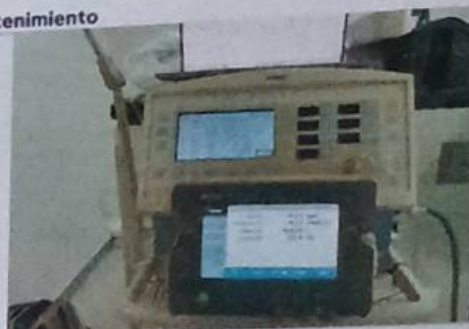

Fotos después del Mantenimiento

Etiqueta con fecha de siguiente preventivo



Datos de Jefatura de Conservación.

(En caso de no tener sello o tener datos parciales el sello, llenar los datos faltantes con letra de molde)

Nombre

Puesto

Matrícula

Fecha

Firma

Datos Ingeniero Dräger.

Nombre


Janeth Estefania Enriquez Perez

Fecha


7-nov.-25

Firma


Sello de Unidad

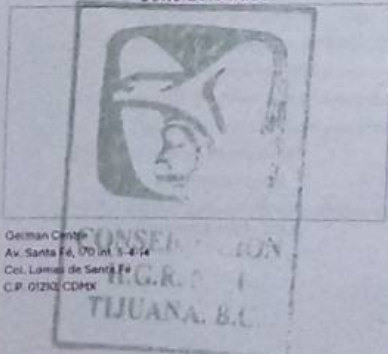

Sello de Clave Presupuestal

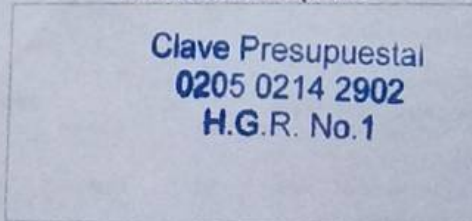

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

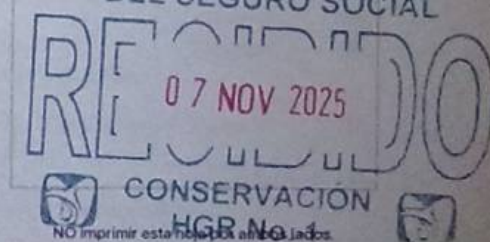

NO imprimir esta hoja por ambos lados.

Certificado de Servicio

Nombre Cliente:
HGR No. 1, Tijuana, Baja California.

Número de Orden de Servicio:
AB1604-2968

ID Actividad de Servicio:
3302FD6B-ABF5-44EF-B5B4-EE62D5DAB15E

Savina

Funcional

Número de Inventario:
200980004436

Número de Serie:
ASAD-0261

Servicio Realizado por:
Enriquez, Janeth Estefania

Localización:
Inhaloterapia

Servicio Realizado el día:
2025-11-07

Prueba	Resultado	Prueba	Resultado
1 Configuración del dispositivo		Estado general (Savina, accesorios y accesorios especiales)	Funcional
1.1 Código de serie		4.1.6 Fuente de alimentación	Funcional
Válvula de espiración 1 (reutilizable)	ARNZ-0687	Fuente de alimentación	Funcional
1.2 Datos del aparato		4.1.7 Cubierta del filtro	Funcional
BIPAP/PCV+ (8414060) (Si/No)	Si	Cubierta del filtro	Funcional
1.3 Versión de software (Savina)		4.1.8 Bloque de inspiración (boquilla de inspiración, conexión del nebulizador y el sensor de temperatura)	Funcional
Versión de software (Savina)	3.11	Bloque de inspiración (boquilla de inspiración, conexión del nebulizador y el sensor de temperatura)	Funcional
1.4 Horas de funcionamiento		4.1.9 Alojamiento del sensor de flujo, sensor de flujo, bloqueo de tubos y tapa del sensor de flujo	Funcional
Total de horas de funcionamiento	2375 h	Prueba de estado y prueba de funcionamiento	Funcional
Horas de funcionamiento Servicio	666 h	Bloqueo de tubo 8414199	Funcional
1.5 Registro de los límites de alarma específicos del usuario		Tapa del sensor de flujo 8417221	Funcional
Paw	45	4.1.10 Alojamiento de la válvula de espiración y de la(s) válvula(s) de espiración (reutilizables)	Funcional
MV alto	14	Alojamiento de la válvula de espiración	Funcional
MV bajo	0.5	Válvula de espiración 1 (reutilizable)	Funcional
TApnea	20	4.1.11 Teclado, botón giratorio y display	Funcional
ftot	45	Teclado, botón giratorio y display	Funcional
VTi	1.75	4.1.12 Pulmón de prueba de adultos	Funcional
2 Piezas de mantenimiento		4.1.13 Tubo de conexión de gas O2	Funcional
2.2 Piezas de mantenimiento según la indicación de los intervalos		Tubo de conexión de gas O2	Funcional
2.2.2 Kit de servicio Savina 2 años		4.2 Pruebas de funcionamiento	
Kit de servicio Savina 2 años	2025-11-07	4.2.1 Hermeticidad inspiración	51 mbar
3 Seguridad eléctrica		4.2.2 Hermeticidad de la válvula de espiración (reutilizable)	62 mbar
3.1 Seguridad del sistema eléctrico según la norma DIN EN 62353 (IEC 62353)		4.2.3 Válvula de respiración de emergencia (D2)	-5.7 mbar
3.1.1 Examen visual	Funcional	Válvula de respiración de emergencia (D2)	Funcional
Examen visual	Funcional	4.2.4 Ventilador de aire de refrigeración	Funcional
3.1.2 Resistencia de tierra de protección		4.2.5 Fuente de alimentación	Funcional
Máximo valor medido del aparato con línea de conexión a la red eléctrica	0.181 Ohm	Indicación, alimentación eléctrica	Funcional
3.1.3 Puntos de medición de la resistencia de tierra de protección		Tensión de alimentación interna (baterías internas)	Funcional
Puntos de medición explorados	Funcional	Advertencia de fallo de la red eléctrica	Funcional
3.1.4 Corriente de fuga del equipo		4.2.7 Prueba de plausibilidad de las baterías internas (1)	Funcional
Valor medido	54.9 µA	Prueba de plausibilidad de las baterías internas (1)	Funcional
4 Prueba de funcionamiento y de estado		4.2.8 Detección del microfiltro	Funcional
4.1 Pruebas de estado		Detección del microfiltro	Funcional
4.1.1 Documentos adjuntos		4.3 Comprobaciones del funcionamiento en el	
Documentación adjunta disponible	Funcional		
4.1.2 Manual de productos de medicina			
Libro de dispositivos médicos disponible	Funcional		
4.1.3 Placas identificativas y letrero de opciones			
Placas identificativas y letrero de opciones	Funcional		
4.1.4 Etiquetas de producto			
Etiquetas del producto	Funcional		
4.1.5 Estado general (Savina, accesorios y accesorios especiales)			

- Analizador de Seguridad Eléctrica ESA612 N/S: 6896643. Próxima Calibración: 16/05/2026.

Este informe de servicio contiene los resultados de todos los pasos del servicio realizado. Las lagunas en la numeración se deben a que se omitieron pasos que no formaban parte del servicio. Teniendo en cuenta todos los resultados, el servicio realizado se evaluó como "Funcional". Esto significa que el equipo probado cumple completamente con los requisitos de la prueba y puede usarse sin restricciones.