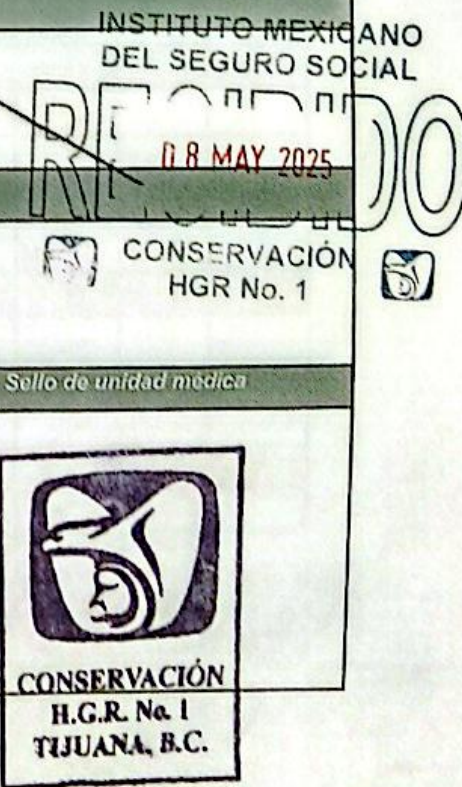


 MARO HEALTH SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD		Fecha: 07 Mayo 2025	Folio: MH25-339
ORDEN DE SERVICIO			
Servicio realizado por: Ing. Fernanda Diego		Equipo: Cuna de calor radiante con fototerapia	
Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo		Marca: Atmoscare Modelo: Adventum No. Serie: AP17-1866	
Condición de contrato: Garantía		Cliente: IMSS	
Nombre y Dirección de la Unidad Médica HGR 1 Tijuana Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California			
Reporte de Falla			
(Empty space for report)			
Hora de inicio: 14:30	Hora de término: 15:30	Total de horas: 1 hora	
Trabajo Realizado Se presenta personal de Maro Health a realizar mantenimiento preventivo detallado en lista anexa se realiza revisión física del equipo y del funcionamiento en sistema de calefacción, bomba, fototerapia, luz de examinación, cionometría.			
Refacciones y Accesorios Utilizados			
(Empty space for refacciones)			
Observaciones y Comentarios Equipo funcionando correctamente			
Personal de Servicio Ing. Fernanda Diego		Área usuaria EJP. Cecylia Ines 1215 Ornela López Mat. 99022217	
Ingeniería Biomédica y/o conservación Carlos Oswaldo Ramirez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 9902220501		Administración y/o dirección	
Sello de unidad médica 			

ANEXO

RUTINA DE SERVICIO

01-May-200

Descripción: Cuna de Calor Radiante, Marca: AtmosCare, Modelo: Adventum 239

N° de serie: AP17-1366

Folio

PHS 239

Inspección general del equipo.	S	N	Obs
1. Verificar que todos los cables se encuentren conectados.	/		
2. Verificar que el equipo encienda correctamente.	/		
3. Verificar funcionamiento del controlador.	/		
3.1. Que la pantalla despliegue correctamente.	/		
3.2. Que encienda el calefactor.	/		
3.3. Que encienda la fototerapia	/		
3.4. Que encienda luz de exploración.	/		
Limpieza general del equipo.			
1. Desconectar el equipo de la toma de corriente.	/		
2. Abrir tapa trasera de la columna.	/		
3. Desconectar los arneses para extraer tarjetas.	/		
4. Proceder a limpieza de tarjetas.	/		
5. Limpieza de báscula interconstruida.	/		
6. Limpieza de calefactor.	/		
7. Proceder a limpieza de estructura metálica.	/		
8. Reconectar los arneses y las tarjetas que fueron extraídas.	/		
9. Aplicar aire comprimido.	/		
Calibración del sistema de control de temperatura de piel.			
1. Usar sonda de calibración y proceder a calibrar.	/		
Comprobación del desempeño eficiente de variables de control del equipo.			
1. Verificar que los dos modos (manual y servo control) estén estables.	/		
2. En modo bebé verificar que la temperatura desplegada es similar a la programada.	/		
3. En modo manual programe el calefactor a diferentes porcentajes	/		
4. Actualización o reprogramación del software en caso de ser necesario	N/A	N/A	N/A
Falla de poder.			
1. Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica.	/		
2. Compruebe que la pantalla no despliega información.	/		
3. Verifique que suena un beep continuo.	/		
Verificación final del funcionamiento del equipo.			
1. Repetir inspección general del equipo.	/		

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980