


 MARO HEALTH SOLUCIONES PRACTICAS PARA LA SALUD	Fecha:	03/06/2025	Folio:	MH25-590
	ORDEN DE SERVICIO			
Servicio realizado por:		Equipo: Cuna de calor radiante con fototerapia		
Ing. Geraldine Vanegas		Marca: Atmoscare		
Tipo de servicio:		Modelo: Adventum		
Mantenimiento preventivo reprogramado		No. Serie: AP17-1862		
Condicion de contrato: Garantía		Cliente: IMSS		
Nombre de la Unidad Médica HGR I Tijuana Calle Canadá, No.16801 Colonia Rio Tijuana 3era etapa C.P.22226, Municipio Tijuana, Baja California				
Reporte de Falla				
Mantenimiento preventivo				
Hora de inicio:	12:00	Hora de término:	13:00	Total de horas: 1 hora
Trabajo Realizado				
Se presenta personal de Maro Health a realizar mantenimiento preventivo del equipo de incubación estacionario del fabricante, se realiza revisión física del equipo y sus partes, se realiza inspección general del equipo, limpieza general y comprobación de variables de control (temperatura), comprobación de alimentación eléctrica y prueba de funcionamiento.				
Refacciones y Accesorios Utilizados INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
Observaciones y Comentarios CONSERVACIÓN HGR No. 1				
Se acepta futura de mantenimiento. Equipo queda funcionando correctamente.				
Nombre / Firma / Matricula / Cargo				Sello de unidad médica
Personal de Servicio		Área usuaria		
Ing. Geraldine Vanegas 		EJP. Cecylia Ines U.I.T. Orduña López Mat. 99032217 		
Ingeniería Biomédica y/o conservación Carlos Oswaldo Ramirez Gonzales Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 99024980		Administración y/o dirección		

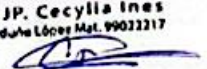

ANEXO

RUTINA DE SERVICIO

Descripción: Cuna de Calor Radiante, Marca: AtmosCare, Modelo: Adventum.

N° de serie: AP17-1862

Inspección general del equipo.	SI	NO
1. Verificar que todos los cables se encuentren conectados.	✓	
2. Verificar que el equipo encienda correctamente.	✓	
3. Verificar funcionamiento del controlador.	✓	
3.1. Que la pantalla despliegue correctamente.	✓	
3.2. Que encienda el calefactor.	✓	
3.3. Que encienda la fototerapia	✓	
3.4. Que encienda luz de exploración.	✓	
Limpieza general del equipo.		
1. Desconectar el equipo de la toma de corriente.	✓	
2. Abrir porta trasera de la columna.	✓	
3. Desconectar los arneses para extraer tarjetas.	✓	
4. Proceder a limpieza de tarjetas.	✓	
5. Limpieza de báscula interconstruida.	✓	
6. Limpieza de calefactor.	✓	
7. Proceder a limpieza de estructura metálica.	✓	
8. Reconectar los arneses y las tarjetas que fueron extraídas.	✓	
9. Aplicar aire comprimido.	✓	
Calibración del sistema de control de temperatura de piel.		
1. Usar sonda de calibración y proceder a calibrar.	✓	
Comprobación del desempeño eficiente de variables de control del equipo.		
1. Verificar que los dos modos (manual y servo control) estén estables.	✓	
2. En modo bebé verificar que la temperatura desplegada es similar a la programada.	✓	
3. En modo manual programe el calefactor a diferentes porcentajes.	✓	
4. Actualización o reprogramación del software en caso de ser necesario.	NA	
Falla de poder.		
1. Desconecte el equipo de la alimentación eléctrica.	✓	
2. Compruebe que la pantalla no despliega información.	✓	
3. Verifique que suena un beep continuo.	✓	
Verificación final del funcionamiento del equipo.		
1. Repetir inspección general del equipo.	✓	

EDMER
Calzada de la Viga 9347, Col. Asturias
Ciudad de México, 06850
(55) 5740 2721

Arroba Xynergix S.A. de C.V.

Puerto
6 de Feb 2024 1. Barrio de San Juan T. México
Barrio de San Juan, T. México 211000
(222) 161 5645

EJP. Cecylla Ines
1011 Orduno López Mat. 99022217

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjeto de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.