

Orden de Servicio

Folio: MP_03679_MT

Fecha de servicio: 3/11/2025

- ☐ Mantenimiento Correctivo ☐ Puesta en Operación ☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Diagnóstico ☐ Capacitación ☐ Instalación

Cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social HGR1 Tijuana

Domicilio: Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226

Depto/Lab: Patología

Garantía: SI

Usuario:

Teléfono:

Ext:

E-mail:

Equipo:

Microtomo

Modelo:

HistoCore Multicut

Marca:

Leica Biosystems

Número de serie:


03679

Accesorios: N/A

Observaciones:

Se le realizó el mantenimiento preventivo correspondiente

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

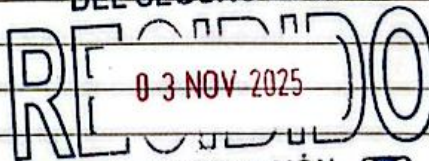

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Ing Carlos D. Rodríguez Grave
Jefe Depto. de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Matrícula 99024951

Realizó

Francisco Saavedra Beltrán

Nombre y firma

Conformidad/Recibido

Dra. Enka Gabriela Grajales, M.C.
Médico Anatomopatológico
M.C. 99023464
IMSS Cén. Prof. 4584604

Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.

Av. México 2522, Fracc. Ladrón de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. conmutador: (33) 3679-3800. Ext: 143. Correo: soporte@aspelab.com

www.aspelab.com

Orden de Servicio

Folio: MP_03679_MT

Equipo:

Microtomo

Marca:

Leica Biosystems

Modelo:

HistoCore Multicut

Número de serie:

03679

- ☒ Consulta con el (los) usuario(s) sobre el comportamiento del sistema en general.
- ☒ Revisión del cable de alimentación eléctrica y del mando de control externo.
- ☒ Comprobar funcionalidad eléctrica del instrumento:
 - Sistema de apagado/encendido.
 - Indicadores luminosos y display del control de mando externo.
 - Modificación de los parámetros del tipo de corte.
 - Sistema motorizado de avance del cabezal.
 - Control de mando integrado.
 - Indicador acústico de final de recorrido del sistema motorizado del cabezal.
- ☒ Ejecución de lo siguiente en el mecanismo porta-cuchillas:
 - Inspección visual.
 - Desensamble y limpieza exhaustiva.
 - Diagnóstico del desgaste natural de los componente móviles.
- ☒ Ejecución de lo siguiente en el mecanismo porta-muestras:
 - Inspección visual.
 - Desensamble y limpieza exhaustiva.
 - Pruebas de sujeción.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDO
03 NOV 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1




- ☒ Lubricación del porta-cuchillas y sujetador de cabezal.
- ☒ Comprobar la condición del orientador del cabezal.
- ☒ Comprobar el funcionamiento de la manivela y sus mecanismos de bloqueo.
- ☒ Revisar el ajuste del sistema de fuerzas y ajustar si es necesario.
- ☒ Llevar a cabo una prueba de validación final cortando muestras del cliente.
- ☒ Entregar el reporte de resultados y hallazgos encontrados.

Carlos D. Rodríguez Gra...
Intendente de Conservación
Hospital General Regional No 1
Tijuana, B.C.

Realizó

Francisco Saavedra Beltrán

Nombre y firma

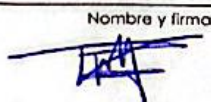

Conformidad/Recibió

Dra. Erika Gabriela Gra...

Médico Anatomopatología

Mat. 99023464

Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.

Av. México 2522, Fracc. Ladrillos Guaymas, CP 44000, Guadalupe, Jalisco, México.
Tel. conmutador: (33) 3679-3800. Ext: 145. Correo: soporte@aspelab.com

www.aspelab.com