

Orden de ServicioFolio: MP3_03663_MTFecha de servicio: 22-05-2025

- ☐ Mantenimiento Correctivo ☐ Puesta en Operación ☒ Mantenimiento Preventivo
☐ Diagnóstico ☐ Capacitación ☐ Instalación

Cliente: Instituto Mexicano del Seguro Social HGR 1 TijuanaDomicilio: Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226Depto/Lab: PatologíaGarantía: Si

Usuario: _____

Teléfono: _____

Ext: _____

E-mail: _____

Equipo: _____

Microtomo

Modelo: _____

HistoCore Multicut


Marca: _____

Leica Biosystems

Número de serie: _____

03663Accesorios: N/A

Observaciones:

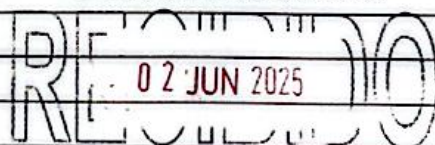Se le realizó mantenimiento preventivo al equipo. el equipo quedo funcionando.INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIALCONSERVACION
HGR No. 1

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Realizó

Francisco Saavedra Beltrán

Nombre y firma

Conformidad/Recibido

Enika Gabriela Cruz Pérez

Nombre y firma

Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.Av. México 2522, Fracc. Ladrón de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. conmutador: (33) 3679-3800. Ext: 143. Correo: soporte@aspelab.com

Orden de Servicio

Folio: MP3_03663_MT

Equipo:	Modelo:
Microtomo	HistoCore Multicut
Marca:	Número de serie:
Leica Biosystems	03663

- ☒ Consulta con el (los) usuario(s) sobre el comportamiento del sistema en general.
- ☒ Revisión del cable de alimentación eléctrica y del mando de control externo.
- ☒ Comprobar funcionalidad eléctrica del instrumento:
 - Sistema de apagado/encendido.
 - Indicadores luminosos y display del control de mando externo.
 - Modificación de los parámetros del tipo de corte.
 - Sistema motorizado de avance del cabezal.
 - Control de mando integrado.
 - Indicador acústico de final de recorrido del sistema motorizado del cabezal.
- ☒ Ejecución de lo siguiente en el mecanismo porta-cuchillas:
 - Inspección visual.
 - Desensamble y limpieza exhaustiva.
 - Diagnóstico del desgaste natural de los componente móviles.
- ☒ Ejecución de lo siguiente en el mecanismo porta-muestras:
 - Inspección visual.
 - Desensamble y limpieza exhaustiva.
 - Pruebas de sujeción.
- ☒ Lubricación del porta-cuchillas y sujetador de cabezal.
- ☒ Comprobar la condición del orientador del cabezal.
- ☒ Comprobar el funcionamiento de la manivela y sus mecanismos de bloqueo.
- ☒ Revisar el ajuste del sistema de fuerzas y ajustar si es necesario.
- ☒ Llevar a cabo una prueba de validación final cortando muestras del cliente.
- ☒ Entrega del reporte de resultados y hallazgos encontrados.



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS - Mat 99024980


INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
02 JUN 2025

 CONSERVACIÓN 
HGR No. 1

Realizó
Francisco Saavedra Beltrán

Nombre y firma

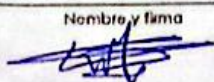

Conformidad/Recibido

Erika Gabriela Guepales Pérez

Nombre y firma



Asesoría y Proveedora de Equipos para Laboratorio S.A. de C.V.

Av. México 2522, Fracc. Ladrón de Guevara, CP 44600, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. conmutador: (33) 3679-3800. Ext: 143. Correo: soporte@aspelab.com