



Reporte de Servicio

Orden de Servicio: WO-12073399

Número de Documento: WO-12073399_1
Fecha de Emisión: 28/12/2025

Número de Caso: 0124843224

Vendido a:
No aplica

Enviado a:
No aplica

Detalles de Contacto:
Teléfono: 01 800 253 0448 / 1 253 2570

DETALLES DEL CLIENTE

Contacto: Melissa Montserrat Méndez Barba
Email: mmendez@hcg.gob.mx

Teléfono: +52 3318372229
Celular: No aplica

07 NOV 2025

DETALLES DEL SERVICIO

Ingeniero: Daniel Garcia
Fecha de creación: No aplica
Prioridad: 5-Actividad Programada
Tipo de Evento: Mantenimiento Preventivo

Número de Contrato: No aplica
Plan de Servicio: No aplica
Garantía: WN-8065138

DETALLES DEL EQUIPO

Equipo: Affiniti 70 Ultrasound System
No. de Equipo: No aplica
Número de Inventario de Cliente: No aplica

Número de Serie: US924F0850
Techidno: No aplica
UDI: (01)00884838114180(21)US924F0850

Situación Reportada: Mantenimiento Preventivo

Estado del Equipo: Mantenimiento Preventivo finalizado, el equipo queda completamente operativo.

DETALLE DE TAREAS

Tipo de actividad	Actividad de Servicio	Fecha y hora de Inicio	Fecha y hora de Fin	Duración (en horas)
Trabajo	Servicio en Sitio	07/11/2025 10:00 AM	07/11/2025 12:00 PM	2.00
			Duración Total:	2.00

Firma del Representante de Philips:

Firma del Cliente:

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Ingeniero: Garcia, Daniel
Fecha: 28/12/2025 2:24 PM
Firma realizada

Nombre del Cliente: Carlos Ramirez
Fecha:
Firma física requerida

Orden de Servicio: WO-12073399

Ubicación:
HGR NO 1
Canada 16801
Tijuana
Mexico

Reporte de Prueba y Verificación

Número de Caso: 0124843224

Orden de Servicio: WO-12073399

DETALLES DEL SERVICIO

Nombre del Ingeniero: Daniel Garcia

Estado del Equipo: Pass

Tipo de Evento: Predictive / Preventative Maintenance

Actividad de Servicio: Preventative Maintenance

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del Equipo: Affiniti 70 Ultrasound System

Código del Equipo: 795210

Número de Serie: US924F0850


Número de Equipo: 114967203

UDI: (01)00884838114180(21)US924F0850



	Min	Max	UoM	Resultado	Conclusión	Comentarios
Planned Maintenance						
System Information						
Software Version				10.0.15		
Hardware Version				B.0		
Inspection & Cleaning						
Query Customer Performance Issues				Pass		
Inspect Exterior Periph. & Power Cords.				Pass		
Inspect & Clean Trackball				Pass		
Inspect & Clean Monitor				Pass		
Inspect/Clean Control Panels & Keyboard				Pass		
Inspected and cleaned the transducer connector assembly (transducer and system side)?				No		
Footswitch, Key- & Remote Control Pad				Not Installed		
Inspect Casters & Brakes Operation				Not Applicable		
Clean/Check System Filters & Fans				Pass		
Check Articulation motion.(monitor, etc)				Pass		
Check System Battery				Pass		
Performance & Peripherals						
Execute Full Set of System Diagnostics				Pass		
Check, Download & Clear Logs				Pass		
Perform Hard-disk Maintenance				Pass		
Backup of System Settings and Configs.				Pass		
Check Operation All User Ctrls. & Lights				Pass		

	Min	Max	UoM	Resultado	Conclusión	Comentarios
Planned Maintenance						
Performance & Peripherals						
Check Operation of Major Applications					Pass	
Test Printers					Not Installed	
Check Operation Dig. Recording Devices					Not Applicable	
Philips Remote Service related Checks						
Is system connected to PRS (Philips Remote Service)?					Yes	
Automatic Export of Log File Configured					Yes	
System Safety General						
Protective Earth resistance (≤ 200 mOhm)	200		mOhm	0	Pass	
Earth Leakage Current. NC. Highest val. (≤ 500 μ A)	500		μ A	0	Pass	
Earth Leakage Current. SF. Highest val. (≤ 1000 μ A)	1000		μ A	0	Pass	
Touch Current 'Normal Condition' (≤ 100 μ A)	100		μ A	0	Pass	
Touch Current – Single fault condition (≤ 500 μ A) – Record higher value between Normal and Reverse	500		μ A	0	Pass	
Transducer Body - BF						
Transducer model					C9-4V	
Transducer serial number					FOLKX2	
Transducer Cables, Connectors & Lens					PASS	
Run Transducer Test					PASS	
Transducer Body - BF						
Transducer model					eL18-4	
Transducer serial number					FOHNDP	
Transducer Cables, Connectors & Lens					PASS	
Run Transducer Test					PASS	
Transducer Body - BF						
Transducer model					C5-1	
Transducer serial number					FOHQ5Y	
Transducer Cables, Connectors & Lens					PASS	
Run Transducer Test					PASS	
Transducer Body - BF						
Transducer model					V9-2	
Transducer serial number					FOGV2W	
Transducer Cables, Connectors & Lens					PASS	
Run Transducer Test					PASS	

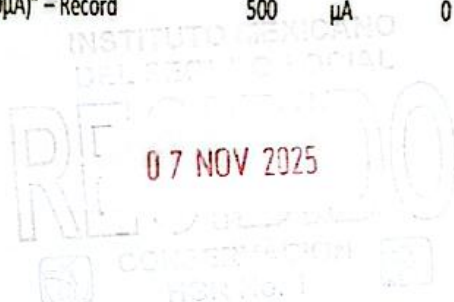

PHILIPS

Philips Representative Signature:

DA

Nombre del Ingeniero: Daniel Garcia

Fecha: Nov 7, 2025

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980



Página: 3 / 3
Orden de Servicio: WO-12073399

