

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
Antonio Dovalí Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe  
Del Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX  
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio  
Tel. 800 2000 111  
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM2275.5

15301876

WO-16760727

|                |                                      |          |                      |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Dependencia:   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Interno: | 19                   |
| OOAD / UMAE    | BAJA CALIFORNIA                      | Equipo:  | MAQUINA DE ANESTESIA |
| Unidad Médica: | HGR No. 1                            | Modelo:  | AVANCE CS2           |
| Localidad:     | TIJUANA                              | Serie:   | APKV01986            |
|                |                                      | SID GE:  | APKV01986            |

| Periodo de servicio                   |                 |      |             |      |
|---------------------------------------|-----------------|------|-------------|------|
| Tipo de Trabajo                       | Fecha de Inicio |      | Fecha Final |      |
|                                       | Día             | Hora | Día         | Hora |
| Mantenimiento planificado             | 22-jul-25       | 5:00 | 22-jul-25   | 8:00 |
|                                       |                 |      |             |      |
|                                       |                 |      |             |      |
|                                       |                 |      |             |      |
|                                       |                 |      |             |      |
| Fin del servicio: 22 de julio de 2025 |                 |      |             |      |
| DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO     |                 |      |             |      |

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, lubricación, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, de acuerdo a rutina de mantenimiento.

Servicio realizado de acuerdo a documento:

M1222131

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL  
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

CONSERVACION  
HGR No. 1

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

| Cant. | # Parte / Catálogo | Descripción     |
|-------|--------------------|-----------------|
| 1     | 4873474-S          | Par de baterías |
| 1     | 1009-5800-000      | Batería 3V      |
| 1     | 0211-1454-100      | Val CHECK       |
|       |                    |                 |
|       |                    |                 |
|       |                    |                 |

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Dr. Rogelio Marroquín Romero

Jefe de Área Fisiología

Mat. 1572416

Hospital General Regional

Matrícula 1

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González

Subjefe de Conservación

Matrícula No. 1


Mat. 98024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>





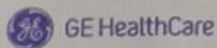

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio  
Tel. 800 2000 111  
Correo: [imss@gehealthcare.com](mailto:imss@gehealthcare.com)

Reporte fotográfico  
**MAM2275.5**

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

15301876

WO-16760727

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: APKV01986

Equipo: MAQUINA DE ANESTESIA

Modelo: AVANCE CS2

Serie: APKV01986

CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA

Unidad Médica: HGR No. 1

Localidad: TIJUANA


AN  
TE  
R  
S  
V  
I  
D  
C  
E  
I  
L  
O



D  
U  
R  
A  
N  
T  
E  
E  
L



D  
E  
S  
P  
U  
R  
É  
S  
D  
E  
L

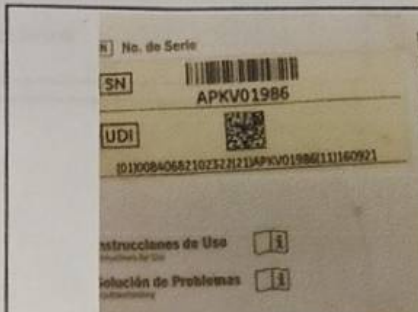

Observaciones

Clave Presupuestal  
**0205 0214 2902**  
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno  
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Dr. Rogelio MacGregor Romero  
Jefe de Anestesiología  
Mat. 11732416  
Hospital General Regional  
No. 1

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
Mat. 99024980

Jefe de conservación

Este compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

<http://ecso.gehealthcare.com/>



GE HealthCare

Fecha:

22-jul-25

## Rutina de Mantenimiento Preventivo

Contraportada del la bitácora del equipo

## Datos del Proveedor:

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
ANTONIO DOVALI JAIME 14 TORRE B PISO 4 COL. SANTA FE  
DEL ALVARO OBREGON CP 01210 MÉXICO DISTRITO FEDERAL  
Tel. 800 2000 111

No. De Contrato: 050GYR019N05125-011-00

No. De Proveedor: 35981

Equipo: MAQUINA DE ANESTESIA

Marca: GE HEALTHCARE

1. Inspección del sistema visual
2. Cables limpios
3. Bracos sujetos correctamente
4. Prueba de compensación completa
5. Prueba de torca mural Alta (95-105 PSI)
6. Prueba de torca mural Baja (95-105 PSI)
7. Pruebas en alfileres de gas
8. Flujo de oxígeno
9. Sistema de succión conectado
10. Límites ajustados y al mínimo nivel
11. Pruebas de desconexión de líneas
12. Indicador de nivel de batería
13. Señal de alarma
14. Luz de escape (rojo)
15. Limpieza de filtro de ventilador
16. Reemplazo de repuestos
17. Limpieza de filtro externo de entrada de AC
18. Revisión y limpieza de RBS
19. Desconexión de componentes. Sin flujos, manómetros
20. Desconexión de sistema respiratorio
21. Mantenimiento del Sistema de succión gases
22. Ajuste del flujo. Flujo no desciende en posición normal e inversa
23. Revisión de estado de sensores de flujo
24. Verificación de operación de sensores electrónicos y neumáticos
25. Revisión histórica de errores y alarmas
26. Pruebas y calibraciones del ventilador
27. Calibración del sensor  $\dot{V}_T$  (200L, 1200L)
28. Calibración a cero flujo y presión
29. Prueba en alfileres MDPV
30. Pruebas presión límite
31. Calibración manómetro
32. Calibración alfileres respiratorio
33. Calibración de presión en vías aéreas
34. Ajuste a cero en transductores
35. Ajuste a cero de mezclador
36. Pruebas en pantalla
37. Pruebas en LCDs
38. Pruebas en batería
39. Pruebas en batería
40. Pruebas en redes
41. Pruebas en LCD
42. Calibración de pantalla tactil
43. Pruebas de liberación de presión
44. Verificación liberación de presión
45. Pruebas de presión positiva de respirador
46. Pruebas en mezclador electrónico
47. Prueba de fuga de la válvula salida del mezclador
48. Verificación del mezclador:
49. 1200L  $\dot{V}_T$  a 15 L/min
50. 1200L Aire a 15 L/min
51. 1200L  $\dot{V}_T$  a 15 L/min
52. 1200L  $\dot{V}_T$  a 15 L/min
53. 1200L Aire a 15 L/min
54. 1200L  $\dot{V}_T$  a 15 L/min
55. Flujo alternativo  $\dot{V}_T$
56. Precisión los siguientes flujos:
57. 1 L/min
58. 3 L/min
59. 5 L/min
60. 10 L/min
61. Flujo máximo
62. Pruebas del suministro auxiliar
63. Ajuste flujo  $\dot{V}_T$  al mínimo
64. Ajuste flujo a 1 L/min
65. Ajuste flujo a 3 L/min
66. Ajuste flujo a 5 L/min
67. Ajuste flujo a 10 L/min
68. Ajuste flujo a máximo
69. Calibración de módulos de gases
70. Ajuste flujo  $\dot{V}_T$  a 15 L/min
71. Ajuste flujo  $\dot{V}_T$  a 15 L/min
72. Ajuste flujo  $\dot{V}_T$  a 15 L/min
73. Ajuste flujo AA/DES a 15 L/min
74. Pruebas de ventilación
75. Ajuste VT 400 ml R2 y PREP a 5
76. Flujo a 5 L/min
77. Flujo a 5 L/min
78. PREP
79. PREP
80. Pruebas de alarmas
81. Alarma de  $\dot{V}_T$  bajo en 50%
82. Alarma de  $\dot{V}_T$  alto en 50%
83. Alarma baja de VTA A6 (1min)
84. Fluido menor que presión pico
85. Reemplazo el pulsador de prueba
86. Coluya circuito ventilación manual APS A70
87. Revisión cable de alimentación
88. Reemplazo cable de alimentación
89. Pruebas de compensación completa
90. Ventilador y gas Flujo <250 ml
91. Pruebas de fuga circuito (1200 ml)
92. Pruebas de fuga baja presión
93. Pruebas de seguridad electrónica
94. Resistencia a tierra <0.2 ohms
95. Resistencia a tierra <0.2 ohms

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar GE Sistemas Médicos de México S.A. de C.V. por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>