

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Douali Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

Hoja de servicio
CMR1985.9

No. de folio

No. de caso

No. de WO

15837976

WO-17333216

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	794
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	TOMOGRFO
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	BRIGHTSPEED
Localidad:	TIJUANA	Serie:	664BRG1318573
		SID GE:	664BRG1318573

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	18-Aug-25	9:00	18-Aug-25	11:00
Reparación	19-Aug-25	14:00	19-Aug-25	15:00
Fin del servicio: 19 de agosto de 2025				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

De acuerdo a manual, se le recomienda a cliente que intente nuevamente la calibración diaria. La calibración pasa correctamente, con lo cual el cliente puede volver a trabajar. Se encuentra en el log de errores un error que hace referencia a una conexión suelta el dc bus. Se pide al cliente espacio para revisar dicha conexión. 19 de agosto, se encuentra conexión floja en TS2 de PDU. Se ajusta dicha conexión y se hacen tests con phantom. El equipo queda funcionando correctamente

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-06
GON	2450071

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Error de balance de gantry, error de DC BUS	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
		no aplica


Servicio realizado de acuerdo a documento:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Si ✓
Sí ✓

Observaciones

Equipo funcionando correctamente.

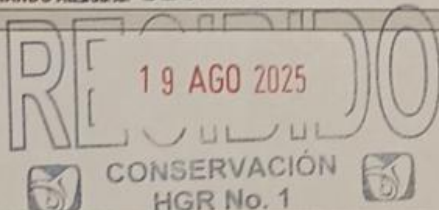

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		No. Orden / No. de GON
Cant.	# Parte / Catálogo	
na	no aplica	no aplica

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal:
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera

Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465

IMSS

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>