

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX  
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio  
Tel. 800 2000 111  
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

Hoja de servicio  
**EAVJ11115.12**

No. de caso

15303920

No. de WO

WO-17829767

|                       |                                      |                 |               |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>Dependencia:</b>   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | <b>Interno:</b> | 704           |
| <b>OOAD / UMAE</b>    | BAJA CALIFORNIA                      | <b>Equipo:</b>  | TOMOGRFO      |
| <b>Unidad Médica:</b> | HGR No. 1                            | <b>Modelo:</b>  | BRIGHTSPEED   |
| <b>Localidad:</b>     | TIJUANA                              | <b>Serie:</b>   | 664BRG1318573 |
|                       |                                      | <b>SID GE:</b>  | 664BRG1318573 |

| Periodo de servicio       |                         |       |             |       |
|---------------------------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Tipo de Trabajo           | Fecha de Inicio         |       | Fecha Final |       |
|                           | Día                     | Hora  | Día         | Hora  |
| Mantenimiento planificado | 11-Nov-25               | 12:00 | 11-Nov-25   | 18:00 |
|                           |                         |       |             |       |
|                           |                         |       |             |       |
| <b>Fin del servicio:</b>  | 11 de noviembre de 2025 |       |             |       |

| SERVICIO          |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Tipo de Servicio: | PM (Mantenimiento Preventivo) |
| Tipo de Trabajo:  | CONTRATO                      |
| Contrato No.      | 050GYR019M09125-011-00        |
| GON               | 2450071                       |

| SINTOMA                       |  |
|-------------------------------|--|
| 3er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |

| HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE) |           |                                      |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Calibración siguiente              | Serie     | Herramienta                          |
| 9/28/2026                          | 616078176 | ELECTRONIC TORQUE WRENCH 6.7-136 NM. |
| 5/25/2026                          | 25710203  | FLUKE 289 TRUE RMS                   |
|                                    |           |                                      |
|                                    |           |                                      |

**DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO**


SE HACE RUTINA DE MANTENIMIENTO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN GENERAL, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EQUIPO, PRUEBAS DE CALIDAD DE IMAGEN, REVISIÓN DE ERRORES, ACTUALIZACIÓN DE SYSTEM STATE. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5193755-800 | Revision 26

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO  
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

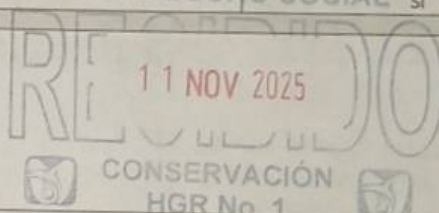

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

FUNCIONANDO

| Cant. | # Parte / Catálogo | Descripción | No. Orden / No. de GON |
|-------|--------------------|-------------|------------------------|
|       |                    |             |                        |
|       |                    |             |                        |
|       |                    |             |                        |
|       |                    |             |                        |

Sello de Unidad  
CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

Sello Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Edwin Alejandro Villavicencio Páezregu  
Nombre completo

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera  
Médico Radiólogo  
Nombre completo  
Ced. Esp. 11980592  
Mat. 98034465  
Cargo

Carlos Osvaldo Ramírez González  
Subjefe de Conservación  
Nombre completo  
Mat. 99024980  
Jefe de conservación

Ingeniero de Servicio

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

GE Healthcare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe  
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX  
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

No. De Folio

No. de CASE

No. de WO

Hoja de servicio

EV11115.12

15303920

WO-17829767

|                       |                 |         |               |
|-----------------------|-----------------|---------|---------------|
| Razon Social /Unidad: | HGR No. 1       | SID:    | 664BRG1318573 |
| Ciudad / Localidad:   | TIJUANA         | Cons.   | 82            |
| COAD/UMAE             | BAJA CALIFORNIA | Equipo: | TOMOGRAFO     |
| Dependencia:          | IMSS            | Modelo: | BRIGHTSPEED   |
| Dirección:            |                 | Serie:  | 664BRG1318573 |

| Periodo de servicio                       |                 |       |             |       |
|-------------------------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|
| Tipo de Trabajo                           | Fecha de Inicio |       | Fecha Final |       |
|                                           | Día             | Hora  | Día         | Hora  |
| Mantenimiento planificado                 | 11-Nov-25       | 12:00 | 11-Nov-25   | 18:00 |
|                                           |                 |       |             |       |
|                                           |                 |       |             |       |
|                                           |                 |       |             |       |
|                                           |                 |       |             |       |
| Fin del servicio: 11 de noviembre de 2025 |                 |       |             |       |

## DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

SE HACE RUTINA DE MANTENIMIENTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN GENERAL, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE EQUIPO, PRUEBAS DE CALIDAD DE IMAGEN, REVISIÓN DE ERRORES, ACTUALIZACIÓN DE SYSTEM STATE, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

| SERVICIO          |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Tipo de Servicio: | PM (Mantenimiento Preventivo) |
| Tipo de Trabajo:  | CONTRATO                      |
| Contrato No.      | 050GYR019N09125-011-00        |
| GON               | 2820300                       |

## SINTOMA

3er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO


## HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)

| Calibración siguiente | Serie     | Herramienta                          |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|
| 9/28/2025             | 616078176 | ELECTRONIC TORQUE WRENCH 6.7-136 NM. |
| 5/25/2026             | 25710203  | FLUKE 289 TRUE RMS                   |
|                       |           |                                      |
|                       |           |                                      |

Servicio realizado de acuerdo a documento: 5193755-800 | Revision 26

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO  
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

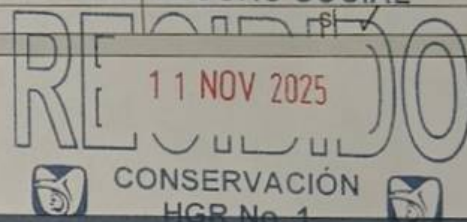INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

Reprogramación del Servicio:

N/A

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

| Cant. | # Parte / Catálogo | Descripción | No. Orden / No. de GON |
|-------|--------------------|-------------|------------------------|
|-------|--------------------|-------------|------------------------|

CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal  
0205-0214-2902  
H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Edwin Villavicencio  
Nombre completo

Nombre completo  
Dr. Jorge Tirado Duarte  
Médico Radiólogo  
Ced. Esp. 13140065  
Mat. 97207956  
Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Ing Carlos D. Rodríguez Grave  
Jefe Depto. de Conservación  
Hospital General Regional No 1  
Matrícula: 99024951

Jefe de conservación

uestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;  
<http://ecso.gehealthcare.com/>



GE HealthCare

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO  
11 NOV 2025

GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. ANTONIO  
DOVALI JAMES No. 70 TORRE B 4to. Piso COL. SANTA FE  
DELEGACION ALVARO OBREGON CP. 01210 CDMX

CONSERVACION  
HGR No. 1

CONSERVACION  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

FECHA

11 de noviembre de 2025

UNIDAD / HOSPITAL

HGR No. 1

LOCALIDAD

TIJUANA

EQUIPO

TOMOGRAFIA

MODELO

BRIGHTSPEED

SERIE

664BRG1318573

A  
N  
T  
E  
S



D  
U  
R  
A  
N  
T  
E



D  
E  
S  
P  
U  
E  
S



Edwin Villavicencio



Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

Usuario

Dr. Jorge Tirado Duarte



Médico Radiólogo

Ced. Esp. 13140065

Mat. 97207956

Responsable del área de  
Conservación

Ing Carlos D. Rodríguez Grave



Jefe Depto de Conservación

Hospital General Regional No 1

Matricula 99024951

INSTITUTO MEXICANO  
DE TOMOGRAFÍA  
DEL SEGURO SOCIAL

11 NOV 2025

System I.D.: 664BRG1318573

Salas:  CONSERVACION  
HGR No. 1

Modelo: BRIGHTSPEED

Número total de mAs: 1200907837 Número de revoluciones: 389834 Número de pacientes: 12363

☐ Mensual ☐ Bimestral ☒ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual

**Inspección y Certificación:**

**Forma:**

## Software

**En Rango:**

[illegible]

**Valor:**

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>Agua</b> | <b>Aire</b> |
|-------------|-------------|

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

1. Limpieza del mylar
2. Limpieza de cubiertas del gantry
3. Verificación de luces de alineación
4. Verificación de anclaje / aislamiento del gantry
5. Engrasado de baleros
6. Verificación de tensión de bandas
7. Inspección y limpieza de anillos (slip ring)
8. Inspección y limpieza de escobillas
9. Inspección del transmisor / receptor (antena) de RF
10. Torque de componentes del gantry

| Si | No | N/A | Observaciones |
|----|----|-----|---------------|
|----|----|-----|---------------|

[illegible][illegible]

1. Limpieza y verificación del detector
2. Verificación del funcionamiento de ventiladores
3. Limpieza de filtros

[illegible]

|                                     |                          |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

---

---

Edwin Villavicencio  
Ingeniero de Servicio

Ing Carlos D. Rodríguez Grave  
Jefe Depto. de Conservación  
Hospital General Regional No 1  
Matricula 99024951

# MANTENIMIENTOS A EQUIPOS DE TOMOGRAFIA

INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO  
11 NOV 2025



CONSERVACIÓN  
HGR No. 1



## Generador de RX

1. Verificación / Limpieza de ventiladores del radiador
2. Cambio de aceite de alta tensión en terminales de tubo
3. Cambio de aceite de alta tensión en terminales de tanques
4. Verificación de Kv y de mA
5. Inspección de cables de alta tensión
6. Torque de tornillos y tuercas en sistema de RX

| SI                                  | No                       | N/A                      | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |

## Mesa de paciente

1. Verificación / Limpieza de cubiertas
2. Verificación / Limpieza de rieles
3. Verificación de que no existan fugas de aceite
4. Verificación de anclajes / Aislamiento de la mesa
5. Verificación de la función de liberación de la mesa

| SI                                  | No                       | N/A                      | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |

CONSERVACIÓN  
H.G.R. No. 1  
TIJUANA, B.C.

## Consola de operador

1. Verificación de ventiladores
2. Limpieza de filtros de aire
3. Verificación de la operación correcta del Mouse
4. Limpieza de monitores / exterior de la consola
5. Verificación de cables / Terminales de cables de poder
6. Verificación de funciones de audio

| SI                                  | No                       | N/A                      | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

## Sistema

1. Verificación de paros de emergencia (Gantry / Consola / PDU)
2. Verificación de luz de aviso
3. Operación del botón de abortar estudio
4. Verificación de etiquetas de advertencia
5. Verificación de archivos de errores
6. Comunicación HIS/RIS
7. Comunicación PACS
8. Comunicación AW

| SI                                  | No                       | N/A                      | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |

## Unidad de distribución de poder (PDU)

1. Verificación de terminales de cables
2. Verificación voltaje de alimentación

| SI                                  | No                       | N/A                      | Observaciones |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |

## Comentarios:

El equipo queda operativamente  
apto para realizar el trabajo para  
lo que fue diseñado.  
Funcionando al 100%

Edwin Villavicencio,  
Ingeniero de Servicio

Nombre y firma  
Ing. de G. E.



Ing Carlos D. Rodríguez Grave  
Jefe Depto de Conservación  
Hospital General Regional No 1  
Matrícula 99024951

Nombre y firma  
Cliente