



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

Hoja de servicio

JAC2116.11

No. de caso

16824007

No. de WO

WO-18362498

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1490
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	OEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	OEC820745
		SID GE:	OEC820745

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	13-ene-26	11:00	13-ene-25	16:15
Reparación	21-ene-26	12:00	21-ene-26	17:15
Fin del servicio: 21 de enero de 2026				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se encuentra el equipo con un error de alta tensión. Se verifica el fusible de la tarjeta Snubber encontrándose abierto. Se reemplaza tubo de Rx y tanque. Tarjeta Snubber. Se realiza calibración de filamentos. Se realizan pruebas de disparo y calidad de imagen. El equipo queda funcionando correctamente.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Si ☒
No ☒

RECORDO
21 ENE 2026



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Cant.		# Parte / Catálogo	Kit y refacciones utilizadas en el servicio		Descripción		No. Orden / No. de GON	
1		00-879056-04	PCB ASM, SYSTEM INTE				107933905	
1		5485305	SERVICE PART, TUBE,				107954148	
1		5654164	HIGH VOLTAGE TANK, S				107954148	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
Sello Clave Presupuestal
2002-02-14-2002

HGR No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Dr. Rogelio Marroquín Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 11532416
Hospital General Regional
No. 1

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Juan Alejandro Cervantes


Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

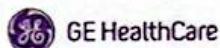

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico

JAC2116.11

No. de caso

16824007

No. de WO

WO-18362498

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

SID GE:	OEC820745
Equipo:	ARCO EN C
Modelo:	OEC 9800
Serie:	OEC820745


AN
TE
R
S
V
I
D
E
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L

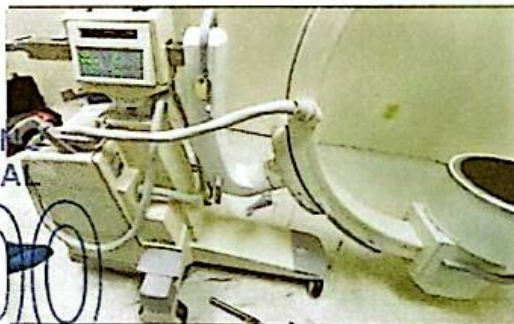

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

21 ENE 2026



Observaciones
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Juan Alejandro Cervantes
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Calderón, Juan Rodríguez González
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99014980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>