

72003367

CON: 2

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83903
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1		CORRECTIVO: ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6646270063		GARANTÍA DE VENTA: ☐ REPARACIÓN ☐ SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 05001801800125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16001 COLONIA RIO TIJUANA BERA ETAPA, C.P. 22206, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		CAPACITACIÓN: ☒	
ATENCIÓN: INS. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ		SUMINISTROS DE: ☐	
CARGO: SUBJE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO ☒		EN SITIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: ACUTRONIC	MODELO: FABIAN HFO	NO. SERIE: AH-02024
NO. INVENTARIO: 201900002539	SOFTWARE: 3.3	UBICACIÓN FÍSICA: UCIN	
HORAS DE USO EQUIPO: 9320	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA	EQUIPO COMPLEMENTARIO		
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSISTORES, PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, REVISIÓN Y CENTRADO DE PISTÓN (EN CASO DE SER NECESARIO), PRUEBAS DE OVP Y SERVICIO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
NÚMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BB105028 ; PA-18, 5579063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 HGR No. 1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:		FIRMA:	
FIRMA: 07-07-25		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramírez González	
NOMBRE COMPLETO: Dayan Monarez Valencia		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González	
PUESTO: Enfermera Jefa de Nio		PUESTO: Subje de Conservación	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 07/07/25		FECHA: 07-07-25	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: <u>07-07-25</u>		FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003367</u>	
VENTILADOR PULMONAR		NÚMERO DE SERIE: <u>AH-02024</u>	
MODELO FABIAN HFO			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ		
	V/x	MEDICIÓN	
1. REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:			
ESTRUCTURA GENERAL DEL EQUIPO	/		
CARCASA SIN ROTURAS O DAÑOS	/		
CABLES SIN DAÑOS	/		
CHECAR TODOS LOS CONECTORES	/		
MEMBRANA Y VÁLVULA DE EXPIRACIÓN CORRECTAMENTE MONTADA	/		
2. ARRANQUE			
PRENDER EL EQUIPO	/		
PANTALLA LCD (MENOS DE 3 PÍXELES SIN FUNCIONAR)	/		
PASA EL SELF TEST	/		
SUENA LA ALARMA (2 VECES AL INICAR)	/		
LED ROJO DE ALARMA PARPADEA 2 VECES AL INICIO	/		
DESCONECTAR CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		
7 JUL 2025 SONIDO DE ALARMA ACTIVADO (ALARMA DE POWER FAIL)	/		
LED NARANJA ENCENDIDO (MODO BATERÍA)	/		
CONECTAR CABLE DE ALIMENTACIÓN	/		
CONSERVACIÓN HGR No. 1 SONIDO DE ALARMA DESACTIVADO	/		
LED NARANJA APAGADO (DESACTIVADO MODO BATERÍA)	/		
3. FUNCIONALIDAD DE BLENDER / PURGA (AIRE AL ESTÁNDAR 20/ 1013)			
PRENDER EL EQUIPO	/		
BLENDER NO FUGA, NO HAY FLUJO SALIENDO DEL PUERTO INSPIRATORIO	/		
CHECAR LA HERMETICIDAD DE LA VÁLVULA DE CALIBRACIÓN (NO HAY FUGA EN LA MANGUERA QUE VA A LA CELDA DE O2)	/		
PRENDER EL EQUIPO EN MODO IPPV CON PARÁMETROS ENCONTRADOS EN EL TEST INSTRUCTION SECCIÓN 4.3	/		
FLUJO DE PURGA DEBE SER ENTRE 150 Y 350 ML/MIN	/	220	
4. CALIBRACIÓN (UNA VEZ AL AÑO)			
CONECTAR AIRE EN LA TOMA DE AIRE Y DE OXÍGENO	/		
COLOCAR HORA Y FECHA CORRECTAS	/		
PRENDER EL EQUIPO EN MODO O2 THERAPY O IPPV (3L/MIN) Y COLOCAR OXÍGENO AL 60%	/		
VALOR DE PRESIÓN DE AIRE EN MONITOR PIC DEBE SER 2400 ±200	/	2420	
VALOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO EN MONITOR PIC DEBE SER 2400 ±201	/	2430	
REINICAR EL EQUIPO CONECTAR AIRE EN LA TOMA DE AIRE Y DE OXÍGENO PROGRAMAR LOS PRÁMETROS COMO LO INDICA EL TEST INSTRUCTION SECCIÓN 5.3	/		
MEDIR VÁLVULA DE AIRE VALOR ESPERADO 9.5 ±0.1 L/min REPETIR 3 VECES LA MEDICIÓN REINICIANDO EL EQUIPO ENTRE CADA MEDICIÓN, CALIBRAR SI ES NECESARIO	/	9.5	
MEDIR VÁLVULA DE OXÍGENO VALOR ESPERADO 9.5 ±0.1 L/min REPETIR 3 VECES LA MEDICIÓN REINICIANDO EL EQUIPO ENTRE CADA MEDICIÓN, CALIBRAR SI ES NECESARIO	/	9.6	



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

REINICIAR EL EQUIPO CONECTANDO AIRE Y OXIGENO RESPECTIVAMENTE

DESCONECTAR TUBO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DEL MANIFOLD, VALOR DE PRESIÓN INSPIRATORIA 1480±10 PARA HW 1-3 Y 1095±10 PARA HW 4, AJUSTAR SI ES NECESARIO

1480

APLICAR 60 mbar AL TUBO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DESCONECTADO DEL MANIFOLD, VALOR DE PRESIÓN INSPIRATORIA, DEBE SER 2940±10 PARA HW 1-3 Y 2255±10 PARA HW 4, AJUSTAR SI ES NECESARIO

2945

CALIBRAR 0mbar EN MENÚ DE CALIBRACIÓN

APLICAR 60 mbar EN PUERTO PROXIMAL, CALIBRAR 60mbar en MENÚ DE CALIBRACIÓN

CALIBRACIÓN DE TOUCHSCREEN

CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN

VÁLVULA DE SEGURIDAD DEBE ABRIR ENTRE 450 A 600 mbar, SI NO SE ABRE CALIBRAR

CALIBRACIÓN DE CELDA DE OXIGENO (21% Y 100%)

CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

PROGRAMAR

CONSERVACIÓN

BORR: N° 1
TIJUANA, B.C.

I-FLW= 1 l/min

PEEP= 0mbar

Frecuencia= 30 bpm

E-FLW= 5 l/min

PINSP= 10mbar

I-TIME= 1 seg

PROGRAMADO

MEDIDO EN VENTILADOR

MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO

PASA /FALLA

P INSP (mbar)	PEEP	PIP ±1	P MEAN	PEEP ±1	PIP ±1	P MEAN	PEEP ±1	PASA /FALLA
10	0	10	5	1	9.9	4.8	0.4	/
60	0	60	25.1	1	59.5	24.4	0.5	/
30	5	30	15.0	5.1	29.9	14.8	5.0	/

CHEQUEO DE TRIGGER

CHEQUEO BLENDER

PROGRAMADO

MEDIDO EN VENTILADOR

MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO

TOLERANCIA

PASA /FALLA

FIO2	FIO2	FIO2	TOLERANCIA	PASA /FALLA
21%	21	21.1	± 3 %	/
40%	40	40.3	± 3 %	/
60%	60	60.1	± 3 %	/
100%	100	100	± 3 %	/

CHEQUEO DE VOLUMEN GARANTIZADO *

PROGRAMADO

MEDIDO EN VENTILADOR

MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO

TOLERANCIA

VG	FIO2	VTE	VTE	TOLERANCIA
5	21%	5	5	± 0.5 ml
5	100%	5	5	± 0.5 ml
10	21%	10	10	± 0.5 ml
10	100%	10	10	± 0.5 ml

HFO *

PROGRAMADO

MEDIDO EN EL EQUIPO

MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO COMPARADO CON EL EQUIPO

PASA /FALLA

AMPL (mbar)	P mean (mbar)	Frec (Hz)	P mean (mbar ±1)	Frec (Hz ±10%)	P mean (mbar ±1.5)	Frec (Hz ±10%)	PASA /FALLA
10	10	5	10	5	10	6	/
40	20	10	20	11	20	10	/
10	10	20	11	21	10	20	/
60	40	20	40	21	41	20	/

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

MODO CPAP								PASA /FALLA		
PROGRAMADO	MEDIDO EN EL EQUIPO			MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO						
CPAP	P mean (mbar ± 1)			P mean (mbar ± 1)						
5	5.2			5.3			/			
10	10			10			/			
MODO DUOPAP *										
PROGRAMADO	MEDIDO EN EL EQUIPO			MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO			PASA /FALLA			
CPAP	P-DUO	P Peak ± 1	P Mean	PEEP ± 1	P Peak ± 1	P Mean ± 1		PEEP ± 1		
3	8	1	0.7	0.6	2.7	1.5	1	/		
5	10	1.1	0.5	0.3	3	1.3	1.2	/		
10	15	1	1.7	0.9	3.4	1.7	1.3	/		
CHEQUEO DE HERRAMIENTA DE SPO2 *								/		
CHEQUEO DE HERRAMIENTA DE eTCO2 *								/		
ALARMAS DE PACIENTE								/		
FUGA EN RAMAS Y APNEA								/		
REVISIÓN DE TUBO ET								/		
ALTA PRESIÓN								/		
ALARMAS DEL SISTEMA								/		
PRESIÓN DE SUMINISTRO DE OXÍGENO (PARPADEANDO EN ROJO)								/		
PRESIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE (PARPADEANDO EN ROJO)								/		
OCCLUSIÓN DEL TUBO								/		
PACIENTE DESCONECTADO								/		
INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO*								/		
REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA								/		
CORRIENTE DE FUGAS		/	0.1 μA	VOLTAJE DE LINEA		/	172 V	RESISTENCIA A TIERRA	/	0.8 Ω
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.								/		
CALIBRACIÓN DE BATERÍA								/		

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCIÓN NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

2007-07-25
Dayan Manarrez Valencia
REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

Lic. Enl. Valeria Pacheco
Mat. 11873837

Enfermera Jefa de Piso
07/07/25

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)



**CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.**

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	AH-02024	ORDEN DE SERVICIO:	72003367 CONS: 2


ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1

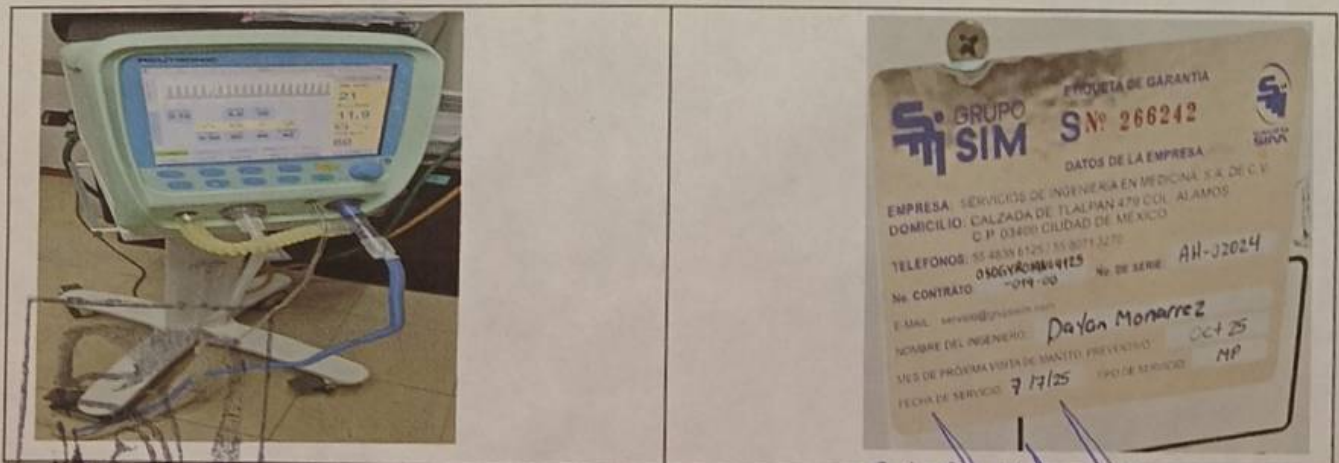

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzales
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 090210

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

07-07-25

CONSERVACIÓN
 SELECCIÓN MÉDICA
 TIJUANA, B.C.