

72003377

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83913
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1		CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO: ☐ USUARIO: ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO: ☐ REFACCIÓN: ☐ SERVICIO: ☐	
TEL: 6646270963		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO: ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		CAPACITACIÓN: ☒	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐ EN SITIO: ☐	
REPORTÓ FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5631	NO. SERIE: 3079
INSTITUTO MEXICANO			
NO. INVENTARIO: 2020 00005230	SOFTWARE: 05126 SEGURO SOC	UBICACIÓN FÍSICA: Anexo	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: NA	EQUIPO COMPLEMENTARIO: JUL 2025		
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063; PA-19, 00140, Número de Serie Real del Equipo: 03079.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%, EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:		FIRMA:	
07-07-25		Parra Urias Ramón Alberto	
NOMBRE COMPLETO: Dayan Monarrez Valencia		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González	
NOMBRE COMPLETO: IMSS		NOMBRE COMPLETO: H.G.R. No. 1	
PUESTO: Mat. 99025047		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 07/07/25		FECHA: 07-07-25	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE BIOMÉDICA	

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003377

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3079

REALIZÓ

✓/x


MEDICIÓN

DESCRIPCION DEL SERVICIO

1.	APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO		
	El desfibrilador no está sucio.	/	
	El desfibrilador no está agrietado o dañado.	/	
	No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)	/	
	No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.	/	
	Sangre o quimica sobre el desfibrilador se limpia.	/	
2.	APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION		
	Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.	/	
	Las partes metálicas del conector no se deforman.	/	
	No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.	/	
	Compruebe que la tierra de protección no está rota.	/	
3.	PALAS EXTERNAS		
	Las palas externas no están rotos.	/	
4.	APARIENCIA DE ACCESORIOS		
	Los conectores no están dañados o agrietados.	/	
	Adaptador Pad no ha caducado.	/	
5.	APARIENCIA DE LA BATERIA		
	No hay daños o grietas y sin etiquetas retiradas o desgarradas	/	
	La batería no ha caducado.	/	
6.	TEST DE BATERIA		
	Realizar el test de la batería.	/	
7.	ENCENDIDO		
	El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.	/	
8.	SONIDO DE SINCRONIZACION		
	QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.	/	
9.	IMPRESORA		
	La impresora funciona correctamente.	/	
	Fecha y hora de impresión son correcta.	/	
	La impresión de eventos se puede realizar correctamente.	/	
	No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.	/	
	Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm	/	23.5 mm
	La falta de papel se detecta correctamente.	/	
10.	DESCONEXION DE CONECTOR		
	Se detecta correctamente la desconexión de un conector	/	
11.	TIEMPO DE CARGA		
	La carga ha finalizado dentro del periodo de tiempo especificado.	/	5 seg
12.	FORMA DE ONDA		
	La desfibrilación se realiza correctamente.	/	
	La forma de onda de la energía descargada es bifásica.	/	
13.	ENERGIA DESCARGADA		
	Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	/	2 J
		/	3 J
		/	5 J
		/	7 J

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
7 JUL 2025
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

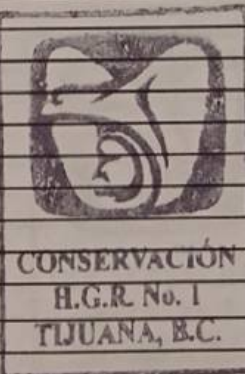

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003377

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3079

DESCRIPCION DEL SERVICIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO	REALIZÓ	MEDICIÓN
10 J	/	10 J
15 J	/	15 J
20 J	/	20 J
30 J	/	30 J
50 J	/	50 J
70 J	/	70 J
100 J	/	100 J
150 J	/	150 J
200 J	/	200 J
270 J	/	270 J

Funcionamiento con la batería 270 J

14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES

La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J

15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS

2 J	/	2 J
3 J	/	3 J
5 J	/	5 J
7 J	/	7 J
10 J	/	10 J
15 J	/	15 J
20 J	/	20 J
30 J	/	30 J
50 J	/	50 J

16. CAMBIO DE LA ENERGIA

La energía cargada se puede cambiar

17. DESCARGA INTERNA

La descarga interna se lleva a cabo correctamente.

18. CARDIOVERSION DESDE PALAS

La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.

19. CARDIOVERSION DESDE ECG

La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.

20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA

La FV se detecta correctamente.

La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.

La desfibrilación se realiza correctamente.

21. PANTALLA AED

Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.

22. VOZ AED

El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.

23. MARCAPASOS FIJO

El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.

24. MARCAPASOS A DEMANDA

El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente

25. SALIDA DE MARCAPASOS

La salida de estimulación por marcapasos es correcta.



NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Juan Osvaldo Ramírez
Subjefe de Cons.
H.G.R. No. 1
07-07-25

FECHA: 07-07-25 FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003377
DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631 NUMERO DE SERIE: 3079

DESCRIPCION DEL SERVICIO				REALIZÓ	MEDICIÓN	
26.	MONITORIZACION DE ECG					
	La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente. HR: 60			✓	60 bpm	
	La sensibilidad de la onda ECG es correcta.			✓		
	Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG			✓		
27.	MONITORIZACION DE CO2					
	La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.			X	mmHg	
	La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.			X		
	Precisión en la medición del sensor de CO2.			X		
28.	MONITORIZACION DE SpO2					
	Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.	97% SpO2: 95-99% SpO2	✓	97	%	
		80% SpO2: 78-92% SpO2	✓	80	%	
		70% SpO2: 66-74% SpO2	✓	70	%	
		60 bpm SpO2: 55-65% bpm	✓	60	bpm	
	Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.			✓		
29.	MONITORIZACION DE NIBP					
	Adulto e Infante	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	✓			
		Medición y pantalla de NIBP correctas.	✓			
		La medición manual de NIBP se realiza correctamente	✓			
	Neonato	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	✓			
		Medición y pantalla de NIBP correctas.	✓			
		La medición manual de NIBP se realiza correctamente	✓			
30.	MONITORIZACION DE TEMPERATURA					
	La precisión de visualización para la temperatura se confirma.			✓		
	La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.			✓		
	La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.			✓		
31.	MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG					
	Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.			✓		
	La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.			✓		
32.	SEGURIDAD ELECTRICA					
	Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)	Condición normal $\leq 10\mu A$	10 μA
		Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA		Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$	50 μA
	Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo CF, DC)	Condición normal $\leq 10\mu A$	10 μA
		Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA		Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$	50 μA
	Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *	Condición normal	0.1 μA			
		Condición 1ra falla	0.1 μA			
33.	CARGADOR DE BATERIA SB-831V					
	El cargador de baterías no está sucio.			✓		
	Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.			✓		
	Sin etiquetas retiradas o rasgadas.			✓		
	El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.			✓		

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003377</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>3079</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.		✓	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.		✓	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.		✓	
La operación en el encendido es correcta.		✓	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.		✓	
34. SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	<u>500</u> μA	Condición normal $\leq 100\mu A$ <u>100</u> μA
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	<u>1</u> mA	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$ <u>500</u> μA
Corriente de fuga a chasis			
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS			

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

<u>07-07-25</u> <u>Dayan Monerree Valencia</u> REALIZÓ EL SERVICIO NOMBRE Y FIRMA		<u>Parra Uribe Ramón Alberto</u> Sujeta de Enfermería Mat. 99025047 USUARIO DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)	<u>Carlos Oswaldo Ramírez González</u> Sujeto de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat 99024027 JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA NOMBRE Y FIRMA NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)
--	--	---	---

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
7 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **3079** ORDEN DE SERVICIO: 72003377 CONS: 566

ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

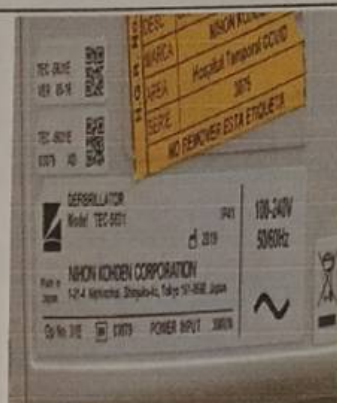

DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECORDADO
 7 JUL 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1




CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.



Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA

07-07-25