

72003378

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83914
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		PREDICTIVO ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		REFACCIÓN ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		ASESORÍA: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		CAPACITACIÓN: ☒	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		SUMINISTROS DE: ☐	
REPORTÓ FALLA: N/A		REFACCIONES: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		LUGAR DE SERVICIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EN SITIO: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5631	NO. SERIE: 3080
NO. INVENTARIO: 202000005231	SOFTWARE: 05-16	UBICACIÓN FÍSICA: Sala de Choque	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: NA	EQUIPO COMPLEMENTARIO		
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA. PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
D/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063 : PA-19, 00140. Número de Serie Real del Equipo: 03080.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	
Bracamontes Rodríguez Mtra. Clematina Jefe de Piso Enfermería	Bracamontes E. Hana		
NOMBRE COMPLETO: 07/07/25	NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	NOMBRE COMPLETO:	
PUESTO: Mtra. Bracamontes	PUESTO: Subjefe de Conservación	PUESTO:	
NO. DE MATRÍCULA: R. María C.	NO. DE MATRÍCULA: H.G.R. No. 1	NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA: 07-07-25	FECHA: 16/05/25	FECHA:	
USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA	
REALIZÓ EL SERVICIO			

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003378

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3080

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
1.	APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO			
	El desfibrilador no está sucio.		/	
	El desfibrilador no está agrietado o dañado.		/	
	No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)	Clave Presupuestal	/	
	No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.	0205 0214 2902	/	
	Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.	H.G.R. No.1	/	
2.	APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION			
	Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		/	
	Las partes metálicas del conector no se deforman.		/	
	No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		/	
	Compruebe que la tierra de protección no está rota.		/	
3.	PALAS EXTERNAS			
	Las palas externas no están rotos.		/	
4.	APARIENCIA DE ACCESORIOS			
	Los conectores no están dañados o agrietados.		/	
	Adaptador Pad no ha caducado.		/	
5.	APARIENCIA DE LA BATERIA			
	No hay daños o grietas y sin etiquetas retiradas o desgarradas.		/	
	La batería no ha caducado.		/	
6.	TEST DE BATERIA			
	Realizar el test de la batería.		/	
7.	ENCENDIDO			
	El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		/	
8.	SONIDO DE SINCRONIZACION			
	QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		/	
9.	IMPRESORA			
	La impresora funciona correctamente.		/	
	Fecha y hora de impresión son correcta.		/	
	La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		/	
	No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		/	
	Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm		/	25.5 mm
	La falta de papel se detecta correctamente.		/	
10.	DESCONEXION DE CONECTOR			
	Se detecta correctamente la desconexión de un conector		/	
11.	TIEMPO DE CARGA			
	La carga ha finalizado dentro del periodo de tiempo especificado.		/	5 seg
12.	FORMA DE ONDA			
	La desfibrilación se realiza correctamente.		/	
	La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		/	
13.	ENERGIA DESCARGADA			
	Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	2 J	/	2 J
		3 J	/	3 J
		5 J	/	5 J
		7 J	/	7 J

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
7 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

07-07-25

H.G.R. No.1
0214 2902

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003378

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 3080

			REALIZÓ	
DESCRIPCION DEL SERVICIO			✓/x	MEDICIÓN
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
	70 J		/	70 J
	100 J		/	100 J
	150 J		/	150 J
	200 J		/	200 J
	270 J		/	270 J
Funcionamiento con la batería 270 J			/	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES				
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			/	270 J
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS				
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		/	2 J
	3 J		/	3 J
	5 J		/	5 J
	7 J		/	7 J
	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
16. CAMBIO DE LA ENERGIA				
La energía cargada se puede cambiar			/	
17. DESCARGA INTERNA				
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			/	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS				
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			/	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG				
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			/	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA				
La FV se detecta correctamente.			/	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			/	
La desfibrilación se realiza correctamente.			/	
21. PANTALLA AED				
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			/	
22. VOZ AED				
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			/	
23. MARCAPASOS FIJO				
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.			/	
24. MARCAPASOS A DEMANDA				
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente			/	
25. SALIDA DE MARCAPASOS				
La salida de estimulación por marcapasos es correcta.			/	100 mA

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECORDADO
7 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

2 de 4

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MSS Mat 99024980
07-07-25

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003378</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>3080</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
26. MONITORIZACION DE ECG			
La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente.		/	60 bpm
HR: 60		/	
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.		/	
Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG		/	
27. MONITORIZACION DE CO2			
La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.		x	mmHg
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.		x	
Precisión en la medición del sensor de CO2.		x	
28. MONITORIZACION DE SpO2			
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.	97% SpO2: 95-99% SpO2	/	97 %
	80% SpO2: 78-92% SpO2	/	80 %
	70% SpO2: 66-74% SpO2	/	70 %
	60 bpm SpO2: 55-65% bpm	/	60 bpm
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.		/	
29. MONITORIZACION DE NIBP			
Adulto e Infante	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente	/	
Neonato	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente	/	
30. MONITORIZACION DE TEMPERATURA			
La precisión de visualización para la temperatura se confirma.		/	
La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.		/	
La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.		/	
31. MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG			
Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.		/	
La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.		/	
32. SEGURIDAD ELECTRICA			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	Condición normal $\leq 10\mu A$
Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA	Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$
	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA	Condición normal $\leq 10\mu A$
Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *	Condición normal	0.1 μA	Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$
	Condición 1ra falla	0.1 μA	



33. CARGADOR DE BATERIA SB-831V		
El cargador de baterías no está sucio.	/	
Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.	/	
Sin etiquetas retiradas o rasgadas.	/	
El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.	/	

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003378</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>3080</u>

				REALIZÓ	
DESCRIPCION DEL SERVICIO				√/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.				√	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.				√	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.				√	
La operación en el encendido es correcta.				√	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.				√	
34. SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR					
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA		Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS				√	√

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

07-07-25
REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

07/07/25
USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

07-07-25
JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

RECIBIDO
7 JUL 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: 3080 ORDEN DE SERVICIO: 72003378 CONS: 567


ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1

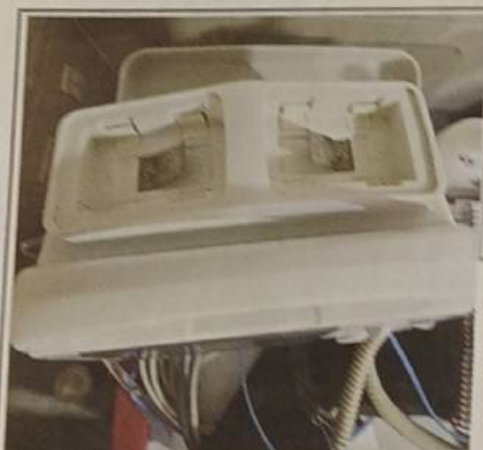

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

7 JUL 2025

CONSERVACION
HGR No. 1



DESPUÉS 1

