

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO: <u>72003379</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>1341</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
1. APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO			
El desfibrilador no está sucio.		✓	
El desfibrilador no está agrietado o dañado.		✓	
No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)		✓	
No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.		✓	
Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.		✓	
2. APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION			
Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		✓	
Las partes metálicas del conector no se deforman.		✓	
No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		✓	
Compruebe que la tierra de protección no está rota.		✓	
3. PALAS EXTERNAS			
Las palas externas no están rotos.		✓	
4. APARIENCIA DE ACCESORIOS			
Los conectores no están dañados o agrietados.		✓	
Adaptador Pad no ha caducado.		✓	
5. APARIENCIA DE LA BATERIA			
No hay daños o grietas y sin etiquetas retiradas o desgarradas		✓	
La batería no ha caducado.		✓	
6. TEST DE BATERIA			
Realizar el test de la batería.		✓	
7. ENCENDIDO			
El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		✓	
8. SONIDO DE SINCRONIZACION			
QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		✓	
9. IMPRESORA			
La impresora funciona correctamente.		✓	
Fecha y hora de impresión son correcta.		✓	
La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		✓	
No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		✓	
Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm		✓	24.5 mm
La falta de papel se detecta correctamente.		✓	
10. DESCONEXION DE CONECTOR			
Se detecta correctamente la desconexión de un conector		✓	
11. TIEMPO DE CARGA			
La carga ha finalizado dentro del período de tiempo especificado.		✓	5 seg
12. FORMA DE ONDA			
La desfibrilación se realiza correctamente.		✓	
La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		✓	
13. ENERGIA DESCARGADA			
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas	2 J	✓	2 J
es correcta operación AC	3 J	✓	3 J
	5 J	✓	5 J
	7 J	✓	7 J

FECHA: 07-07-25 FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72603379
DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631 NUMERO DE SERIE: 1341

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	10 J	INSTITUTO MEXICANO DEL SERVICIO SOCIAL RECIBIDO 7 JUL 2025 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1	/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
	70 J		/	70 J
	100 J		/	100 J
	150 J		/	150 J
	200 J		/	200 J
270 J	/	270 J		
Funcionamiento con la batería 270 J			/	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES				
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			/	270 J
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS				
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		/	2 J
	3 J		/	3 J
	5 J		/	5 J
	7 J		/	7 J
	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
16. CAMBIO DE LA ENERGIA				
La energía cargada se puede cambiar			/	
17. DESCARGA INTERNA				
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			/	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS				
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			/	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG				
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			/	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA				
La FV se detecta correctamente.			/	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			/	
La desfibrilación se realiza correctamente.			/	
21. PANTALLA AED				
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			/	
22. VOZ AED				
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			/	
23. MARCAPASOS FIJO				
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.			/	
24. MARCAPASOS A DEMANDA				
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente			/	
25. SALIDA DE MARCAPASOS				
La salida de estimulación por marcapasos es correcta.			/	100 mA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003379</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>1341</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
26. MONITORIZACION DE ECG			
La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente.		/	60 bpm
HR: 60		/	
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.		/	
Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG		/	
27. MONITORIZACION DE CO2			
La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.		x	mmHg
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.		x	
Precisión en la medición del sensor de CO2.		x	
28. MONITORIZACION DE SpO2			
97% SpO2: 95-99% SpO2		/	97 %
80% SpO2: 78-92% SpO2		/	80 %
70% SpO2: 66-74% SpO2		/	70 %
60 bpm SpO2: 55-65% bpm		/	60 bpm
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.		/	
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.		/	
29. MONITORIZACION DE NIBP			
Adulto e infante	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente	/	
Neonato	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	/	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	/	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente	/	
30. MONITORIZACION DE TEMPERATURA			
La precisión de visualización para la temperatura se confirma.		/	
La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.		/	
La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.		/	
31. MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG			
Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.		/	
La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.		/	
32. SEGURIDAD ELECTRICA			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	
Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo CF, DC)
	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA	
Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *	Condición normal	0.1 μA	
	Condición 1ra falla	0.1 μA	

33. CARGADOR DE BATERIA SB-831V		
El cargador de baterías no está sucio.	/	
Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.	/	
Sin etiquetas retiradas o rasgadas.	/	
El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 09028080
07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003379</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>1341</u>


DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.		✓	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.		✓	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.		✓	
La operación en el encendido es correcta.		✓	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.		✓	
34. SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Condición normal $\leq 100\mu A$
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$
			100 μA
			500 μA
6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS		✓	✓

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

<u>07-07-25</u> <u>Dayan Monarrez Valencia</u> REALIZÓ EL SERVICIO NOMBRE Y FIRMA	<u>Rosario Trice Martínez</u> USUARIO DEL EQUIPO NOMBRE Y FIRMA <u>ANESTESIOLOGO</u> NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA) <u>8774005</u> <u>7/7/25</u>	<u>Carlos Oswaldo Ramirez González</u> Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 <u>IMSS Mat 99024980</u> JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA NOMBRE Y FIRMA <u>07-07-25</u> NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)
---	---	---

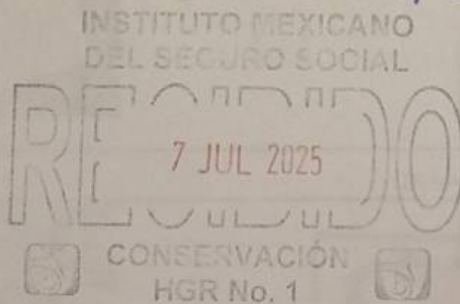

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	1341	ORDEN DE SERVICIO: 72003379	CONS: 1193


ANTES 2



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1

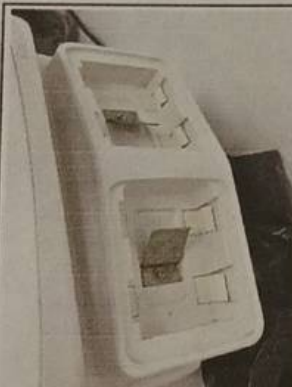

INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECORDADO
 7 JUL 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.



Carlos Oswaldo Ramirez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat. 99024980

SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

07-07-25