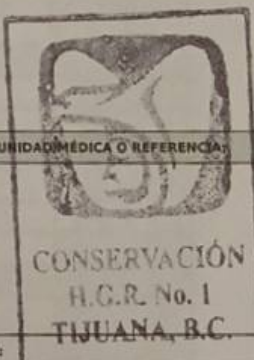
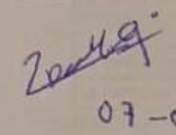


72003383

CONS: 1194

FECHA: 07-07-25	NO. REPORTE: N/A	NO. DE INGRESO: N/A	NO. BITACORA: 83919
INFORMACIÓN DEL CLIENTE HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1 DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐ TEL: 6646270963		INFORMACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1 GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐ GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐ ASESORIA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐ CAPACITACIÓN: ☒	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN REPORTE FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A		SUMINISTROS DE: ☐ REFACCIONES: ☐ LUGAR DE SERVICIO: ☒ ACCESORIOS: ☐ EN SITIO: ☐ EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒ ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: DESFIBRILADOR	MARCA: NIHON KOHDEN	MODELO: TEC-5631	NO. SERIE: 52152412
NO. INVENTARIO: 201100015825	SOFTWARE: 01-15	UBICACIÓN FÍSICA: Escolares	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Peditrico	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES EXTERNOS E INTERNOS, VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD DE PALETAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS DE ENERGÍA DE CARGA Y DESCARGA, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-18, 5529063; PA-19, 00140. Numero de Serie Real del Equipo: 01934.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: FUNCIONANDO AL 100% ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIAL:  CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.	
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:  07-07-25			
NOMBRE COMPLETO: Dra. Olga L. Romero Tejeda PUESTO: Jefa de Pediatría NO. DE MATRICULA: 99022478 FECHA: 07-07-25		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González PUESTO: Subjefe de Conservación NO. DE MATRICULA: 99024980 FECHA: 07-07-25	
NOMBRE COMPLETO: Dayan Monarrez Valencia REALIZÓ EL SERVICIO		NOMBRE COMPLETO: PUESTO: NO. DE MATRICULA: FECHA: 07-07-25	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN	
NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"			

FECHA: 07-07-25 FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003383

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631 NUMERO DE SERIE: 52152412

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
			✓/x	
1.	APARIENCIA FISICA DEL EQUIPO			
	El desfibrilador no está sucio.		/	
	El desfibrilador no está agrietado o dañado.		/	
	No hay etiquetas se retiran o se desgarran. (Las etiquetas son legibles.)		/	
	No hay conectores o interruptores están rotos o sueltas.		/	
	Sangre o química sobre el desfibrilador se limpia.		/	
2.	APARIENCIA CABLE DE ALIMENTACION			
	Se utiliza un cable de alimentación de 3 clavijas especificado.		/	
	Las partes metálicas del conector no se deforman.		/	
	No hay rasguños y cubierta del cable no esté roto.		/	
	Compruebe que la tierra de protección no está rota.		/	
3.	PALAS EXTERNAS			
	Las palas externas no están rotos.		/	
4.	APARIENCIA DE ACCESORIOS			
	Los conectores no están dañados o agrietados.		/	
	Adaptador Pad no ha caducado.		/	
5.	APARIENCIA DE LA BATERIA			
	No hay daños o grietas y sin etiquetas retiradas o desgarradas		/	
	La batería no ha caducado.		/	
6.	TEST DE BATERIA			
	Realizar el test de la batería.		/	
7.	ENCENDIDO			
	El desfibrilador se enciende y la pantalla funciona.		/	
8.	SONIDO DE SINCRONIZACION			
	QRS sincronización sonido es normal y se puede ajustar.		/	
9.	IMPRESORA			
	La impresora funciona correctamente.		/	
	Fecha y hora de impresión son correcta.		/	
	La impresión de eventos se puede realizar correctamente.		/	
	No hay puntos que faltan o tonos desiguales en el papel.		/	
	Velocidad de barrido del papel de impresión está dentro del rango especificado. 22,5 a 27,5 mm		/	23.5 mm
	La falta de papel se detecta correctamente.		/	
10.	DESCONEXION DE CONECTOR			
	Se detecta correctamente la desconexión de un conector		/	
11.	TIEMPO DE CARGA			
	La carga ha finalizado dentro del periodo de tiempo especificado.		/	5 seg
12.	FORMA DE ONDA			
	La desfibrilación se realiza correctamente.		/	
	La forma de onda de la energía descargada es bifásica.		/	
13.	ENERGIA DESCARGADA			
	Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	2 J	/	2 J
		3 J	/	3 J
		5 J	/	5 J
		7 J	/	7 J

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
07 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

CONSERVACIÓN
H.C.R. No. 1
Tijuana, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003383

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 52152412

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	MEDICIÓN
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
	70 J		/	70 J
	100 J		/	100 J
	150 J		/	150 J
	200 J		/	200 J
270 J		/	270 J	
Funcionamiento con la batería 270 J			/	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES			/	
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			/	270 J
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS				
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		/	2 J
	3 J		/	3 J
	5 J		/	5 J
	7 J		/	7 J
	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
16. CAMBIO DE LA ENERGIA				
La energía cargada se puede cambiar			/	
17. DESCARGA INTERNA				
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			/	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS				
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			/	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG				
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			/	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA				
La FV se detecta correctamente.			/	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			/	
La desfibrilación se realiza correctamente.			/	
21. PANTALLA AED				
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			/	
22. VOZ AED				
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			/	
23. MARCAPASOS FIJO				
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.			/	
24. MARCAPASOS A DEMANDA				
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente			/	
25. SALIDA DE MARCAPASOS				
La salida de estimulación por marcapasos es correcta.			/	100 mA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

FECHA: 07-07-25 FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003383

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 52162412

DESCRIPCION DEL SERVICIO					REALIZÓ	MEDICIÓN	
					✓/x		
26.	MONITORIZACION DE ECG						
	La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente.					✓	60 bpm
	HR: 60					✓	
	La sensibilidad de la onda ECG es correcta.					✓	
	Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG					✓	
27.	MONITORIZACION DE CO2						
	La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.					x	mmHg
	La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.					x	
	Precisión en la medición del sensor de CO2.					x	
28.	MONITORIZACION DE SpO2						
	Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.					✓	97 %
						✓	80 %
						✓	70 %
						✓	60 bpm
	Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.					✓	
29.	MONITORIZACION DE NIBP						
	Adulto e Infante	El manguito de NIBP se detecta correctamente.			✓		
		Medición y pantalla de NIBP correctas.			✓		
		La medición manual de NIBP se realiza correctamente			✓		
	Neonato	El manguito de NIBP se detecta correctamente.			✓		
		Medición y pantalla de NIBP correctas.			✓		
		La medición manual de NIBP se realiza correctamente			✓		
30.	MONITORIZACION DE TEMPERATURA						
	La precisión de visualización para la temperatura se confirma.					✓	
	La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.					✓	
	La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.					✓	
31.	MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG						
	Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.					✓	
	La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.					✓	
32.	SEGURIDAD ELECTRICA						
	Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo BF, DC)	Condición normal $\leq 10\mu A$	10 μA	
		Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA		Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$	50 μA	
	Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA	Fuga hacia el paciente tipo I (Tipo CF, DC)	Condición normal $\leq 10\mu A$	10 μA	
		Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA		Condición 1ra falla $\leq 50\mu A$	50 μA	
	Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *	Condición normal	0.1 μA				
		Condición 1ra falla	0.1 μA				
33.	CARGADOR DE BATERIA SB-831V						
	El cargador de baterías no está sucio.					✓	
	Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.					✓	
	Sin etiquetas retiradas o rasgadas.					✓	
	El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.					✓	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

3 de 4

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99074980
07-07-25

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

FECHA: <u>07-07-25</u>	FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003383</u>
DESFIBRILADOR MODELO: TEC-5631	NUMERO DE SERIE: <u>52152412</u>

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.		✓	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.		✓	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.		✓	
La operación en el encendido es correcta.		✓	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.		✓	
34. SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Condición normal $\leq 100\mu A$
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS			

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

Dayan Monarez Valencia
07-07-25
REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

Dra. Olga L. Romero Tejeda
Jefa de Pediatría
Matrícula 99022478
Hospital General Regional No. 1
Tijuana, B.C.
07/07/25

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA
07-07-25
NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
07 JUL 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1




EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	S2152412	ORDEN DE SERVICIO:	72003383
		CONS:	1194

ANTES 2



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
 07 JUL 2025
 CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1

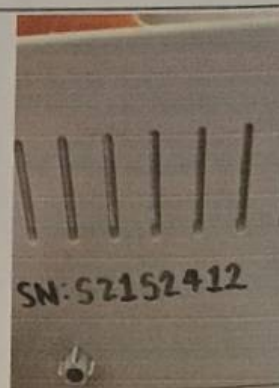

DURANTE 1



DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

07-07-25

SELLO UNIDAD MÉDICA
 CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.