

72003396

CONS: 2058

FECHA: 10-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83960
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO: ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO: ☐ USUARIO: ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA: ☐ SERVICIO: ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		CAPACITACIÓN: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		SUMINISTROS DE: ☐	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES: ☐	
REPORTO FALLA: N/A		ACCESORIOS: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		EN SITIO: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A		EMPRESA: ☐	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIRE MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB203361
NO. INVENTARIO: 202000006760	SOFTWARE: 6.0.2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: UCI	
HORAS DE USO EQUIPO: 15700	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: 10880			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DA VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14488105028.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
10-07-25	Mat. 99020055	Mat. 99024980	Mat. 99024980
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	CONSERVACIÓN
	Subjefe de Conservación	Subjefe de Conservación	H.G.R. No. 1
	H.G.R. No. 1	H.G.R. No. 1	TIJUANA, B.C.
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
Enfermera Jefe de Piso			
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
FECHA: 10/07/25	FECHA: 10-07-25	FECHA:	FECHA:
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 10-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003396

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: MB203361

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

REALIZÓ

v/x MEDICIÓN

1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:	
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/ E
	FILTRO DE BACTERIAS	/
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/
	*PULSIOXÍMETRO	/
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/
	*BRAZO	/
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/
	BASE RODABLE	/
2.	CALIBRACIONES:	
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/
3.	VERIFICACIÓN DE:	
	TEST DE VÁLVULAS	/
	TEST DE ALARMAS	/
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/ 5263 mAh
	TEST USB	/

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CONSERVACIÓN
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

	SELFTEST		
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS		
	SENSOR DE CO2		
	SENSOR DE SPO2		
	ALERTA ACÚSTICA		
5.	TEST DE VENTILACIÓN		
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO		
	TEST DE CIRCUITO		
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	25	mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	5	mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	15	rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	21	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	70	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	100	%
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO		
	TEST DE CIRCUITO		
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	500	mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	500	mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	20	rpm
7.	TEST DE ALARMAS		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE		
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO		
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE		
8.	REVISION DE BATERIA		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		
	ALARMA VISUAL LEDs		
	ALARMA ACÚSTICA		
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE		
	ALARMA ACÚSTICA		
	HGR No. 1 LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO		
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	60	mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	60	mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	60	mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	60	mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	10	L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	50	L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)		
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						X
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						/
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	✓/x		✓/x		✓/x		
	AISLAMIENTO	/ 0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	/ 120 V	RESISTENCIA A TIERRA	/ 0.58 Ω	
	CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL	/ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	/ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/ 0.1 μA	
	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	/ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	/ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/ 0.1 μA	
	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/ 0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/ 0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/ 0.1 μA	
	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/ 0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	/ 0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	/ 0.1 μA	
	CORRIENTE RESIDUAL	/ 0.1 mA					
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						/
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN,						/
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR						/
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						/
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						/
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						/
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						/
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						/
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						/

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

Luis Carlos Avila Salazar
10-07-25

ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

CEIP Consuelo Orduño Vega
Mat. 98420055

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA 10-07-25

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


SERIE: MB203361

ORDEN DE SERVICIO: 72003396


CONS:

2058

ANTES 2

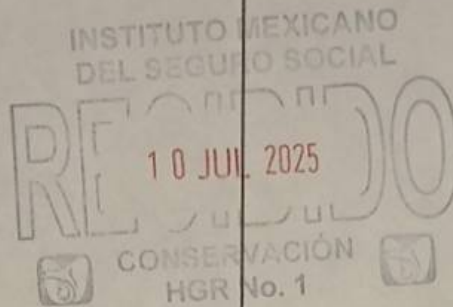

DURANTE 1

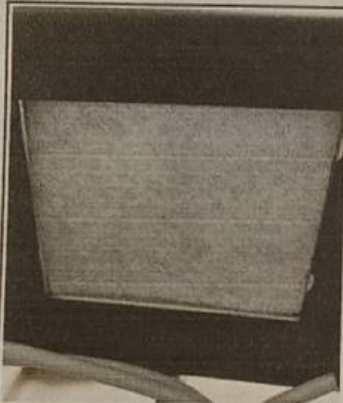

DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE CLÍNICA

SELLO UNIDAD MÉDICA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

10-07-25