

72003405


CONS: 2047

FECHA: 10-07-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA: 83955
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO:	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		CAPACITACIÓN: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
REPORTO FALLA: N/A		EN SITIO: ☐	
FALLA REPORTADA: N/A		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB203842
NO. INVENTARIO: 20200006414	SOFTWARE: G.O. 2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: UCI	
HORAS DE USO EQUIPO: 6645	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: 3084			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE: EQUIPO DE MEDICIÓN: PA41015529063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normativas para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
FIRMA: Luis Carlos Avila Salazar		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
10-07-25		Subjefe de Conservación	
NOMBRE COMPLETO: ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Enfermera Jefa de Piso		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA: 99024980	
FECHA: 10/07/25		FECHA: 10-07-25	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE CONSERVACIÓN	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: <u>10-07-25</u>		FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO <u>72003405</u>	
VENTILADOR PULMONAR		NÚMERO DE SERIE: <u>MB203842</u>	
MODELO BELLAVISTA			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ		
	v/x	MEDICIÓN	
1. REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:			
ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/		
CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/		
TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E	
FILTRO DE BACTERIAS	/		
SET DE FILTROS DE REPUESTO	/		
*PULSIOXÍMETRO	/		
*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/		
*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/		
*BRAZO	/		
ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/		
*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/		
BASE RODABLE	/		
2. CALIBRACIONES:			
ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/		
CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/		
CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/		
CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/		
CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/		
ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/		
CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/		
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/		
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/		
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/		
CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/		
CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/		
CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/		
3. VERIFICACIÓN DE:			
TEST DE VÁLVULAS	/		
TEST DE ALARMAS	/		
FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/		
TEST DE SALIDA A USUARIO	/		
REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/		
REVISIÓN DE BATERÍAS	/		
TEST USB	/		

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

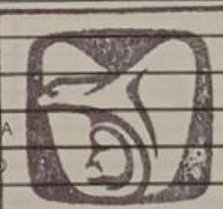

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Suplente de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99021080
10-07-25

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

	SELFTEST	/		
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS			
	SENSOR DE CO2	/		
	SENSOR DE SPO2	/		
	ALERTA ACÚSTICA	/		
5.	TEST DE VENTILACIÓN			
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/		
	TEST DE CIRCUITO	/		
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25	mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5	mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15	rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100	%
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO			
	TEST DE CIRCUITO	/		
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	500	mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	500	mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	20	rpm
7.	TEST DE ALARMAS			
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/		
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/		
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/		
8.	REVISION DE BATERIA			
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	/		
	ALARMA VISUAL LEDs	/		
	ALARMA ACÚSTICA	/		
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/		
	ALARMA ACÚSTICA	/		
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/		
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN			
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60	mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60	mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60	mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60	mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO			
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10	L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50	L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO			
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10	L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50	L/min

**Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1**



**Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 950349800**

10-07-25

**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.**

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						X
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	✓/x		✓/x		✓/x		
	✓	0.1 Mohm	✓	120 V	✓	0.66 Ω	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 mA					
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						X
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CÁMARA DEL HUMIDIFICADOR						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						X

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCIÓN NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

Luis Carlos Avila Salazar
10-07-25

Enfermera Jefe de Piso
10/07/25

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMS Mat. 99024980
10-07-25

ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR

REALIZÓ EL SERVICIO

USUARIO DEL EQUIPO

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203842	ORDEN DE SERVICIO: 72003405	CONS: 2047


ANTES 2



DURANTE 1

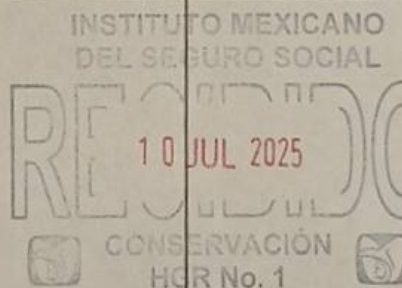

DESPUÉS 1

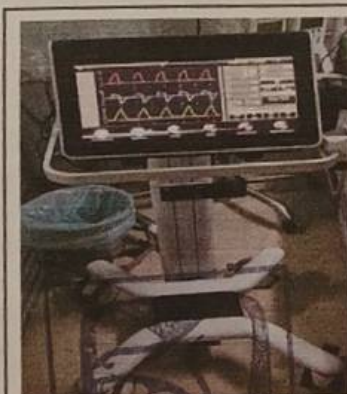

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
MSS Mat. 99024980

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TLJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y JEFE DE BIOMEDICA

10-07-25