

CONS: 20/25

72003409

FECHA		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
11-07-25				83963			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 1			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				PREDICTIVO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: N/A				REFACCIÓN ☐			
				ASESORÍA ☐			
				CAPACITACIÓN ☒			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☐			
REPORTO FALLA: N/A FALLA REPORTADA: N/A				ACCESORIOS: EMPRESA: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203988	
NO. INVENTARIO: 202000006753		SOFTWARE: 6.0.2100.0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: 14564		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: 11554							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTROPNEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BA105028.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIAL:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	 CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:				
Luis Carlos Avila Salazar	EJP Conservación Ordono Rega Mat 98020053	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez					
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:				
ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR	H.G.R. No. 1	IMSS Mat 99024980					
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:				
Enfermera Jefe de Piso							
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:				
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA				
11/07/25	11-07-25						
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA				

FECHA: 11-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003409

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: MB203988

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	/	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
2.	CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
3.	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	
	TEST USB	/	

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

5520 mAh

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Tijuana, B.C.
Mat. 99024980

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

	SELFTEST		
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS		
	SENSOR DE CO2		
	SENSOR DE SPO2		
	ALERTA ACÚSTICA		
5.	TEST DE VENTILACIÓN		
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO		
	TEST DE CIRCUITO		
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	25	mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	5	mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	15	rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	21	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	70	%
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	100	%
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO		
	TEST DE CIRCUITO		
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	500	mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	500	mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	20	rpm
7.	TEST DE ALARMAS		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	Clave Presupuestal	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	0205 0214 2902	
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	H.G.R. No.1	
8.	REVISION DE BATERIA		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		
	ALARMA VISUAL LEDs		
	ALARMA ACÚSTICA		
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE		
	ALARMA ACÚSTICA		
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO		
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	60	mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	60	mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	60	mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	60	mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	10	L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	50	L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	2	L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	10	L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Tel. 99024980
11-07-25

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						X
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	✓/x		✓/x		✓/x		
	AISLAMIENTO	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	120 V	RESISTENCIA A TIERRA	0.63 Ω	
	CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	0.1 μA	
	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	
	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	0.1 μA	
	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	
	CORRIENTE RESIDUAL	0.1 mA					
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CÁMARA DEL HUMIDIFICADOR						
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						
16.	HGR No. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

Luis Carlos A.S.
11-07-25

ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA

Enfermera Jefa de Aso
11/07/25

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



SERIE: MB203988

ORDEN DE SERVICIO: 72003409


CONS:

2065

ANTES 2

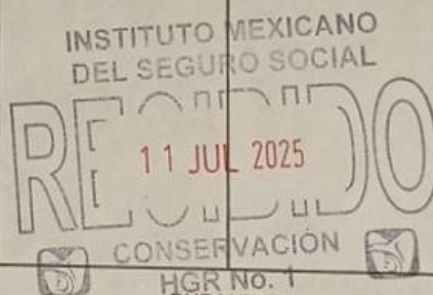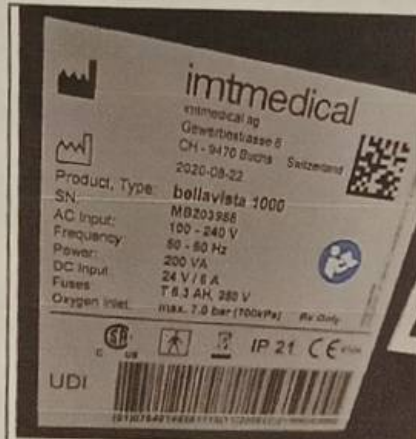

DESPUÉS 1

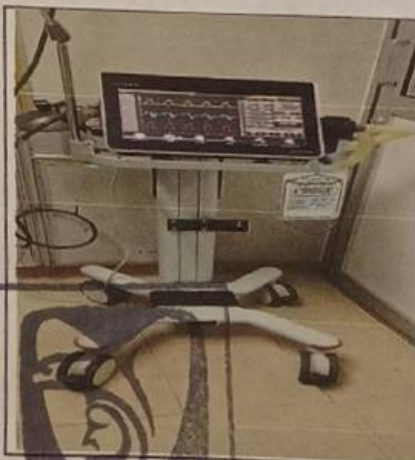

Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No.1
 IMSS Mat 99024980
 11-07-25

CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 SELLO UNIDAD MÉDICA
 TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA