

FECHA: 09-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003412

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: MB204011

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
	v/x	MEDICIÓN
1. REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
FILTRO DE BACTERIAS	/	
SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
*PULSIOXÍMETRO	/	
*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/	
*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/	
*BRAZO	/	
ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
BASE RODABLE	/	
2. CALIBRACIONES:		
ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
3. VERIFICACIÓN DE:		
TEST DE VÁLVULAS	/	
TEST DE ALARMAS	/	
FUNCIONALIDAD DE LEDS (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
REVISIÓN DE BATERÍAS	/	5524 mAh
TEST USB	/	

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
09 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980
09-07-25

	SELFTEST	/	
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS		
	SENSOR DE CO2	/	
	SENSOR DE SPO2	/	
	ALERTA ACÚSTICA	/	
5.	TEST DE VENTILACIÓN		
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO		
	TEST DE CIRCUITO	/	
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	2.0 rpm
7.	TEST DE ALARMAS		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/	
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/	
8.	REVISIÓN DE BATERIA		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA	/	
	ALARMA VISUAL LEDs	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/	
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min

**CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.**

**Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1**

**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.**

**Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980**

09-07-25

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						X
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA						X
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	✓/x		✓/x		✓/x		
	✓	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	✓	120 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓ 0.62 Ω
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 mA	CORRIENTE RESIDUAL				
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						09 JUL 2025
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						X
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						X

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

Luis Carlos Avila Salazar
09-07-25

Grz. Huente Abraham Israel
Inhaloterapeuta
Mat. 99022928

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: MB204011 ORDEN DE SERVICIO: 72003412 CONS: 2062


ANTES 2

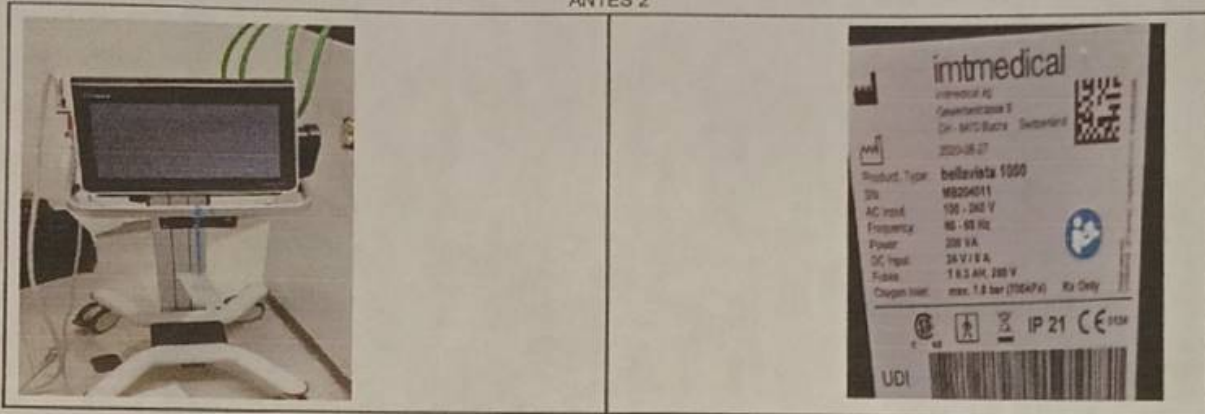

DURANTE 1

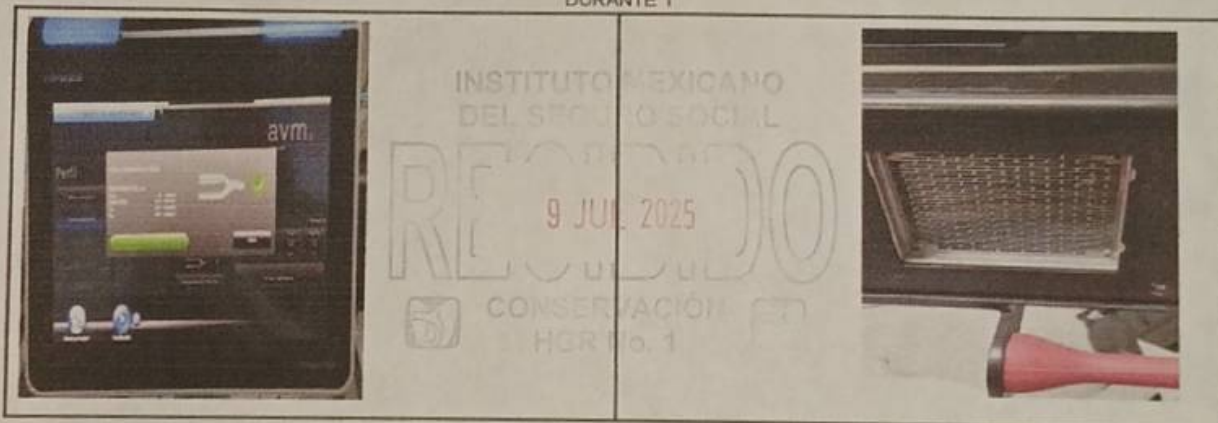

DESPUÉS 1

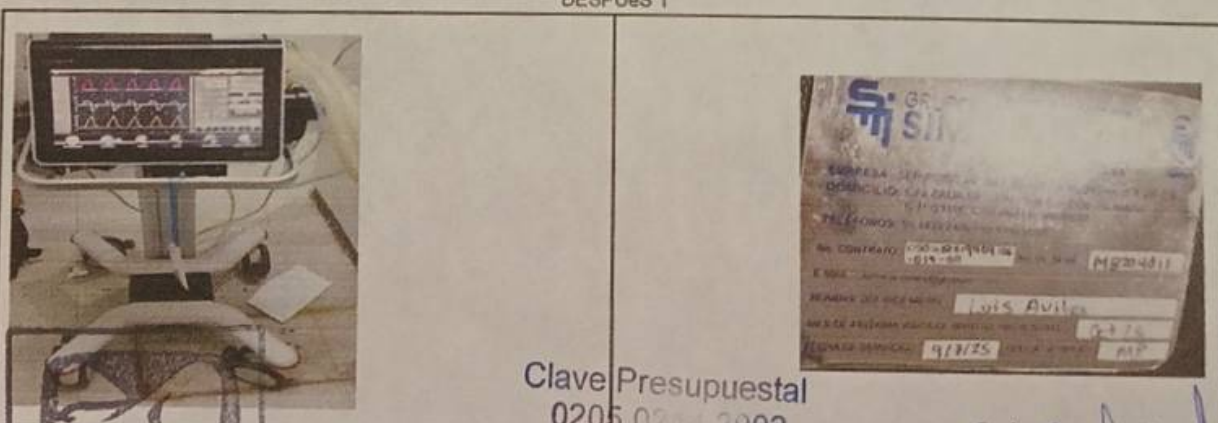

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

09-07-25

SELLO UNIDAD MEDICA:
CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.