

CONS: 1

Calzada de Tlalpan No. 479 Col. Alamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México. Tel: (55) 4196-5500

FECHA: 07-07-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003366

VENTILADOR PULMONAR

MODELO FABIAN HFO

NÚMERO DE SERIE:

AH-02023

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

REALIZÓ

v/x

MEDICIÓN

1.

REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:

ESTRUCTURA GENERAL DEL EQUIPO

CARCASA SIN ROTURAS O DAÑOS

CABLES SIN DAÑOS

CHECAR TODOS LOS CONECTORES

MEMBRANA Y VÁLVULA DE EXPIRACIÓN CORRECTAMENTE MONITOREADA

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

2.

ARRANQUE

PRENDER EL EQUIPO

PANTALLA LCD (MENOS DE 3 PÍXELES SIN FUNCIONAR)

PASA EL SELF TEST

SUENA LA ALARMA (2 VECES AL INICAR)

LED ROJO DE ALARMA PARPADEA 2 VECES AL INICIO

DESCONECTAR CABLE DE ALIMENTACIÓN

SONIDO DE ALARMA ACTIVADO (ALARMA DE POWER FAIL)

LED NARANJA ENCENDIDO (MODO BATERÍA)

CONECTAR CABLE DE ALIMENTACIÓN

SONIDO DE ALARMA DESACTIVADO

LED NARANJA APAGADO (DESACTIVADO MODO BATERÍA)

3.

FUNCIONALIDAD DE BLENDER / PURGA (AIRE AL ESTÁNDAR 20/ 1013)

PRENDER EL EQUIPO

BLENDER NO FUGA, NO HAY FLUJO SALIENDO DEL PUERTO INSPIRATORIO

CHECAR LA HERMETICIDAD DE LA VÁLVULA DE CALIBRACIÓN (NO HAY FUGA EN LA MANGUERA QUE VA A LA CELDA DE O2)

PRENDER EL EQUIPO EN MODO IPPV CON PARÁMETROS ENCONTRADOS EN EL TEST INSTRUCTION SECCIÓN 4.3

FLUJO DE PURGA DEBE SER ENTRE 150 Y 350 ML/MIN

200

4. CALIBRACIÓN (UNA VEZ AL AÑO)

CONECTAR AIRE EN LA TOMA DE AIRE Y DE OXÍGENO

COLOCAR HORA Y FECHA CORRECTAS

PRENDER EL EQUIPO EN MODO O2 THERAPY O IPPV (3L/MIN) Y COLOCAR OXÍGENO AL 60%

VALOR DE PRESIÓN DE AIRE EN MONITOR PIC DEBE SER 2400 ±200

2450

VALOR DE PRESIÓN DE OXÍGENO EN MONITOR PIC DEBE SER 2400 ±201

2460

REINICAR EL EQUIPO CONECTAR AIRE EN LA TOMA DE AIRE Y DE OXÍGENO PROGRAMAR LOS PRÁMETROS COMO LO INDICA EL TEST INSTRUCTION SECCIÓN 5.3

MEDIR VÁLVULA DE AIRE VALOR ESPERADO 9.5 ±0.1 L/min REPETR 3 VECES LA MEDICIÓN REINICIANDO EL EQUIPO ENTRE CADA MEDICIÓN, CALIBRAR SI ES NECESARIO

9.6

MEDIR VÁLVULA DE OXÍGENO VALOR ESPERADO 9.5 ±0.1 L/min REPETR 3 VECES LA MEDICIÓN REINICIANDO EL EQUIPO ENTRE CADA MEDICIÓN, CALIBRAR SI ES NECESARIO

9.4

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

REINICIAR EL EQUIPO CONECTANDO AIRE Y OXIGENO RESPECTIVAMENTE

DESCONECTAR TUBO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DEL MANIFOLD, VALOR DE PRESIÓN INSPIRATORIA 1480 ± 10 PARA HW 1-3 Y 1095 ± 10 PARA HW 4, AJUSTAR SI ES NECESARIO

APLICAR 60 mbar AL TUBO DE PRESIÓN INSPIRATORIA DESCONECTADO DEL MANIFOLD, VALOR DE PRESIÓN INSPIRATORIA, DEBE SER 2940 ± 10 PARA HW 1-3 Y 2255 ± 10 PARA HW 4, AJUSTAR SI ES NECESARIO

CALIBRAR 0mbar EN MENÚ DE CALIBRACIÓN

APLICAR 60 mbar EN PUERTO PROXIMAL, CALIBRAR 60mbar en MENÚ DE CALIBRACIÓN

CALIBRACIÓN DE TOUCHSCREEN

CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN

VÁLVULA DE SEGURIDAD DEBE ABRIR ENTRE 450 A 600 mbar, SI NO SUCEDE, CALIBRAR

CALIBRACIÓN DE CELDA DE OXIGENO (21% Y 100%)

CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

PROGRAMAR

I-FLOW= 8 l/min

PEEP= 0mbar

Frecuencia= 30 bpm

E-FLOW= 5 l/min

PINSP= 10mbar

I-TIME= 1 seg

CONSERVACIÓN

H.G.R. No. 1

TIJUANA, B.C.

PROGRAMADO

MEDIDO EN VENTILADOR

MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO

PASA /FALLA

P INSP (mbar)	PEEP	PIP ± 1	P MEAN	PEEP ± 1	PIP ± 1	P MEAN	PEEP ± 1	PASA /FALLA
10	0	10	5.1	1	9.8	4.5	0.3	/
60	0	60	22.1	1	59.3	21.4	0.4	/
30	5	30	15.0	5.2	30.4	14.5	5.1	/

CHEQUEO DE TRIGGER

CHEQUEO BLENDER

PROGRAMADO	MEDIDO EN VENTILADOR	MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO	TOLERANCIA	PASA /FALLA
FIO2	FIO2	FIO2		
21%	21	21.1	$\pm 3 \%$	/
40%	40	40.6	$\pm 3 \%$	/
60%	60	60.3	$\pm 3 \%$	/
100%	100	100	$\pm 3 \%$	/

CHEQUEO DE VOLUMEN GARANTIZADO *

PROGRAMADO	MEDIDO EN VENTILADOR	MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO	TOLERANCIA
VG	FIO2	VTE	
5	21%	5	± 0.5 ml
5	100%	5	± 0.5 ml
10	21%	10	± 0.5 ml
10	100%	10	± 0.5 ml

HFO *

PROGRAMADO	MEDIDO EN EL EQUIPO	MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO COMPARADO CON EL EQUIPO	PASA /FALLA
AMPL (mbar)	P mean (mbar)	Frec (HZ)	
10	10	5	/
40	20	10	/
10	10	20	/
80	40	20	/

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

MODO CPAP								PASA / FALLA		
PROGRAMADO		MEDIDO EN EL EQUIPO			MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO					
CPAP		P mean (mbar ± 1)			P mean (mbar ± 1)					
5		5.1			5.6			/		
10		10			11			/		
MODO DUOPAP *								PASA / FALLA		
PROGRAMADO		MEDIDO EN EL EQUIPO			MEDIDO EN ANALIZADOR DE PRESIÓN Y FLUJO					
CPAP	P-DUO	P Peak ± 1	P Mean	PEEP ± 1	P Peak ± 2	P Mean ± 1	PEEP ± 1			
3	8	1.1	0.5	0.3	2.8	1.3	1	/		
5	10	1	0.7	0.6	3	1.5	1.2	/		
10	15	1	1.8	0.9	3.5	1.7	1.3	/		
CHEQUEO DE HERRAMIENTA DE SPO2 *								/		
CHEQUEO DE HERRAMIENTA DE eTCO2								/		
6. ALARMAS DE PACIENTE								INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RECORRIDO 7 JUL 2025 OBSERVACIÓN H.G.R. No. 1		
FUGA EN RAMAS Y APNEA										
REVISIÓN DE TUBO ET										
ALTA PRESIÓN										
7. ALARMAS DEL SISTEMA								/		
PRESIÓN DE SUMINISTRO DE OXÍGENO (PARPADEANDO EN ROJO)										
PRESIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE (PARPADEANDO EN ROJO)										
OCCLUSIÓN DEL TUBO										
PACIENTE DESCONECTADO								/		
8. INSTALACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO*								/		
9. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA								/		
CORRIENTE DE FUGAS		/	0.1 μA	VOLTAJE DE LINEA		/	125 V	RESISTENCIA A TIERRA	/	0.7 Ω
10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.								/		
11. CALIBRACIÓN DE BATERÍA								/		

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCIÓN NO APLIQUE (N/A)

OBSERVACIONES:

Dayan Monarcel Valencia 07-07-25

Dayan Monarcel Valencia

REALIZÓ EL SERVICIO

NOMBRE Y FIRMA



Lic. Enf. Valeria Pacheco
Mat. 11078837

Enfermera JefadePiso
07/07/25

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramirez González

Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1

IMSS Mat 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)



**CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TLUANA, B.C.**

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


SERIE: AH-02023

ORDEN DE SERVICIO: 72003366

CONS:

1


ANTES 2

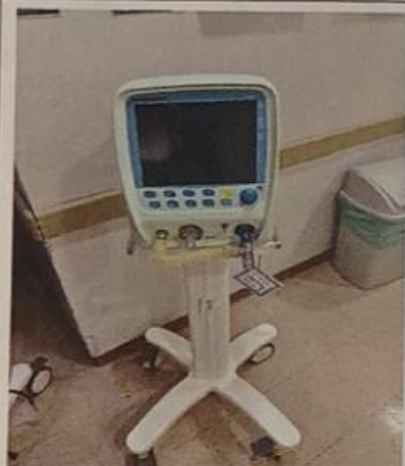

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1

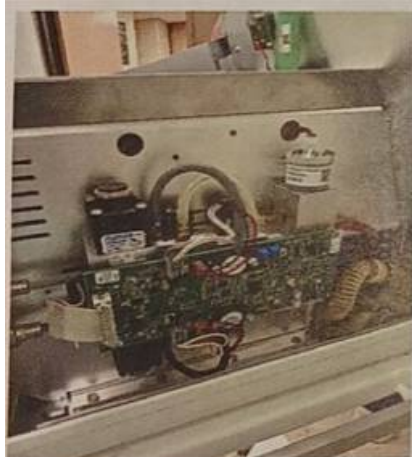

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
7 JUL 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



Uswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 09024980

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

07-07-25

SELLO UNIDAD MÉDICA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TLJUANA, B.C.