

CONS: 1195

Calzada de Hualpoan No. 479 Col. Álamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México. Tel: (55) 4196-5500

FECHA: 03/10/2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003855

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 08903

DESCRIPCION DEL SERVICIO			REALIZÓ	
			✓/x	MEDICIÓN
Energía descargada cuando se utilizan las palas externas es correcta operación AC	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
	70 J		/	70 J
	100 J		/	100 J
	150 J		/	150 J
	200 J		/	200 J
	270 J		/	270 J
Funcionamiento con la batería 270 J			/	
14. DESCARGA CON PARCHES DESECHABLES				
La energía descargada cuando se utilizan los parches desechables es correcta en 270 J			/	270 J
15. DESCARGA CON PALAS INTERNAS				
La energía descargada cuando se utilizan las palas internas es correcta operación AC	2 J		/	2 J
	3 J		/	3 J
	5 J		/	5 J
	7 J		/	7 J
	10 J		/	10 J
	15 J		/	15 J
	20 J		/	20 J
	30 J		/	30 J
	50 J		/	50 J
16. CAMBIO DE LA ENERGIA				
La energía cargada se puede cambiar			/	
17. DESCARGA INTERNA				
La descarga interna se lleva a cabo correctamente.			/	
18. CARDIOVERSION DESDE PALAS				
La cardioversión sincronizada mediante palas se realiza correctamente.			/	
19. CARDIOVERSION DESDE ECG				
La cardioversión sincronizada mediante el cable ECG se realiza correctamente.			/	
20. AED ANALISIS, CARGA Y DESCARGA				
La FV se detecta correctamente.			/	
La carga se inicia automáticamente cuando se detecta la FV.			/	
La desfibrilación se realiza correctamente.			/	
21. PANTALLA AED				
Los mensajes y las ilustraciones se muestran correctamente.			/	
22. VOZ AED				
El desfibrilador genera correctamente las instrucciones de voz.			/	
23. MARCAPASOS FIJO				
El ritmo de marcapasos fijo se realiza correctamente.			/	
24. MARCAPASOS A DEMANDA				
El ritmo de marcapasos a demanda se realiza correctamente			/	
25. SALIDA DE MARCAPASOS				
La salida de estimulación por marcapasos es correcta.			/	160 mA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

FECHA: 03/10/2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 22003855

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 08903

DESCRIPCION DEL SERVICIO		REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
26. MONITORIZACION DE ECG			
La precisión de la frecuencia cardíaca se muestra correctamente y el tono de sincronización QRS se genera correctamente.		/	60 bpm
HR: 60			
La sensibilidad de la onda ECG es correcta.		/	
Alarma de frecuencia cardíaca y la alarma de desconexión de cable de ECG		/	
27. MONITORIZACION DE CO2			
La precisión de visualización para RR y valor de CO2 se confirmó.		x	mmHg
La alarma de desconexión del cable de CO2 se genera correctamente.		x	
Precisión en la medición del sensor de CO2.		x	
28. MONITORIZACION DE SpO2			
Precisión para el valor y el pulso SpO2 se confirma y el tono de sincronización de QRS se genera correctamente.	97% SpO2: 95-99% SpO2	/	99 %
	80% SpO2: 78-92% SpO2	/	80 %
	70% SpO2: 66-74% SpO2	/	70 %
	60 bpm SpO2: 55-65% bpm	/	60 bpm
Alarmas de límite superior/inferior y desconexión de cable de SpO2.		/	
29. MONITORIZACION DE NIBP			
Adulto e Infante	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	x	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	x	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente	x	
Neonato	El manguito de NIBP se detecta correctamente.	x	
	Medición y pantalla de NIBP correctas.	x	
	La medición manual de NIBP se realiza correctamente	x	
30. MONITORIZACION DE TEMPERATURA			
La precisión de visualización para la temperatura se confirma.		x	
La alarma de desconexión del cable de temperatura se genera correctamente.		x	
La alarma de desconexión del sensor de temperatura se genera correctamente.		x	
31. MONITORIZACION DE DERIVACIONES ECG			
Las 12 derivaciones de ECG se muestra correctamente.		/	
La alarma de desconexión de derivación se genera correctamente.		/	
32. SEGURIDAD ELECTRICA			
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Fuga hacia el paciente tipo I
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA	(Tipo BF, DC)
Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA	Fuga hacia el paciente tipo I
	Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA	(Tipo CF, DC)
Corriente Auxiliar al Paciente (Parte aplicada Tipo CF) *	Condición normal	1 μA	
	Condición 1ra falla	1 μA	

33. CARGADOR DE BATERIA SB-831V		
El cargador de baterías no está sucio.	x	
Ningún daño a, grietas en, deformación o traqueteo del cargador de baterías.	x	
Sin etiquetas retiradas o rasgadas.	x	
El orificio de ventilación no está obstruido con polvo.	x	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Carlos Usualdo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Tijuana, B.C.

FECHA: 03/10/2025

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003855

DESFIBRILADOR
MODELO: TEC-5631

NUMERO DE SERIE: 09903

				REALIZÓ	
DESCRIPCION DEL SERVICIO				√/x	MEDICIÓN
Se utiliza el cable de alimentación de 3 clavijas proporcionado.				√	
La cubierta del cable no está sucia, dañada o rota.				√	
El conductor de tierra del cable de alimentación no está roto.				√	
La operación en el encendido es correcta.				√	
Los paquetes de baterías se cargan normalmente.				√	
34. SEGURIDAD ELECTRICA DE CARGADOR					
Corriente de fuga a tierra	Condición normal $\leq 500\mu A$	500 μA	Corriente de fuga a chasis	Condición normal $\leq 100\mu A$	100 μA
	Condición 1ra falla $\leq 1mA$	1 mA		Condición 1ra falla $\leq 500\mu A$	500 μA
6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS				√	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

*EN CASO DE CONTAR CON LAS OPCIONES HABILITADAS

OBSERVACIONES:

#03/10/2025 Mtra. Bracamontes
Ing. Yukio Matsumiya
Matsumiya
REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

R. María C.
USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Bracamontes Rodriguez
María Clementina

Carlos Usurero Villalaz Durán
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Jefe de Conservación y/o Biomedica
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

03 OCT 2025


Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: 08903 ORDEN DE SERVICIO: 72003855 CONS: 1195

ANTES 2

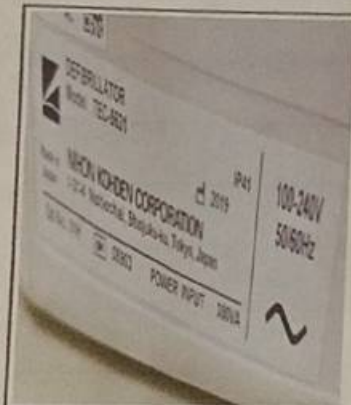

**Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1**



DURANTE 1




INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
03 OCT 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



SELLO UNIDAD MÉDICA

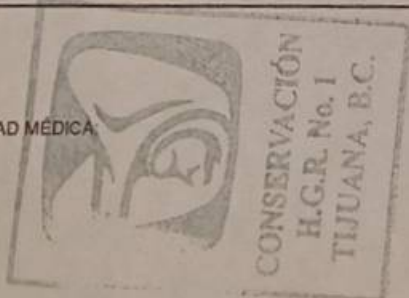

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Us...
Sub... de Conservación
H.G.R. No. 1