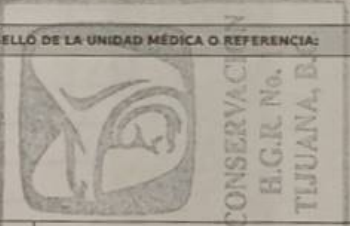
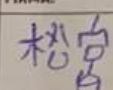
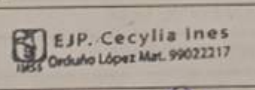
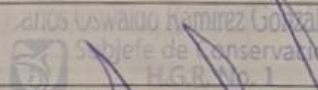
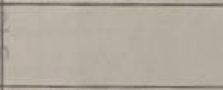


72003864

CONS: 2057

FECHA: 30-09-25		NO. REPORTE: N/A		NO. DE INGRESO: N/A		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A				ASESORÍA: ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CAPACITACIÓN: ☐							
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTÓ FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIRE MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203355	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: 6.0.2100.0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO:		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA:							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS. PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO. VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BB105028 ; PA-17, 5410702							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100% ☒				X			
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:		
1		Kit de Mantenimiento Preventivo	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya		EJP. Cecylia Ines		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA			
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
30-09-25		30-09-25		30-09-25		30-09-25	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 30-09-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003864

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: MB203355

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	€
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	x	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	x	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	x	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
2.	CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
3.	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	mAh
	TEST USB	/	

**NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.**

**Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1**

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No.1
IMSS Mat 99024980

4.	SELFTEST	/	
	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS		
	SENSOR DE CO2	x	
	SENSOR DE SPO2	x	
	ALERTA ACÚSTICA	x	
5.	TEST DE VENTILACIÓN		
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	1 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO		
	TEST DE CIRCUITO	/	
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	572 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	505 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	1.7 rpm
7.	TEST DE ALARMAS		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/	
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/	
8.	REVISION DE BATERIA		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	/	
	ALARMA VISUAL LEDs	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/	
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						✓
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						✓
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						
	✓/x		✓/x		✓/x		
	✓	0.1 Mohm	✓	121 V	✓	0.34 Ω	
	✓	0.1 μA	✓	0.7 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	✓	0.1 μA	
	✓	0.1 mA					
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						X
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						X
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO						X
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						X
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						X
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS						✓

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE.

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No 1

OBSERVACIONES:

Ing. Yukio Matsumiya Matsumiya

30-09-25

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

Cecilia Ines
H.G.R. No. 1

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA


NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203355	ORDEN DE SERVICIO: 72003864	CONS: 2057


ANTES 2

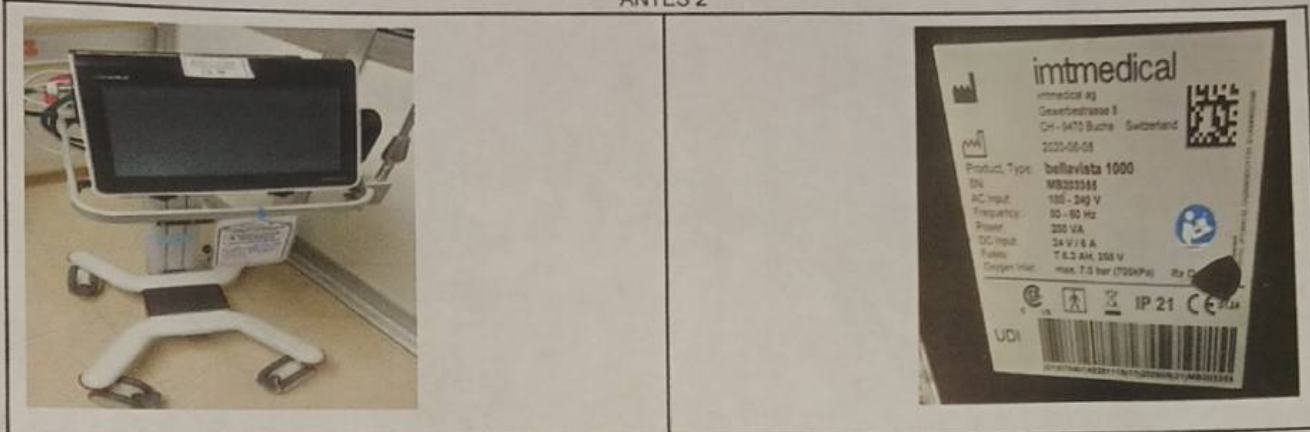

DURANTE 1

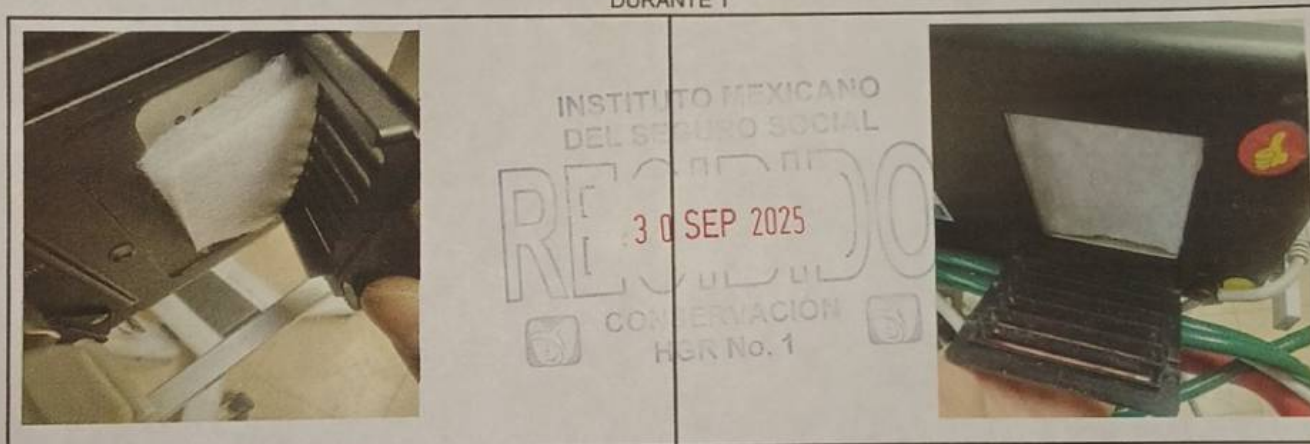

DESPUÉS 1

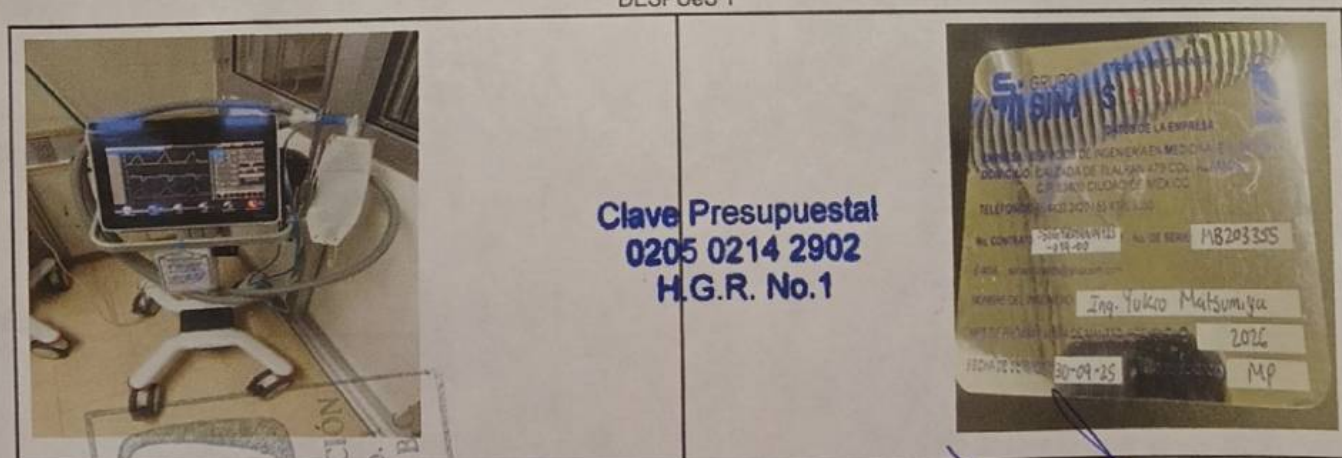

SELLO UNIDAD MEDICA



Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA
IMSS Mat 49024980