

72003870

CONS: 2053

FECHA: 30-09-25	NO. REPORTE N/A	NO. DE INGRESO N/A	NO. BITACORA
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A	GARANTÍA DE VENTA ☐	REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐
		ASESORÍA: ☐	DIAGNÓSTICO ☐
		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	LUGAR DE SERVICIO: ☒
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☐
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
REPORTÓ FALLA: N/A	FALLA REPORTADA: N/A		
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A		
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIRE MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB203785
NO. INVENTARIO: 20200000 6409	SOFTWARE: G-0-260	UBICACIÓN FÍSICA: UC1	
HORAS DE USO EQUIPO:	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto	
HORAS DE USO TURBINA: ASD			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS. VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS. PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO. VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.			
ID/NÚMERO DE SERIE. EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BB105078 ; PA-13, 5410702			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:	FUNCIONANDO AL 100% ☒		
	FUERA DE SERVICIO ☐		
	NO SE REALIZA SERVICIO ☐		
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1	301.972.001	Kit de Mantenimiento Preventivo	NA
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
Ing. Rafael Sanchez Cordova	EJP. Cecylia Ines	Carlos Oswaldo Ramirez	Carlos Oswaldo Ramirez
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
30-09-25			
USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA	
REALIZÓ EL SERVICIO			

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 30-09-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72005870

VENTILADOR PULMONAR

NÚMERO DE SERIE:

MB203785

MODELO BELLAVISTA

1.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		✓/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	/	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
	CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
2.	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
3.	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	
	TEST USB	/	mAh

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

4.	SELFTEST	/	
	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS	/	
	SENSOR DE CO2	X	
	SENSOR DE SPO2	/	
5.	ALERTA ACÚSTICA	/	
	TEST DE VENTILACIÓN	/	
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	1.7 rpm
7.	TEST DE ALARMAS	/	
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/	
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/	
8.	REVISION DE BATERIA	/	
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	/	
	ALARMA VISUAL LEDs	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/	
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN	/	
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO				/	
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA				/	
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA				/	
	✓/x		✓/x		✓/x	
	AISLAMIENTO	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	123 V	RESISTENCIA A TIERRA	0.35 Ω
	CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	0.1 μA
	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	0.1 μA
	CORRIENTE RESIDUAL	0.1 mA				
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)					
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.				X	
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA				X	
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN				X	
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR				X	
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.				X	
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES				X	
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)				X	
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)				X	
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL				X	
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.				/	

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FAB

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

OBSERVACIONES:

Rafael Sinchoz Cordova

Ing. Rafael Sinchoz Cordova

30-09-25

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

EJP. Cecylia Ines
Orduña López Mat. 99022217

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Osorio Ramirez
Jefe de Conservación
H.G.R. No.1
IMSS Mar 09/074920

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O SISTEMAS
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

SERIE: MB203785


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ORDEN DE SERVICIO: 72003870

CONS:

2053

ANTES 2

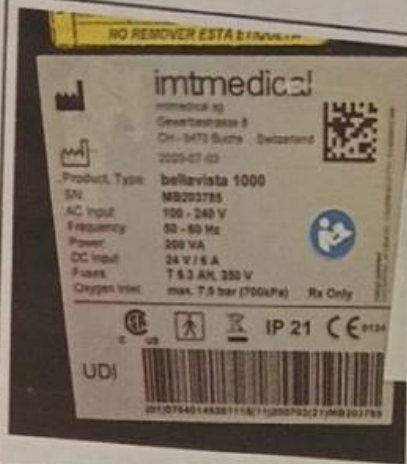

DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECORDO
30 SEP 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902



SELLO UNIDAD MÉDICA:

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA

Carlos Usualdo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
72003870