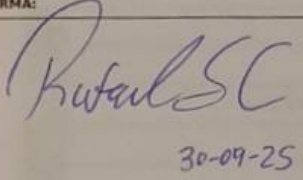
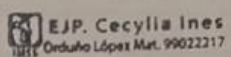
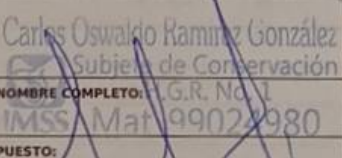


72003875

CONS: 2046

FECHA: 30-09-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				☐ GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐ ☐ GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐ ☐ ASESORÍA ☐ DIAGNÓSTICO ☐ ☐ CAPACITACIÓN ☐			
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☒	
				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANÁ 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANÁ, BAJA CALIFORNIA.							
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN			
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203847	
NO. INVENTARIO:		SOFTWARE: 6.0.2100-0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO:		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: NA		NA		Adulto			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, BB105078; PA-17, 5410702							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒ X FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1		Kit de Mantenimiento Preventivo	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
 30-09-25		 EJP. Cecylia Ines Orduño López Mat. 99022217		 Carlos Oswaldo Ramírez González Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1 IMSS Mat. 990222980			
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Ing. Rafael Sánchez Cordova		EJP. Cecylia Ines		Carlos Oswaldo Ramírez González			
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 30-09-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO 72003875

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: 43203843

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	/	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
2.	CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACIÓN DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZACIÓN	/	
3.	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	mAh
	TEST USB	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.


RUTINA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CONTRATO 050GYR019N09125-019-00



EMS .OCTUBRE. 2020 GSIM-ST-F01-VBELLAVISTA-01

4.	SELFTEST	/	
	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS	/	
	SENSOR DE CO2	X	
	SENSOR DE SPO2	X	
5.	ALERTA ACÚSTICA	X	
	TEST DE VENTILACIÓN	/	
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	510 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	508 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	1.7 rpm
7.	TEST DE ALARMAS	/	
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/	
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/	
8.	REVISION DE BATERIA	/	
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	/	
	ALARMA VISUAL LEDs	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/	
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN	/	
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

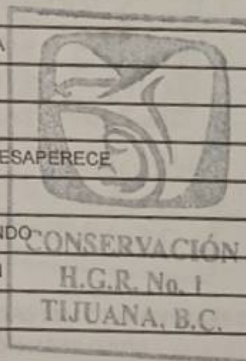

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No 1

Carlos Uswago Ramírez González
Conservación
H.G.R. No 1
IMSS Mat 09022080

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						✓
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						✓
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						✓
	✓/x		✓/x		✓/x		
	✓	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	✓	126 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓ 0.33 Ω
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 mA	CORRIENTE RESIDUAL				
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						✓
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						✓
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						✓
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CÁMARA DEL HUMIDIFICADOR						✓
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO						✓
	30 SEP 2025 VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						✓
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						✓
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						✓
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						✓
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS						✓

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL FABRICANTE

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

**Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1**

OBSERVACIONES:

Rafael Sanchez Cordova
Ing. Rafael Sanchez Cordova

30-09-25

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

EJP. Cecylia Ines
Orduña López Mat. 99022217

USUARIO DEL EQUIPO
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No.1
IMSS Mat. 990224980

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA
NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

2046

imtmedical

imtmedical AG
Gewerbestraße 8
CH-3475 Buochs Switzerland

2025-08-20

bellavista 1000

MB0220847

105 - 240 V
50 - 60 Hz
200 VA
24 V / 5 A
max. 7.0 bar (700kPa) R_z Only

Product Type
SH
AC Input
Frequency
Power
DC Input
Fuses
Oxygen Inlet

CE UK

IP 21

CE 0214

UDI

027 074601483011 133 1 130420127 AM0220847

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBO
3 0 SEP 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



UNIDAD MÉDICA

CONSERVACIÓN
H.G.R. No.
TIJUANA B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subefe de Conservación
H.G.R. No. 1