

72003877

CONS: 2051

FECHA: 30-09-25		NO. REPORTE N/A		NO. DE INGRESO N/A		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. 2			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				CORRECTIVO:			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				☐ GARANTÍA DE SERVICIO ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐ ☐ GARANTÍA DE VENTA ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐ ☐ ASESORÍA ☐ DIAGNÓSTICO ☐ ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: N/A		SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
				REFACCIONES:		EN SITIO: ☒	
				ACCESORIOS:		EMPRESA: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.							
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN			
REPORTO FALLA: N/A				FALLA REPORTADA: N/A			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: N/A							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: N/A							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203971	
NO. INVENTARIO: 202000006752		SOFTWARE: 6-0-2100		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO:		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:			
HORAS DE USO TURBINA: NA		NA		Adulto			
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y VÁLVULAS ELECTRONEUMÁTICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE MEZCLADOR DE OXÍGENO, PRUEBA, AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE TRANSDUCTORES INTERNOS, REVISIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJOS Y CALIBRACIÓN DE LAS MISMAS, PRUEBA DE BLOWER, REVISIÓN DE VÁLVULA DE EXHALACIÓN, CALIBRACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y SERVICIO, VERIFICACIÓN DE CARGA DE BATERÍA, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SERVICIO BASADO EN RUTINA DE MANTENIMIENTO ANEXA.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, B8105028 ; PA-17, 5410702							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒ FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	301.972.001	Kit de Mantenimiento Preventivo	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Ing. Rafael Sanchez Cordova		EJP. Cecylia Ines		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
30-09-25		Subjefe de Conservación		H.G.R. No. 1			
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

FECHA: 30-09-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003877

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE: MB203971

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	/	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	/	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	/	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
2.	CONSERVACIÓN CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
3.	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	mAh
	TEST USB	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

	SELFTEST	/	
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS	/	
	SENSOR DE CO2	X	
	SENSOR DE SPO2	/	
	ALERTA ACÚSTICA	/	
5.	TEST DE VENTILACIÓN	/	
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)	/	25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)	/	5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm	/	15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)	/	21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)	/	70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)	/	100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO	/	
	TEST DE CIRCUITO	/	
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)	/	500 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)	/	1.7 rpm
7.	TEST DE ALARMAS	/	
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE	/	
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO	/	
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE	/	
8.	REVISION DE BATERIA	/	
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	/	
	ALARMA VISUAL LEDs	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE	/	
	ALARMA ACÚSTICA	/	
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO	/	
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN	/	
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)	/	60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)	/	2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)	/	10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)	/	50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos González
Subgerente de Conservación
H.G.R. No.1
MEX MEX 02024980

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						✓
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA						✓
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA						✓
	✓/x		✓/x		✓/x		
	✓	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	✓	124 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓ 0.33 Ω
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓ 0.1 μA
	✓	0.1 mA	CORRIENTE RESIDUAL				
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)						
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						✓
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						✓
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						✓
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR						✓
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						✓
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						✓
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						✓
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						✓
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						✓
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						✓

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DE EQUIPO
*** EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA**
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
HGR No. 1

OBSERVACIONES:

Rafael SC
Ing. Rafael Sanchez Cordova

30-09-25

REALIZÓ EL SERVICIO
 NOMBRE Y FIRMA

EJP. Cecylia Ines
 IMSS Orduño López Mat. 99022217

USUARIO DEL EQUIPO
 NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

Carlos Oswaldo Ramirez
Carlos Oswaldo Ramirez
 IMSS H.G. No. 1 Tijuana, B.C.

JEFE DE CONSERVACION Y/O BIOMÉDICA
 NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)


NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

SERIE:	MB203971	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	ORDEN DE SERVICIO: 72003877	CONS:	2061
---------------	-----------------	------------------------------	------------------------------------	--------------	------


ANTES 2



DURANTE 1

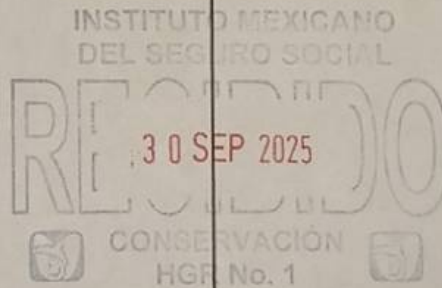

DESPUÉS 1

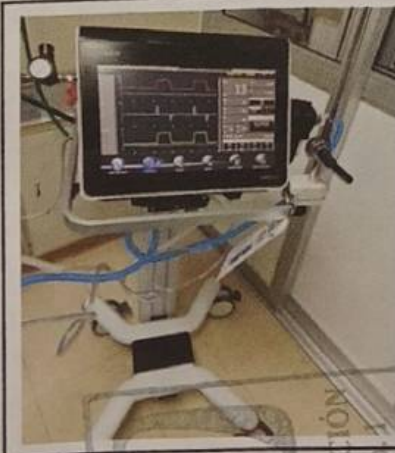

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No 1



SELLO UNIDAD MÉDICA



Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMEDICA