

CONS: 2059

Calzada de Itaipan No. 479 Col. Álamos, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03400, Ciudad de México, Tel: (55) 4196-5500

FECHA: 30-09-25

FOLIO DE ORDEN DE SERVICIO

72003882

VENTILADOR PULMONAR

MODELO BELLAVISTA

NÚMERO DE SERIE:

4B204012

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	REALIZÓ	
		v/x	MEDICIÓN
1.	REVISIÓN E INSPECCIÓN FÍSICA DE:		
	ESTRUCTURA DEL EQUIPO, CABLE DE LÍNEA	/	
	CONECTORES NEUMÁTICOS Y MANGUERAS DE GASES	/	
	TIPO DE CIRCUITO (A, C, D, E)	/	E
	FILTRO DE BACTERIAS	/	
	SET DE FILTROS DE REPUESTO	/	
	*PULSIOXÍMETRO	X	
	*SENSOR DE CAPNOGRAFÍA	X	
	*ADAPTADOR DE VÍA AÉREA PARA CAPNOGRAFÍA	X	
	*BRAZO	/	
	ETIQUETAS DE GARANTÍA EN BUEN ESTADO	/	
	*ADAPTADOR DE DOBLE RAMA	/	
	BASE RODABLE	/	
2.	CALIBRACIONES:		
	ZERORIZACION DE TODOS LOS TRANSDUCTORES DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN DE GANANCIA DE PRESIÓN	/	
	CALIBRACIÓN A ZERO DE FLUJO INSPIRATORIO	/	
	CONFIGURACIÓN DE CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	CALIBRACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO A PASOS	/	
	ZERORIZACION DE FLUJO DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE REFERENCIA DE FUELLE	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA INSPIRATORIA	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE OXÍGENO	/	
	COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN DE VÁLVULA DE HONGO	/	
	CALIBRACIÓN DE RETRASO DE SENSOR DE FLUJO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO	/	
	CALIBRACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE NEBULIZADOR	/	
3.	VERIFICACIÓN DE:		
	TEST DE VÁLVULAS	/	
	TEST DE ALARMAS	/	
	FUNCIONALIDAD DE LEDs (ROJO, AMARILLO, AZUL) A AMBOS LADO DEL EQUIPO	/	
	TEST DE SALIDA A USUARIO	/	
	REVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN AMBIENTAL	/	
	REVISIÓN DE BATERÍAS	/	
	TEST USB	/	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

**Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1**

mAh

Carlos Ortiz Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No.1
09/09/2020

	SELFTEST		
4.	REVISIÓN DE SENSORES EXTERNOS		
	SENSOR DE CO2	X	
	SENSOR DE SPO2	X	
	ALERTA ACÚSTICA	X	
5.	TEST DE VENTILACIÓN		
	SÍMBOLO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO		
	TEST DE CIRCUITO		
	PRESIÓN PICO (25mbar) (± 3 mbar)		25 mbar
	PEEP (5mbar) (± 1 mbar)		5 mbar
	FRECUENCIA RESPIRATORIA (± 1 rpm) 15rpm		15 rpm
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 21% ($\pm 3\%$)		21 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 70% ($\pm 3\%$)		70 %
	FRACCIÓN INSPIRADA DE O2 100% ($\pm 3\%$)		100 %
6.	TEST DE VENTILACIÓN AVANZADO		
	TEST DE CIRCUITO		
	VOLUMEN INSP 500mL (± 75 mL)		504 mL
	VOLUMEN EXHALATORIO 500mL (± 75 mL)		498 mL
	TIEMPO INSPIRATORIO 1.7 seg (± 0.3 seg)		1.2 rpm
7.	TEST DE ALARMAS		
	ALARMA DE DESCONEXIÓN DE CIRCUITO DE PACIENTE		
	ALARMA VISUAL ROJA EN AMBOS LADOS DEL EQUIPO		
	AL RECONECTA EL EQUIPO LA ALARMA DESAPARECE		
8.	REVISION DE BATERIA		
	MENSAJE DE FALLO DE SUMINISTRO DE ENERGIA		
	ALARMA VISUAL LEDs		
	ALARMA ACÚSTICA		
	AL RECONECTAR AL SUMINISTRO ELÉCTRICO LA ALARMA DESAPARECE		
	ALARMA ACÚSTICA		
	LAS BATERÍAS MUESTRAN EL ESTADO DE CARGANDO		
9.	VERIFICACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN		
	PRESIÓN PAT INSP (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
	PRESIÓN PAT PROX (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
	PRESIÓN FUELLE (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
	PRESIÓN ANALIZADOR EXTERNO (60mbar) (± 2 mbar)		60 mbar
10.	VERIFICACIÓN DE FLUJO DE OXÍGENO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)		2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)		10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		50 L/min
11.	VERIFICACIÓN DE FLUJO INSPIRATORIO		
	FLUJO 2L/min (± 0.3 L/min)		2 L/min
	FLUJO 10 L/min (± 0.5 L/min)		10 L/min
	FLUJO 50L/min (± 2.5 L/min)		50 L/min

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

12.	APLICACIÓN DE KIT DE MANTENIMIENTO UNA VEZ AL AÑO						✓		
13.	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						✓		
14.	REALIZAR PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA								
	✓/x		✓/x		✓/x				
	AISLAMIENTO	✓	0.1 Mohm	VOLTAJE DE LINEA	✓	124 V	RESISTENCIA A TIERRA	✓	0.34 Ω
	CORRIENTE DE FUGAS EN CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGAS AC CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DE CHASIS CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA
	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE DE FUGA DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA
	CORRIENTE AUXILIAR AC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION NORMAL	✓	0.1 μA	CORRIENTE AUXILIAR DC AL PACIENTE CONDICION DE PRIMERA FALLA	✓	0.1 μA
	CORRIENTE RESIDUAL	✓	0.1 mA						
15.	RUTINA DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPO COMPLEMENTARIO (HUMIDIFICADOR)								
	REVISIÓN E INSPECCIÓN VISUAL DE ESTRUCTURA FÍSICA, CONTACTOS ELÉCTRICOS Y CONECTORES.						✓		
	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.						✓		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA CÁMARA DE HUMIDIFICACIÓN.						✓		
	ESTADO FÍSICO DE SEGURO PARA CAMARA DEL HUMIDIFICADOR						✓		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DEL ELEMENTO TÉRMICO.						✓		
	VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE ALARMAS VISUALES						✓		
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL SENSOR DE TEMPERATURA (SI TIENE)						✓		
	VERIFICACIÓN Y ESTADO FÍSICO DEL CALENTADOR DE TUBO (SI TIENE)						✓		
	VERIFICACIÓN DEL TEST INGENIERIL						✓		
16.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FINAL Y PRUEBAS DE STRESS.						✓		

NOTA: NO OMITIR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSIDERADAS EN LOS MANUALES DEL EQUIPO

* EN CASO DE CONTAR CON LA OPCIÓN HABILITADA
INDICAR CUANDO LA OPCION NO APLIQUE (N/A)

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

OBSERVACIONES:

Rafael SC
Ing. Rafael Sanchez Cordova

EJP. Cecylia Ines
Ordoño López Martínez 20022217

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No.1
IMSS Ma. 99074980

30-09-25

REALIZÓ EL SERVICIO
NOMBRE Y FIRMA

USUARIO DEL EQUIPO

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O BIOMÉDICA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE MATRÍCULA (SI APLICA)

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"
SERVICIOS DE INGENIERÍA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

SERIE: MB204012

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ORDEN DE SERVICIO: 72003882


CONS:

2059


ANTES 2



DURANTE 1

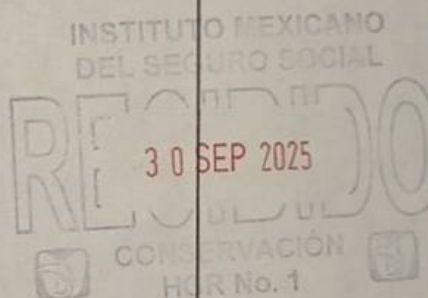


DESPUÉS 1

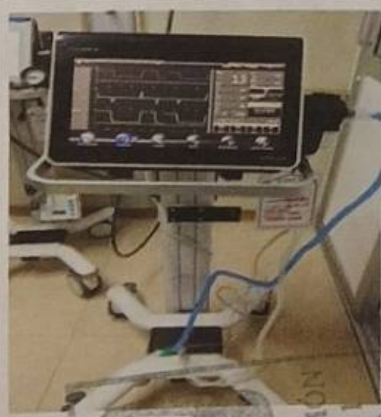

Clave Presupuestal
0205 0214 2902



SELLO UNIDAD MÉDICA

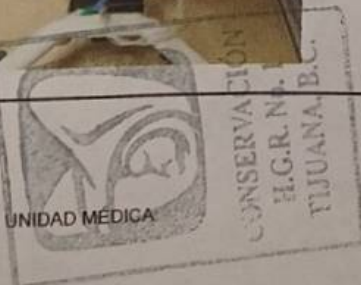

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA