



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86517

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
28	10	25		112-00			

CLIENTE Unidad de detección y diagnóstico Clínica de mama

DIRECCION Carada #16801

POBLACION Baja California

TELEFONO 669-173-2405

FAX

INGENIERO VSC

INGENIERO

INGENIERO

INGENIERO

EQUIPO Mastografo

MARCA

Hologic

MODELO Senia Dimensions Awa 2D 3000

SERIE

581131800599

REPORTE 4584

COTIZACION

TRABAJO REALIZADO Segundo Mantenimiento Preventivo

Se revisa funcionamiento general del equipo.

Se comprueba exceso de aceite en partes móviles y lubricación de partes.

Se limpian y lubrican mecanismos, se calibran vibradores, altavoz y sistema de compresión.

Se verifica imagen y sistema de envío.

Se limpian, analiza y desfogueta disco duro y se realiza respaldo.

El equipo queda perfectamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.

HORARIO DE TRABAJO

MAÑANA

TARDE

SUBTOTAL

TRABAJO HORAS

VIAJE HORAS

FECHA

E

S

E

S

L

M

M

J

V

S

10:00

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBO 28 OCT 2025

CONSERVACIÓN HGR No. 1

ISS DELEGACION EN SAJA CALIFORNIA

TOTAL

5

1

1



IMSS UDDCM

CLINICA DE MAMA TIJUANA, B.C.

BOLETOS DE AVION

BOLETOS DE CAMION

VIATICOS

Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CATALOGO
1	Kit de limpieza y mantenimiento	

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR

UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramírez González



Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1

Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	FIRMA DEL RESPONSABLE	DEPTO. DE MANTENIMIENTO
------------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P 03100

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137

CLIENTE

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMENSIONS

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00

FECHA: 28/10/25

UNIDAD: Unidad de Detección y Diagnostico Clínica de Mama

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: MASTOGRAFIA

MARCA: HOLOGIC

SERIE: SDM131800599

EQUIPO: MASTOGRAFO

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

VERSION OS: 1.10.0.5

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SI	NO	
☒	☐	1 REVISION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO
☒	☐	2 SOPLETEO DE TARJETAS
☒	☐	3 INSPECCION Y LUBRICACION DEL MECANISMO DE ROTACION DEL BRAZO
☒	☐	4 INSPECCION Y LUBRICACION DEL TORNILLO SINFIN DEL MOVIMIENTO VERTICAL
☒	☐	5 OBTENCION DE LOG FILE Y BACK UP
☒	☐	6 REVISION DEL SISTEMA DE COMPRESION
☒	☐	7 REVISION DE VOLTAJES DE ENTRADA
☒	☐	8 REVISION Y CALIBRACION DE FILAMENTOS
☒	☐	9 REVISION DEL CAMPO DE LUZ DEL COLIMADOR
☒	☐	10 REVISION DEL CAMPO DE RAYOS X
☒	☐	11 REVISION Y CALIBRACION DE LA CORRIENTE DEL TUBO
☒	☐	12 REVISION Y CALIBRACION DE VOLTAJE DE TUBO
☒	☐	13 EVALUACION DE ARTEFACTOS EN DETECTOR
☒	☐	14 REVISION DE CALIDAD DE IMAGEN EN DETECTOR
☒	☐	15 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARTES MECANICAS
☒	☐	16 SOPLETEO DE COLIMADOR
☒	☐	17 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES
☒	☐	18 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LA CONSOLA
☒	☐	19 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE ADQUISICION
☒	☐	20 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE TRABAJO
☒	☐	21 REVISION DE SENSOR DETECTOR DE PALETAS
☒	☐	22 PIXEL MAP
☒	☐	23 PRUEBAS DE ENVIO DE IMAGENES HACIA LAS DISTINTAS SALIDAS
☒	☐	24 PRUEBAS FINALES
☒	☐	EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO, AL 100%

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDADO
28 OCT 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



IMSS DELEGACIÓN EN
BAJA CALIFORNIA



IMSS
UDDCM
CLÍNICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No 1

OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:



FUNCIONANDO
CORRECTAMENTE



EN CENTRO DE
SERVICIO



PROGRAMAR SALIDA
PARA REPARACIÓN

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

DIRECTOR



UDDCM - CLÍNICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582

USUARIO

Carlos Oswaldo Ramirez

Subjefe de Conservación



H.G.R. No. 1

Mat. 99266582

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN



Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
FECHA: 28/10/2025

UNIDAD UNIDAD DE DETECCION Y DIAGNÓSTICO CLINICA DE MAMA

COMPAÑIA SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No 86517

TIPO DE SERVICIO SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA MASTOGRAFIA

TIPO:

MASTOGRAFO

☒

RAYOS X

☐

MARCA HOLOGIC MODELO SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000 NUM. SERIE SDM131800599

VERIFICACION DE PARAMETROS

A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 20 KVP A 49 EN PASOS DE 1 EN 1 KVP.


B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN.

D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFI, Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.

E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA

F) CONCLUSION: SE DEJA EL EQUIPO FUNCIONANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

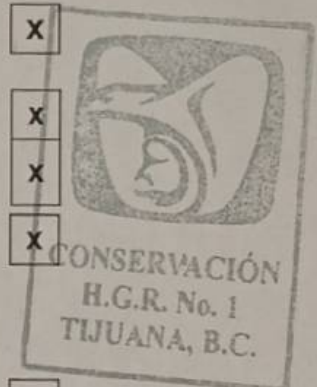

ING. VRANI SOTO

NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO SMH

DELEGACIÓN
JA CALIFORNIA



Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR
UDDCM - CLINICA DE MAMA
Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582
NOMBRE Y FIRMA
TÉCNICO / JEFE DE AREA

28/10/2025

Carlos Oswaldo Ramírez González



Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980
NOMBRE Y FIRMA
CONSERVACIÓN / BIOMEDICA

28/10/25