



Innovación y servicio en equipos médicos

FR-07-08 Edición 0

ORDEN DE SERVICIO

Nº 86519

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE TRABAJO	CONTRATO	FACTURA	GARANTIA	MONTAJE
30	10	25		5067/CMH/01175- 22-00			

CLIENTE *Unidad de detección y diagnóstico Clínica de mama*

DIRECCION *Canadá #1601* POBLACION *Boja California*

TELEFONO *669-173-2405* FAX

INGENIERO *VSC*

INGENIERO

INGENIERO

INGENIERO

EQUIPO *Mastergraph* MARCA *Hologic*

MODELO *Selenia Dimensions Avio 2D 3000* SERIE *5B1131901174*

REPORTE *4586*

CONIZACIÓN

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

TRABAJO REALIZADO *Segundo Mantenimiento Preventivo*

*Se revisa funcionamiento general del equipo
Se realiza ejercicio de ajuste en focos, mecanismos y sistema de trabajo.
Se limpian y lubrican mecanismos.
Se calibran filamentos, altura y fuerza de compresión.
Se calibra y verifica sistema de transmisión.
Se calibra y verifica módulo de biopsia.
Se verifica imagen y sistema de envío.
Se verifica y analiza disco duro y se realiza respaldo.*

El equipo queda satisfactoriamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.

HORARIO DE TRABAJO				SUBTOTAL		FECHA
MAÑANA	TARDE	TRABAJO	VIAJE			
E	E	HORAS	HORAS			
L						
M						
M						
J	10:00	—	16:00	6	7	30/10/25
V						
S						
ELEGACIÓN EN CALIFORNIA				TOTAL	6	7

IMSS DELEGACIÓN EN
BAJA CALIFORNIA




IMSS
UDDCM
CLÍNICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

BOLETOS DE AVION \$

BOLETOS DE CAMION \$

VIATICOS \$

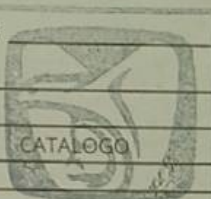

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

MATERIAL DE CONSUMO

CANTIDAD	DESCRIPCION
	<i>1 caja de tubo, 1 lit de lubricante, 1 lit de lubricante</i>

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta

DIRECTOR
IMSS UDDCM - CLÍNICA DE MAMA
Ced. Prof. 7535327 Mat. 99266582

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL INGENIERO NOMBRE DEL RESPONSABLE FIRMA DEL RESPONSABLE DEPTO. DE MANTENIMIENTO

MINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. DIAGONAL Num. 29, COL. DEL VALLE MEXICO, CDMX C.P. 03100

TEL/FAX: (55) 5687-6175 (55) 5887-6164 (55) 5687-6166 E-mail: servicio@smh.com.mx

R.F.C. SUM-890327-137

CLIENTE

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIMENSIONS

CONTRATO NUMERO: 050GYR019N09125-022-00

FECHA: 30/10/25

UNIDAD: Unidad de Detección y Diagnostico Clínica de Mama

DATOS DEL EQUIPO:

UBICACIÓN: MASTOGRAFIA

EQUIPO: MASTOGRAFO

MARCA: HOLOGIC

MODELO: SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000

SERIE: SDM131901174

VERSION OS: 1.10.0.5

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SI	NO	
☒	☐	1 REVISION DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO
☒	☐	2 SOPLETEO DE TARJETAS
☒	☐	3 INSPECCION Y LUBRICACION DEL MECANISMO DE ROTACION DEL BRAZO
☒	☐	4 INSPECCION Y LUBRICACION DEL TORNILLO SINFIN DEL MOVIMIENTO VERTICAL
☒	☐	5 OBTENCION DE LOG FILE Y BACK UP
☒	☐	6 REVISION DEL SISTEMA DE COMPRESION
☒	☐	7 REVISION DE VOLTAJES DE ENTRADA
☒	☐	8 REVISION Y CALIBRACION DE FILAMENTOS
☒	☐	9 REVISION DEL CAMPO DE LUZ DEL COLIMADOR
☒	☐	10 REVISION DEL CAMPO DE RAYOS X
☒	☐	11 REVISION Y CALIBRACION DE LA CORRIENTE DEL TUBO
☒	☐	12 REVISION Y CALIBRACION DE VOLTAJE DE TUBO
☒	☐	13 EVALUACION DE ARTEFACTOS EN DETECTOR
☒	☐	14 REVISION DE CALIDAD DE IMAGEN EN DETECTOR
☒	☐	15 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE PARTES MECANICAS
☒	☐	16 SOPLETEO DE COLIMADOR
☒	☐	17 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CONTROLES
☒	☐	18 REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE UPS DE LA CONSOLA
☒	☐	19 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE ADQUISICION
☒	☐	20 VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA DEL UPS DE LA ESTACION DE TRABAJO
☒	☐	21 REVISION DE SENSOR DETECTOR DE PALETAS
☐	☒	22 PIXEL MAP
☒	☐	23 PRUEBAS DE ENVIO DE IMAGENES HACIA LAS DISTINTAS SALIDAS
☒	☐	24 PRUEBAS FINALES

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO, AL 100%


 IMSS DELEGACIÓN EN
 SAJA CALIFORNIA

 Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1


OBSERVACIONES:

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:


 FUNCIONANDO
 CORRECTAMENTE

 EN CENTRO DE
 SERVICIO

 PROGRAMA SALIDA
 PARA REPARACIÓN

 Ing. Vani Soto
 Ing. Servicio SMH

 Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta
 DIRECTOR

UDDCM - CLINICA DE MAMA

Céd. Prof. 7535327 Mat. 99266582


OFICINA SERVICIO TÉCNICO: DIAGONAL # 29 COL. DEL VALLE C.P. 03100 CDMX.

TEL.: 01 (55) 56 87 - 61 64, 66, 55, 75 e-mail servicio@smh.com.mx

SUC. GUADALAJARA: TEL.: (33) 3123 - 1563 TEL/FAX (33) 3123 - 136

 Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS MEX 39024980

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN

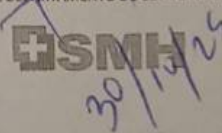



Innovación y servicio en equipos médicos

SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

REPORTE DE REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EQUIPOS DE MASTOGRAFIA Y RAYOS X

REVISION DE PARAMETROS SEGÚN NORMAS VIGENTES

FECHA: 30/10/2025

UNIDAD UNIDAD DE DETECCION Y DIAGNÓSTICO CLINICA DE MAMA

COMPAÑÍA SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO S.A. DE C.V.

ORDEN DE SERVICIO No 86519

TIPO DE SERVICIO SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SALA MASTOGRAFIA

TIPO:

MASTOGRAFO

☒

RAYOS X

☐

MARCA HOLOGIC MODELO SELENIA DIMENSIONS AVIA 2D 3000 NUM. SERIE SDM131901174

VERIFICACION DE PARAMETROS


A) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL KVP EN EL RANGO DE 20 KVP A 49 EN PASOS X
DE 1 EN 1 KVP.

B) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE MAS PARA SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO

C) REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS TIEMPOS DE EXPOSICIÓN.

D) REVISIÓN A JUSTE DEL TAMAÑO DEL CAMPO DE LUZ CON EL CAMPO DE RADIACIÓN
DEL TAL MANERA QUE LA SUMA DE DIFERENCIA EN CADA EJE NO SEA MAYOR AL 2% DFI,
Y QUE LA SUMA TOTAL DE DIFERENCIA NO SEA MAYOR AL 3% DFI.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

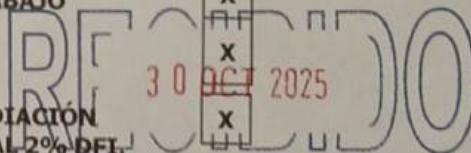

CONSERVACIÓN
HGR No. 1



E) REVISION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS FILTROS DEL SISTEMA

☒

F) CONCLUSION: SE DEJA EL EQUIPO FUNCIONANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES

ING. VRANI SOTO
NOMBRE Y FIRMA
INGENIERO SMH

DELEGACIÓN EN
A CALIFORNIA



IMSS
UDDCM - CLÍNICA DE MAMA
TIJUANA, B.C.

Dr. Jesús Roberto Gastélum Acosta



DIRECTOR
UDDCM - CLÍNICA DE MAMA
Céd. Profesional 99266582
TÉCNICO / JEFE DE AREA

30/10/25



Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjeto de Conservación
H.G. No. 1
MAY 2024 0000

NOMBRE Y FIRMA
CONSERVACIÓN / BIOMEDICA

30/10/25